

LOJER - YLI 100 VUOTTA HISTORIAA



TUOTEKUVASTO  
FYSIOTERAPIA, HIERONTA JA WELLNESS



**LOJER**<sup>®</sup>

## 4 Hoitopöydät

Fysioterapia- ja hierontapöydät, kauneudenhoito- ja työtuolit, jakkarat, mattohoitopöydät, kippilaudat.



## 20 Harjoituslaitteet

Lääkinnällisen harjoitus-terapian vetolaitteet, harjoituspenkit, puolapuut, voimaharjoittelulaitteet.



## 32 Liikunta- ja kuntoharjoittelu

Kuntopyörät, crosstrainerit, juoksumatot, soutulaitteet, nojapuut.



## 41 Harjoitusvälineet

Vastuskuminauhat ja tuubit, käsien harjoitus- ja tasapainotuotteet, pallot, painomansetit, käsi- ja levypainot ja painotangot.



## 55 Paineaaltohoitolaitteet

Radiaaliset ja fokusoidut paineaaltohoitolaitteet, magneettiterapia, sähkö- ja ultraäänilaitteet, tens, tems ja elektrodit.



## 62 Akupunktio

Akupunktioneulat, neulastimulaattori, ohjetaulut.



## 68 Hieronta, lämpö- ja kylmähoito

Hierontaöljyt, suojapaperit, lämpö- ja kylmähoitotuotteet, parafiinaltaat.



## 74 Terapiavälineet

Traktio- ja blackroll-tuotteet, kiilat, matot, ilmalastat, tyynyt.



## 79 Vastaanoton varustus ja tarvikkeet

Potilasverhot ja sermit, anatomiset opetusvälineet ja julisteet, mittausvälineet, teipit, voiteluaineet.



# Hoitopöydät


Hoitopöytä on terapeutin tärkein työkalu. Tutustu laajaan hoitopöytävalikoimaamme ja löydä oma yksilöllisiä tarpeitasi palveleva hoitopöytä.



# Lojer-verhoilujen materiaalit ja värimallit

## Future

Paloturvallinen Future on tyylikäs, himmeästi hoitava ja ympäristöystävällinen materiaali. Antibakteeri-, antimikrobi- ja homeenestokäsittelyn ansiosta Future soveltuu erinomaisesti vaativiin olosuhteisiin. Materiaalissa on käytetty edistyksellistä pinnoiteteknologiaa, joka säilyy pinnalla eikä kulu puhdistettaessa. Erittäin hyvin kulutusta kestävä materiaali on jopa 3-6 kertaa perinteisiä keinoahkamateriaaleja kestävämpää (Martindale yli 300 000).

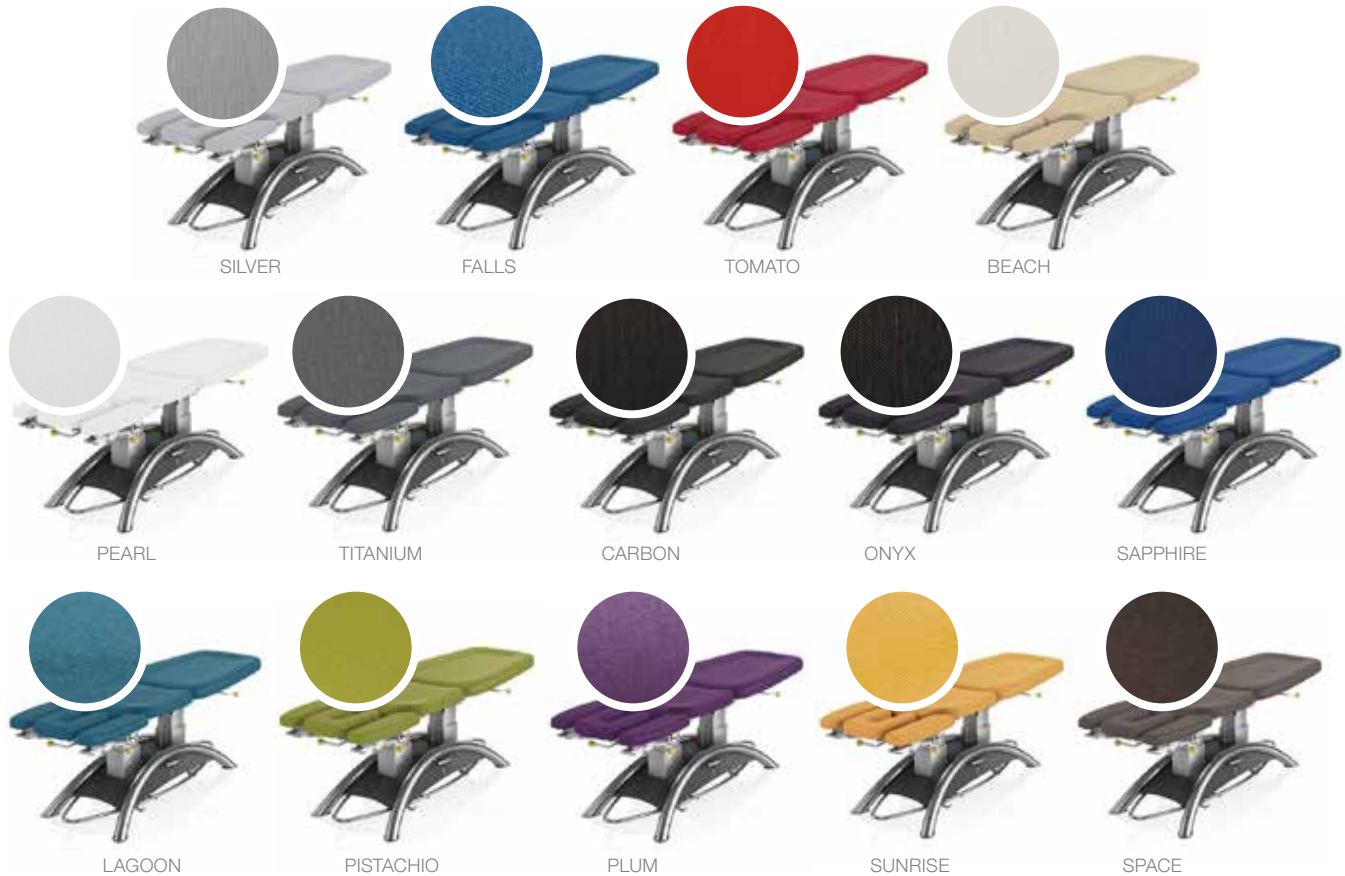

**Future-verhoilussa** käytetty edistyksellinen pinnoiteteknologia on saanut ISO-sertifioinnit, jotka todistavat materiaalien kyvystä tuhota viruksia tai estää niiden kasvua.



Tutustu tarkemmin materiaaleihin, väreihin ja puhdistusohjeisiin [www.lojer.com](http://www.lojer.com) >> Huolto ja palvelut >> Palvelut >> Materiaalivaihtoehdot

## Nature

Nature on korkealaatuinen ja kestävä uuden sukupolven ympäristöystävällinen materiaali. Materiaali on Öko-Tex standardin mukainen, eikä näin ollen pidä sisällään mitään raskasmetalleja eikä ftalaatteja.



## Manuthera 242 – maailman monipuolisin hoitopöytä

Suomalaisten asiantuntijoiden kehittämää, patentoitua ja ennennäkemätöntä tekniikkaa edustava Lojer Manuthera® 242 mobilisaatio- ja manipulaatiopöytä tukee terapeutin työtä parhaan diagnosoinnin ja hoidon tarjoamisessa potilaille.

Manuthera 242 on all-in-one-hoitopöytä vaativaan tutkimus- ja hoitotyöhön erilaisille manuaaliterapeuteille urheiluhierojasta naprapaateihin, osteopaateihin, OMT-fysioterapeuttihin, fysioterapeutteihin ja kiropraktikkoihin. Manuthera 242 antaa terapeutin työskentelyyn täysin uuden ulottuvuuden: sen takaavat patentoitu, kahden synkronoidun moottorin ohjausjärjestelmä, ennennäkemättömät multi-traktio-ominaisuudet ja lukemattomat hoito- ja diagnosointimenetelmät mahdollistava rakenne ja toiminnallisuudet.

Manuthera 242 tarjoaa potilaalle laadukkaan hoitokokemuksen. Kaikissa hoitotoimissa tukeva runko, anatominen muotoilu ja pehmustus sekä helposti puhtaana pidettävät pintamateriaalit tekevät potilaan olosta miellyttävän. Pöydän makuutaso liikkuu kuin potilaan selkäranka, eikä terapeutin tarvitse nostaa potilasta. Pöydän pehmeät ja kevyet liikkeet luontaisilla liikeradoilla tekevät hoidosta kivutonta ja rentouttavaa. Miellyttävä hoitokokemus mahdollistaa suuremmat toistomäärät ja näin tehokkaamman hoidon. Sähköisen kallistustoiminnon avulla huonokuntoinenkin potilas pääsee pöydälle helposti. Monimenetelmähoitoihin joustavasti mukautuva tekniikka varmistaa, ettei potilaan tarvitse nousta pöydältä kesken hoidon.

### 242 Manuthera 242 mobilisaatiopöytä



*manuthera*<sup>242</sup>



MAHP242



*"Manuthera 242 on kuin osa minua. Yhdelläkään muulla hoitopöydällä, jonka olen nähnyt tai jonka kanssa olen työskennellyt, ei ole ollut niin helposti käytettäviä ja hoidollisesti tarkkoja ominaisuuksia kuin Manuthera 242 -hoitopöydällä"*

Thorbjörn Granqvist, Noventuskliniken, Helsingborg, Ruotsi



Tutustu Manuthera 242 -itseopiskeluportaaliin, josta löytyy lähes 100 ilmaista ammattilaisten tekemää videota Manuthera 242 -pöydän hyödyntämisestä. [www.manuthera242.com](http://www.manuthera242.com)





Lue lisää ja tutustu mallistoon: [Lojer.com](http://Lojer.com) » Fysioterapia ja wellness » Hoitopöydät » Capre FX



Lojer Capre FX5  
(kuvan tuote sisältää lisävarusteita)

## Lojer Capre FX

Lojer Capre FX on hoitopöytien eliittiä, joka muotoilunsa ja ominaisuuksiensa ansiosta täyttää vaativimmankin käyttäjän tarpeet. Pöydän kaksivärinen anatomisesti muotoiltu päällyste tukee asiakasta ja tyylikkään designin ansiosta Lojer Capre FX on myös erinomainen sisustuselementti.

Hiljainen Lojer Capre FX mahtuu pieneenkin tilaan, sillä kaksoispilarien ansiosta pöytä nousee suoraan ylöspäin. Alarungon muotoilu mahdollistaa pöydän käytön myös tuoliasennossa ja monipuoliset säätömahdollisuudet, kuten sivuille kääntyvät käsituet helpottavat työskentelyä. Jalkaosan portaaton flexio-liike ja pöytätason laaja korkeudensäätöalue helpottavat pöydälle ja siitä pois nousemista.


Sähköinen korkeudensäätö 48–88 cm, jota voidaan säätää hands free -korkeudensäätökehikolla mistä tahansa puolelta pöytää. Päätuiki ja jalkaosa säätävät portaattomasti kaasujousella. Voit valita joko O- tai U-mallisen pääosan. Vakiovarusteena ympäriljjiin, keskuslukittavat pyörät, kaksivärinen anatomisesti muotoiltu verhoilu, valkoiseksi maalattu runko ja musta metallinen peitelevy. Valinnainen leveys 55, 65 tai 75 cm. Maksimikuormitus 250 kg.

Selkeiden pintojen ja koteloitun moottorin ansiosta pöydän puhtaanapito on helppoa.

## Mallisto

**FX3** 3-osainen makuutaso yhdellä verhoiluvärillä

**FX5** kuten FX3 ja lisänäi portaattomasti pikasäädettävät käsituet. Pöytä yhdellä tai kahdella verhoiluvärillä.

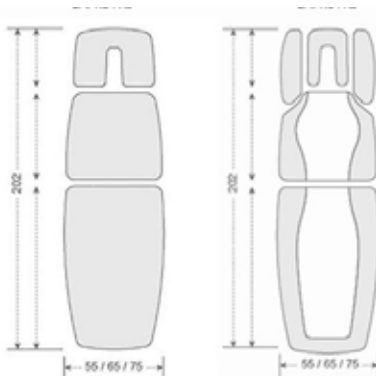

Voit halutessasi vaihtaa pöytään Capre F -pöydän verhoilun



Lue lisää ja tutustu mallistoon: [Lojer.com](http://Lojer.com) » Fysioterapia ja wellness » Hoitopöydät » Capre F



Lojer Capre F5 (kuvan tuote sisältää lisävarusteita)

## Lojer Capre F

Tämä monipuolinen, jaetulla pöytäosalla varustettu pöytä on ennen kaikkea tarkoitettu kuntoutuksen, manuaalisen terapian ja fysioterapian tarpeisiin. Muunneltavuus, säädettävyyden ja hiljainen käyntiäänensä lisäävät pöydän käyttömukavuutta ja toiminnallisuutta.

Hoitopöytä on tukeva, siinä on laaja korkeudensäätöalue ja säätöjä on helppo käyttää.

Laaja korkeudensäätöalue, helppokäyttöiset kaasujousisäätöiset käsituet ja sivulevikkeet, jalkaosan portaaton ekstensio- ja flexio-liike sekä rungon tukevuus parantavat työergonomiaa ja työn tehokkuutta.


Päätuiki ja jalkaosaa säätävät portaattomasti kaasujousella. Voit valita joko O- tai U-mallisen pääosan. Sähköinen korkeudensäätö jalkakytkimellä välillä 45–92 cm. Monipuolisesti lisävarusteita valittavissa tarpeen mukaan. Pöytään valittavissa olevat leveydet 55, 60, 65 tai 75 cm. Maksimikuormitus 210 kg.

Selkeiden pintojen ja koteloidun moottorin ansiosta pöydän puhtaanapito on helppoa. Capre F on saatavissa myös hydraulisena mallina.

## Mallisto

**F3 (3-osainen makuutaso)**

**F5 (kuten F3 sekä lisäksi kaasujousella portaattomasti säädettävät käsituet)**

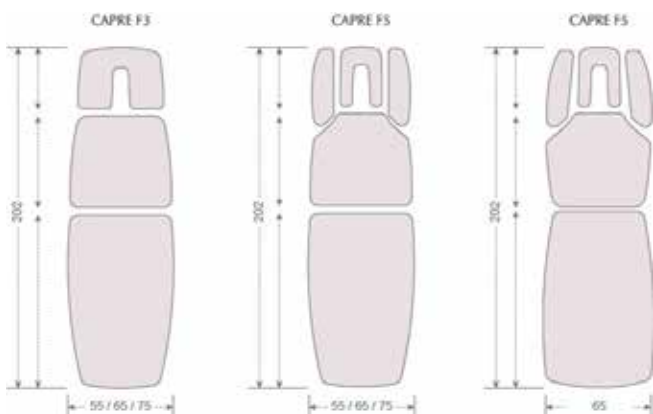

Katso Capre-pöytien ominaisuusvideot **Lojerin Youtube-kanavalta** <http://youtube.com/lojergroup>





Lue lisää ja tutustu mallistoon: [Lojer.com](http://Lojer.com) » Fysioterapia ja wellness » Hoitopöydät » Capre M




Lojer Capre M4 (kuvan tuote sisältää lisävarusteita)

## Lojer Capre M

Tukeva ja helppokäyttöinen Lojer Capre M on muotoilunsa ja väri vaihtoehtojensa ansiosta piristävä uutuus peruspöytärajontaan. Laadukas, sähkötoiminen Lojer Capre M on suunniteltu erityisesti hieronnan ja perusfysioterapian tarpeisiin ja se edustaa hinta-laatu-suhteeltaan markkinoiden kärkeä. Pöydässä on mukana kaikki perustoiminnot ja yhtenäinen pöytä-taso, joka sopii erinomaisesti varsinkin hierojien tarpeisiin.

Päätuki säätyy portaattomasti kaasujousella. Voit valita joko O- tai U-mallisen pääosan. Mallin korkeudensäätöalue on 45–92 cm. Monipuolisesti lisävarusteita valittavissa tarpeen mukaan. Pöytään valittavissa olevat leveydet 55, 60, 65 ja 80 cm. Maksimikuormitus 210 kg.

Selkeiden pintojen ja koteloidun moottorin ansiosta pöydän puhtaanapito on helppoa. Capre M on saatavissa myös hydraulisena mallina.

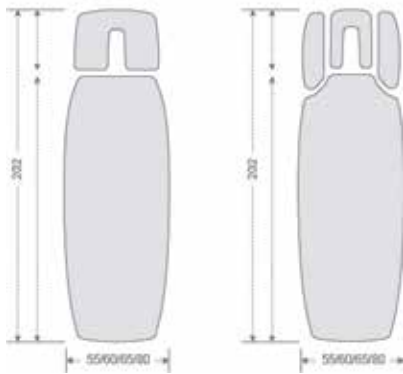

Katso Capre-pöytien ominaisuusvideot **Lojerin Youtube-kanavalta** <http://youtube.com/lojergroup>

## Lisävarusteet Capre-hoitopöytiin

### CA100 Keskuslukittavat pyörät

Lisävarusteena Capre M, F ja E -malleihin, vakiona Capre FX -mallissa. Tehdasasenteinen lisävaruste, mainittava pöytätilauksen yhteydessä.

### CA101 Hands free - korkeudensäätökehikko

Lisävarusteena Capre M ja F -malleihin, vakiona Capre FX -mallissa. Tehdasasenteinen lisävaruste korkeudensäätöön, mainittava pöytätilauksen yhteydessä.

### CA102 Sivulevike pari

### CA103 Sivulevike pari

Capre M -sivulevikkeet, jotka ovat säädettävissä vaakatasossa kolmeen eri asentoon. Huom! Onnistuu myös jälkiasennuksena.

### CA104 Kaksoissaranoitu pääntuki

Kaksoissaranoitu pääosa mahdollistaa potilaan istuma-asennon käsittelyn aikana. Lisävarusteen avulla pääntukea voidaan nostaa horisontaalisesti. Lisävarusteen voi asentaa vain pöytiin, joissa on käsituet.

### CA107 Tyhjennysasennon säätö kaasujousella, Capre F ja FX -malleihin

### CA108 Tyhjennysasennon säätö sähköisesti, Capre FX -malliin

### CA129 Tyhjennysasennon säätö sähköisesti, Capre F -malliin

### CA110 Paperirullateline, 50 cm leveä

### CA111 Paperirullateline, 60 cm leveä

### CA116 Akku, saatavilla Capre M, F ja FX -malleihin

### CA124 Erikoisleveys 80 cm Capre M -malleihin

### CA105 Erikoisleveys 75 cm Capre F -malleihin

### CA106 Erikoisleveys 75 cm Capre FX -malleihin

### R22739 Kasvo-osan tulppa, U-malli

### R22741 Kasvo-osan tulppa, O-malli



CA107



Lue lisää ja tutustu mallistoon: [Lojer.com](http://Lojer.com) » Fysioterapia ja wellness » Hoitopöydät » Kinos X hoitopöytä ja [www.kinosx.com](http://www.kinosx.com)



## Kinos hoitopöytä 4-os.

### Kinos X4

Lojer Kinos X -hoitopöytä on suunniteltu vaativassa ja monipuolisessa kuntoutusmaailmassa työskenteleville ammattilaisille. Kinos X:ssä on laaja korkeussäätöalue, jonka ansiosta se on helppo säätää erilaisiin tarpeisiin. Uutena ominaisuutena pöytä on varustettu sähköisesti nostettavilla pyörillä, mikä tekee pöydän liikkutusta äärimmäisen helppoa.

Lojer on tehnyt paljon suunnittelua ja testausta mahdollistaakseen ammattilaisille helpon ja mukavan käyttökokemuksen.

Kinos X -hoitopöytä on läpäissyt kaikki ulkopuolisen testauslaboratorion suorittamat lääkinnällisten laitteiden säätelytestit.

Kinos X4:ssä on 55 cm leveä yksiosainen pöytälevy, jossa on sivutuet. Pöydän korkeutta säädetään hygieenisesti pöydän molemmilla puolilla olevilla jalkatangoilla. Lojer Kinos X -hoitopöytä on tukeva ja vahva. Maksimikuormitus (SWL) 210 kg.





Lue lisää ja tutustu mallistoon: [Lojer.com](http://Lojer.com) » Fysioterapia ja wellness » Hoitopöydät » Kinos X hoitopöytä ja [www.kinosx.com](http://www.kinosx.com)



## Kinos hoitopöytä 5-os.

### Kinos X5

Lojer Kinos X -hoitopöytä on suunniteltu vaativaan ja monipuoliseen fysioterapiaan. Laajan korkeussäätöalueensa ansiosta pöytää on helppo säätää erilaisiin tarpeisiin. Hoitopöydässä on uutuutena sähköisesti nostettavat pyörät, joiden ansiosta sitä on helppo liikutella. Kinos X -hoitopöytä on läpäissyt kaikki ulkopuolisen testauslaboratorion suorittamat

lääkinnällisten laitteiden säätelytestit.

Kinos X5:ssä on 65 cm leveä kaksiosainen verhoilu, jossa on selkäosan säätö. Selkäosa ja pöydän korkeus säädetään hygieenisesti pöydän molemmilla puolilla olevilla jalkatangoilla, joten hoitajan kädet ovat vapaat. Hoitopöytä on vakaa. Maksimikuormitus (SWL) 210 kg.





Lue lisää ja tutustu mallistoon: [Lojer.com](http://Lojer.com) » Fysioterapia ja wellness » Hoitopöydät » Delta Professional



Delta Professional DP5 (kuvan tuote sisältää lisävarusteita)

## Delta Professional

### Delta Professional 5

Lojerin tytäryhtiö Rainer Rajala Oy:n alkuperäiset Delta-hoitopöydät. Klassinen hoitopöytä on jo pitkään ollut yksi hierojien, fysioterapeuttien, naprapaattien, kiropraktikkojen ja osteopaattien suosikkipöydistä.

Professional hoitopöydät edustavat alansa huippua, niin toimivuutensa kuin kestävyytensäkin puolesta. Monivuotinen osaamisemme pöytien suunnittelussa takaa pöytien vakauden ja tukevuuden kaikissa työskentelykorkeuksissa ja asennoissa.

Jaetulla pöytäosalla varustettu pöytä, jossa sähkötoiminen korkeudensäätö jalkakytkimellä välillä 48-100 cm. Kasvo-osassa portaaton säätö kaasujousen avulla ja helpposäätöiset korkeus- ja sivusuunnassa säädettävät käsituet. Manuaalisesti tai sähköisesti (lisävaruste) säädettävä tyhjennysasento, sekä jalkaosansäätö 75° kulmaan. Pöydän vakioleveys on 55 cm, mutta saatavilla on leveydet 50 ja 60 cm ilman lisäkustannuksia. Monipuolisesti lisävarusteita valittavissa tarpeen mukaan. Valittavissa useita eri verhoiluväri vaihtoehtoja. Maksimikuormitus 200 kg.

## Delta Professional

### Delta Professional 4

Delta Professional 4 -hoitopöydässä on neliosainen pöytä-taso, jossa on sähkötoiminen korkeudensäätö jalkakytkimellä välillä 47-98 cm. Kasvo-osassa portaaton säätö kaasujousen avulla ja helpposäätöiset korkeus- ja sivusuunnassa säädettävät käsituet.



Delta Professional DP4 (kuvan tuote sisältää lisävarusteita)



Lue lisää ja tutustu mallistoon: [Lojer.com](http://Lojer.com) » Fysioterapia ja wellness » Hoitopöydät » Delta Standard



Delta Standard DS5 (kuvan tuote sisältää lisävarusteita)

## Delta Standard

### Delta Standard 5

Lojerin tytäryhtiö Rainer Rajala Oy:n alkuperäiset Delta-hoitopöydät. Klassinen hoitopöytä on jo pitkään ollut yksi hierojien, fysioterapeuttien, naprapaattien, kiropraktikkojen ja osteopaattien suosikkipöydistä.

Delta Standard -hoitopöydät ovat ammattilaisen peruspöytiä: ne ovat edullisempia kuin Delta Professional -sarjan tuotteet, mutta toiminnot täyttävät vaativankin käyttäjän toiveet.

Delta Standard 5 on jaetulla pöytäosalla varustettu pöytä, josta löytyy sähkötoiminen korkeudensäätö jalkakytkimellä välillä 58-89 cm. Kasvo-osassa portaaton säätö kaasujousen avulla ja helposäätöiset korkeus- ja sivusuunnassa säädettävät käsituet. Manuaalisesti tai sähköisesti (lisävaruste) säädettävä tyhjennysasento sekä jalkaosansäätö 75° kulmaan. Monipuolisesti lisävarusteita valittavissa tarpeen mukaan. Valittavissa useita eri verhoiluväri vaihtoehtoja. Maksimikuormitus 200 kg.



Delta Standard DS4 (kuvan tuote sisältää lisävarusteita)

## Delta Standard

### Delta Standard 4

Delta Standard 4 -hoitopöydässä on neliosainen pöytätaso, jossa on sähkötoiminen korkeudensäätö jalkakytkimellä välillä

57-87 cm. Kasvo-osassa portaaton säätö kaasujousen avulla ja helposäätöiset korkeus- ja sivusuunnassa säädettävät käsituet.

## Lisävarusteet Delta-hoitopöytiin

### 21222 Keskuslukittavat pyörät

### 21223 Sivulevike, pari

Pöydän leventämiseen, alas taittuvat. Tehdasasenteinen lisävaruste.

### 21199 Hands free -korkeudensäätökehikko

Tehdasasenteinen lisävaruste korkeudensäätöön.

### 21204 Kaksoissaranoitu pääosa

Istuma-asennossa tapahtuvaan käsittelyyn. Lisävarusteen avulla pääosa voidaan nostaa horisontaalisesti. Lisävarustetta ei voida asentaa pöytiin, joissa ei ole käsitukia.

### 21190 Tyhjennysasennon säätö sähköisesti

### M02003 Käsikytkin

Lisäkytkin pöydän korkeudensäätöön. Kytkin kiinnitetty päntuen alle.

### M02001 Lisäjalkakytkin

### 21198 Jalkakytkimen runko

Delta Standard pöytään

### 21200 Jalkakytkimen runko

Delta Professional pöytään

### 21210 Paperirullateline

### 21027 Erikoisleveys 70cm, malleihin d2 ja d4 (ilman sivulevikkeitä)



21222



21223



21199



21204



21210



Safe Working Load SWL huimat 400 kg



Kuvan tuotteessa lisävarusteita

## Lojer mattohoitopöydät (Bobath)

### 4010XB Bobath battohoitopöytä, sähköinen

Uudistettu Bobath-mattohoitopöytä on suunniteltu ensisijaisesti neurologiseen terapiaan ja Bobath-terapiaan. Patentoitu rakenne tekee pöydästä erittäin tukevan ja sopivan myös vaativaan käyttöön. Bobath-mattohoitopöytä on suunniteltu siten, että terapeutti voi olla pöydällä samanaikaisesti hoidettavan potilaan kanssa — kuormitettavuus (Safe Working Load SWL) on jopa hämmästyttävä 400 kg.

Makuutaso on erittäin korkealuokkaisesti verhoiltu ja tason sivureunat on vahvistettu muovisella reunuksella. Bobathin patentoidun runkorakenteen johdosta potilasnosturit mahtuvat helposti pöydän alle (maavara on 15 cm), vaikka pöytä olisi alakorkeudessa. Erittäin matalan alakorkeuden ansiosta (40 cm) myös pyörätuolia käyttävät potilaat pääsevät pöydälle helposti.

### 4020XB Bobath battohoitopöytä, 2-osainen makuutaso, sähköinen

4020XB:ssä on kaksiosainen makuutaso säädettävällä selkäosalla (0-73 astetta). Molemmat mallit voidaan varustaa valinnaisella kasvoaukolla potilasmukavuuden lisäämiseksi.



Kuvan tuotteessa lisävarusteita



## Kippilauta

### ST7641ER Seers kippilauta

Erittäin vakaa kippilauta, jossa on keskuslukittavat pyörät ja hätälasku vakiona. Seers Medicalin valmistama laatuotuote (Englanti), jossa SWL 225 kg.

Sähköinen kallistus 0-90 astetta. Aste näkyy suoraan käsiohjaimessa. Sähköisesti korkeussäädettävä välillä 47-101 cm. Leveys 70 cm. Suuret pyörät ohjauspyörillä ja keskuslukituksella oletuksena. Hätälaskukahva esimerkiksi sähkökatkoksen varalta vakiona. Jaetut jalkalevyt, jotka voidaan säätää erikseen asentoon. Tila potilasnosturille alustan alla. Kahvat ja 3 kiinnityshihnaa ovat vakiona. Vartalon tuki ja pöytä lisävarusteena. Verhoilun vakioväri on vaaleanharmaa, mutta muitakin värejä on tilattavissa.



ST7641ER

## Lisävarusteet kippilautaan

### ST7648 Pöytä

### ST6058 Vartalotuki, pari

### ST6065 Kiinnityshihna, polvi

### ST6066 Kiinnityshihna, lonkka / rinta



ST7648



ST6058



ST6065, ST6066



HÄTÄLASKUKAHVA

## Kannettavat hoitopöydät

### 21310 Chiro UltraLux matkahoitopöytä

Chiro UltraLux on laadukas ammattikäyttöön tarkoitettu kannettava matkahoitopöytä. Se on suunniteltu erityisesti kiropraktikoille, naprapaateille ja muille terapeuteille, jotka käyttävät mobilisointia ja manipulointia työssään. Hoitopöydässä on vankka alumiinirunko ja alusta on vahvistettu vaijerijärjestelmällä, joka tekee siitä vakaan ja kestävä. Se on kevyt ja helppo kuljettaa mukana. Siitä löytyy korkeudensäätö sekä pääosan säätömahdollisuudet. Toimitukseen sisältyy kanto-/kuljetuslaukku. Laukussa on olkahihnat, joten pöytää voi kantaa myös selässä, ja kantokahva. Lisäksi siinä on tilava tasku vaikkapa nilkkatyynylle ja vahvistettu pohja. Laukku on valmistettu kestävästä materiaalista, joka suojaa pöytää kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Leveys 50 cm, makuutasen pituus 170 cm, korkeudensäätö 45-72 cm 10:ssä eri säätöpis- teessä. Paino 9 kg. Väri musta, mitat taitettuna 70 x 50 x 17 cm (PxLxK). Maksimikuormitus 350 kg



21310

## Kasvoaukon pehmusteet

### 4195 Kasvoaukon pehmuste, ohut

Pehmeä ja miellyttävä pehmuste, joka antaa kasvoille mukavan tuen käsittelyn aikana. Valmistettu eheästä vaahtomuovista ja verhoiltu skai-keinoahalla. Koko: 32 x 27 x 3,5 cm (PxLxK).



### 4FR1 Kasvoaukon pehmuste, paksu

Kuten edellinen, mutta korkeus 7 cm. Sopii pöytiin, joissa ei ole kasvoaukkoa.



### 41112 Kasvoaukon pehmuste, musta

Miellyttävä kasvojen mukaan muotoutuva ja pehmeä kasvotyyny. Vetoketjulla varustettu lycrapäällinen on irrotettava ja pestävä. Koko 30 x 24 x 4 cm (PxLxK).



### 41770 Anatominen kasvoaukon pehmuste

Tämä kasvoaukon pehmuste on anatomisesti suunniteltu ja se muotoutuu kasvojen mukaan pehmeään materiaalinsa ansiosta. Pehmustetta on helppo desinfioida ja pitää puhtaana. Valmistettu vaahtomuovimateriaalista, joka on päällystetty TPU-kalvolla. Väri harmaa, koko 27 x 23 x 6,5 cm (PxLxK)



## Hygieniatyynyt

### 50045-1 Hygieniatyynyn päällinen 35 x 45cm

Vaihdeettava hygieniapäällinen 35 x 45cm kokoiselle tyynylle.

### 50060-1 Hygieniatyynyn päällinen 50 x 60cm

Vaihdeettava hygieniapäällinen 50 x 60 cm kokoiselle tyynylle.

Irrotettavat, kestävät ja nesteitä läpäisemättömät tyynynpäälliset, joissa on vesitiiviit saumat ja muovinen vetoketju. Tyynynpäälliset voidaan pyyhkiä pesu- tai desinfiointiaineella tai pestä koneessa 95 asteessa, mikä vähentää koko tyynyn pesutarvetta.



50045-1



50060-1

## Työtuolit ja jakkarat

### CH1100S Easy Rider satulatuoli, varastotuote

Suosittu satulatuoli nopeaan toimitukseen. Tuolin saumaton verhoilu on uutta tyylikkästä ja erittäin kestävästä Future-materiaalia, värinä Carbon. Tuolissa on istuinkulman säätö ja kaasujousiavusteinen korkeuden säätö sekä musta kaasujousen suojuus. Istuimen leveys on 50 cm ja pituus 35 cm. Kuormitettavuus (Safe Working Load SWL) on 150 kg.

### CH1100 Easy Rider satulatuoli

Tuoli on verhoiltu uudella tyylikkäällä ja erittäin kestäväällä Future-materiaalilla (14 väriä), ympäristöystävällisellä Nature-materiaalilla (5 väriä) tai valinnaisella mustalla nahkalla. Tuolissa on istuinkulman säätö ja kaasujousiavusteinen korkeuden säätö sekä rungon värin mukaan määräytyvä kaasujousen suojuus.

### CH1300 Easy Rider PRO satulatuoli

Satulatuoli, jossa on 2-osainen säädettävä istuinosa. Istuinosan leveyttä voidaan säätää välillä 42 cm - 48,5 cm.

### CH1400 Step Anatomic työtuoli selkänöjällä

### CH1500 Pyöreä työtuoli

### CH1500G1 Pyöreä työtuoli tassuilla

### CH1500G2 Pyöreä työtuoli tassuilla ja selkänöjällä

Tuoleihin on saatavissa useita eri lisävarusteita, korkeuksia ja verhoiluvärejä. Lisätiedot ja tuolien konfigurointi verkkokaupassa [www.shop.lojer.com](http://www.shop.lojer.com)



CH1100



CH1300



CH1400



CH1100S



CH1500



CH1500G1



CH1500G2

## Voimistelujakkarat

### 42801 Voimistelujakkara, korkeus 25 cm

### 42802 Voimistelujakkara, korkeus 48 cm

Runko metallinen epoksimaalattu ja puinen istuinosa. Istuinkoko: 37 x 37 cm.

### 403001 Porrassjakkara

Tukeva jalkojen harjoittamiseen. 50 x 35 x 15 cm



42801

42802



403001

## Lojer Capre BC kauneudenhoitotuoli

### BC CAPRE BC – Beauty Chair

Ylellinen Lojer Capre hoitotuoli on suunniteltu yhdessä kauneudenhoidon ammattilaisten kanssa täyttämään tämän päivän hoitovaatimukset. Mukavan pehmeä ja muotoiltu keinoahka, yksilölliset säädöt kolmella moottorilla ja mukavuusvarustus, kuten tablet pc-teline ja led-valaisin edistävät hoitopaikan laatumielikuvaa. Tuoli soveltuu monitoimituoliiksi kosmetologille, hierojalle, jalkaterapeutille ja tatuojalle.



Lue lisää:  
Capre BC: <http://www.lojer.com/fi/tuote/capre-bc-kauneudenhoitotuoli>

Ohjausjärjestelmä mahdollistaa sähköisesti tuolin korkeuden, selkäosan ja istuinkulman säädön. Kasvoaukollisessa pääosassa on sekä pituuden että kulman säätömekanismi. Tuolin jalkaosat ovat kaasujousisäätöiset, ja ne voidaan täysin kääntää sivuille. Jalkaosassa on lisäksi pituuden säätömekanismi. Käsituet voidaan kääntää 180°, ja optiona saatavissa monitoimikäsituissa on myös kulmasäätö.

Capre BC on Lojerin Suomessa valmistama tuoli, johon saat varaosia vuosienkin jälkeen. Esimerkiksi tuolin verhoilut voidaan uusida tulevien trendien mukaisesti. Pituus 186–213 cm. Leveys, istuintyynty 62 cm. Kokonaisleveys 88 cm. Korkeuden säätö 60–85 cm. Maksimikuormitus 160 kg.

Capre BC on edelleen kehitetty terveydenhoitoa varten kahdella mallilla: Capre MC – Medical Chair ja Capre RC – Recovery Chair.



# Harjoituslaitteet

Fyysinen harjoittelu on kuntoutuksen ja terveydenhuollon keskeisiä osa-alueita. Terveydenhuollon laitteita koskevan lain 629/2010 mukaan kuntoutuksessa tulee käyttää CE-merkittyjä lääkintälaitteita. Valikoimamme tarjoaa välineitä lääkinälliseen kuntoutukseen sekä voimaharjoittelulaitteita, jotka soveltuvat kuntoutukseen, terveydenhuoltoon ja voimaharjoittelun tarpeisiin.



## Lääkinnällinen harjoitusterapia

Lääkinnällinen harjoitusterapia, (LHT, Terapeuttinen harjoittelu) on aktiivista kuntoutusta, joka perustuu kliinisiin tutkimuksiin ja käytännön kokemuksiin. Harjoitteet toteutetaan yleisinä tai kohdennettuina harjoitteina joko tietylle kehon osalle tai jopa koko kehoon kohdistuvina. Harjoitteet soveltuvat sekä kroonisiin että akuutteihin vaivoihin, harjoitteet ja annostus valitaan aina kulloiseenkin tilanteeseen soveltuviksi. Oikein valittu harjoitusvastus, oikea suoritustekniikka, oikeat liikeradat, oikea alkuasento ja oikeat harjoituslaitteet mahdollistavat terapian tuloksellisuuden. Harjoitteiden tavoitteena voi olla koordinaation, motorisen kontrollin tai lihassapainon palauttaminen / parantaminen, samoin oikein valitut harjoitteet mahdollistavat normaalin lihaskestävyuden ja lihasvoiman harjoittamisen kulloinkin tarvittavin liikeradoin ja -laajuuksin. Kokonaisuutena tavoitteena on päivittäisten toimintojen kehittäminen sellaisiksi, mikä kulloinkin on tarpeen. Lojer vetolaitteet ovat CE-merkittyjä lääkintälaitteita eli MDD-hyväksytyitä.

### Lojer Pulley vetolaitteet

#### 19100-14 Lojer vetolaite, 14 kg, koteloitu

Hiljainen ja tasainen vastus, kromattu säätötanko ja vaimentimet jokaisessa painovälissä. Tukeva rakenne, joka mahdollistaa kiinnittämisen seinään tai vapaasti lattialla seisovaan Lojer Moduliin. Painopakka 14 kg, jaettuna 2 x 0,5 kg ja 13 x 1 kg. 3 x 0,25 kg lisäpainosarja vakiona, mahdollistaa kuorman lisäyksen 0,25 kg:n välein. Yksi vetokahva vakiovarusteena. Korkeus 230 cm.

#### 19100-20 Lojer vetolaite, 20 kg, koteloitu

Kuten yllä, mutta painopakka 20 kg jaettuna 2 x 0,5 kg ja 19 x 1 kg. Mukana 3 x 0,25 kg lisäpainosarja.

#### 19200-50 Lojer Speed Pulley, 50 kg, koteloitu

Toiminnallinen vetolaite, jolla voidaan hyödyntää liikenopeuden muutoksia aina heittoliikkeeseen asti. Laitteessa vakiona kaksi vetokahvaa, joita voidaan käyttää samanaikaisesti tai vuorovedoin, harjoittelu vain yhdellä vetokahvalla myös mahdollista. Laitteen vetomekanismi "vaintaa" painopakan liikkeen vetonarun liikkeeseen verrattuna. 50 kg painopakka jaettuna 20 x 2,5 kg. Pienin ulostuleva vastus per kahva on 0,5 kg, painon lisäys 0,5 kg:n välein, max ulostuleva vastus 20 kg. Korkeus 230 cm.

#### 19200-80 Lojer Speed Pulley, 80 kg, koteloitu

Kuten yllä, mutta painopakka 80 kg, joka jaettu 16 x 5 kg. Pienin ulostuleva vastus per kahva on 0,83 kg.

#### 19200-100 Lojer Speed Pulley, 100 kg, koteloitu

Kuten yllä, mutta painopakka 100 kg, joka jaettu 20 x 5 kg. Pienin ulostuleva vastus per kahva on 1 kg.

#### 19200M Lojer Speed Pulley, 50 kg, liikuteltava

korkeus (190 cm pyörätelineen kanssa). Laite on helposti siirrettävissä haluttuun paikkaan, harjoituksen ajaksi laite lasketaan neljälle tukevalle jalalle. Koteloitu painopakka vakiona.



19100-14



19200-50



19200M

**Kaikki mallit saatavana myös mustana.**



Katso video Speed Pulley -vetolaitteista [www.lojer.com](http://www.lojer.com) >> Fysioterapia ja Wellness >> Vetolaitteet >> Speed Pulley vetolaite

## Lojer alasetolaiteet

### 19300-50 Lojer alasetolaite, 50 kg koteloitu

Painopakka 50 kg jaettuna 10 x 5 kg. Vetonarun pituutta säädellään kromatussa tangossa olevalla säätimellä. Leveä vetokahva vakiovarusteena. Alasetolaitteessa on vakiona myös alatalja soutu- tai nostoharjoitteita varten. Säädettävä kokonaiskorkeus välillä 228–298 cm. Laitteeseen saatavissa lisäpainosarja, jolloin vastusta voidaan säätää 1,25 kg:n tarkkuudella.

### 19300-80 Lojer alasetolaite, 80 kg koteloitu

Sama kuin yllä, mutta painopakka 80 kg jaettuna 16 x 5 kg.

### 19300-100 Lojer alasetolaite, 100 kg koteloitu

Sama kuin yllä, mutta painopakka 100 kg jaettuna 20 x 5 kg.



## Vetolaitteiden lisävarusteet

- 13107 Triceps kahva
- 13107B Triceps-kahva, musta
- 15106 / 15106T Alaseto-orssi
- 15106T100B / 15106TB Alaseto-orssi, musta
- 210050 Harjoituskäsine
- 2512126 Triceps köysi, 90 cm
- 402024 Soutukahva
- VD6800 Alasetokahva
- VD6800B Alasetokahva, musta
- VH8083 Tukitanko
- VH8083B Tukitanko, musta
- VH80831 Tukitanko alaseto-orrella
- VH80831B Tukitanko + alaseto-orssi, musta
- Lisäpainosarja 3 x 0,25 kg



13107



15106



210050



2512126



402024




VD6800



VH8083



Katso ajantasainen lisävarustetarjonta [www.lojer.com](http://www.lojer.com)

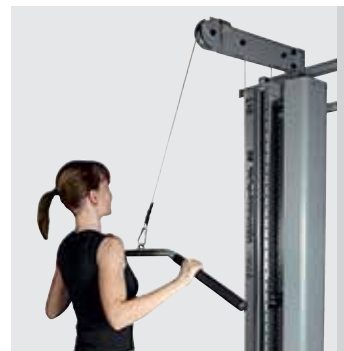

## Vetolaitteiden hihnat



**402020** Pehmustettu nilkka-/ rannehihna 25 x 8 cm

**402021** Pehmustettu reisi-/olkapäähinna 55 x 8 cm

**402022** Pehmustettu vyötäröhihna 100 x 8 cm

**402025** Rotaatiohihna, pehmustettu

**402029** Nahkahiha ranne 32 x 5 cm

**402030** Nahkahiha nilkka 62 x 5 cm

**402031** Nahkahiha 105 x 8 cm

**402032** Nahkahiha vyötärö 124 x 8 cm

**402033** Nahkahiha, sisäosa pehmustettu 40 x 7,5 cm

**402034** Päähinna

**402040** Pehmustettu nilkkahiha tarranauhalla



402025

402029



402030



402031



402032



402033



402033



402040



## Treenipenkki

### 2FS-20 2-osainen penkki

Erinomainen kaksiosainen penkki harjoitteluhuoneeseen. Istuinosa on +10 kallistus ja selkäosan voi asettaa 6 eri asentoon, -10 – +80 välillä. Sisältää kuljetuspyörät. Väri: Runko hopean harmaa ja verhoilu musta. Toimitetaan osissa.

**TRUE**



### 33022 Dynamed 3-osainen harjoituspenkki

Dynamed kolmiosainen harjoituspenkki on erittäin hyödyllinen liikuntaharjoittelussa. Selkätyyny on portaattomasti säädettävissä 90 asteeseen. Korkeutta voidaan myös säätää. Etuistuimella on kaksi eri asentoa: suora- ja kulma-asento, kiinteä takaistuin, kaksi etupyörää, enimmäiskuorma 180 kg. Valmistettu Saksassa.



## Fysioterapiapeili

### 501132 Fysioterapiapeili pyörillä, kaksipuoleinen

Kulmasäädettävä peili kromatulla jalustalla. Peiliä on helppo siirrellä neljän pyörän ansiosta. Siinä on korkealaatuinen peililasi molemmin puolin. Peililasin korkeus on 150 cm ja leveys 54 cm. Tuote toimitetaan osissa.



501132

## Puolapuut

### 27405 Puolapuut, puiset, korkeus 230 cm

Korkealaatuiset puolapuut on valmistettu Suomessa. Tuote toimitetaan osissa (kaikki tarvittavat osat sisältyvät pakkaukseen), ja se on erittäin helppo kasata itse. Puuosat ovat lakattuja. Leveys 80 cm ja käyttäjän maksimipaino 90 kg.



27405

### 27406 Puolapuut, metalliset, korkeus 220 cm

Korkealaatuiset puolapuut on valmistettu Suomessa. Tuote toimitetaan valmiiksi kasattuna, saatavana eri väri vaihtoehtoina. Leveys 80 cm ja käyttäjän maksimipaino 130 kg.



27406

### 27400 Dippitangot metallisille puolapuille

Tukevut metalliset dippitangot, joissa gripit kädensijoissa. Asennus käy nopeasti, samoin kuin niiden poisotto.

### 27408 Puolapuulauta wood

Mäntylauta 35x180cm, jossa jalkaremmi ja puukulma puolille nostoa varten. Ei pehmusteita. Huom! Tämä lauta soveltuu sekä metallisiin että puisiin puolapuihin. Voidaan nostaa puolapuita vasten kun ei ole käytössä.



27408



27400

## Ergo-Fit Vector Line -harjoituslaitteet

Vector Line on täysin uusi erittäin korkealaatuinen harjoituslaitteiden tuoteperhe. Tuotteet valmistaa Ergo-Fit Saksassa ja niillä on CE-merkintä MDD-direktiivin mukaan. Laitteiden liikkeet ovat pehmeitä, niitä on helppo säätää ja ne sopivat erinomaisesti kaikenlaisen kuntoutukseen. Ne sopivat erinomaisesti myös muihin kuntoilutiloihin, kuten hotelleihin, työterveyshuoltoon ja kuntosaleille. Kaikissa lääkinällisissä laitteissa on liikerajoitin painopakassa. Painopakka koostuu 7,5 kg painoista ja lisäpainoista 2,5 kg ja 5,0 kg. Lisäpainot saadaan helposti käyttöön painopakam vieressä olevalla säätimellä. Painopakam koteloinnin taakse on asennettu ylellinen LED-valaistus. Jos se syttyy, pitää laitteeseen kytkeä sähkö. Toimitetaan valmiiksi koottuina. Suurin käyttäjän paino 200 kg.

**Rungon väri:** antrasiitti

**Painopakam koteloinnin väri:** valkoinen

**Verhoilun väri:** Valittavissa ilman lisäkustannuksia

### 23010 Ergo-Fit Back Extension, medical

Painopakka 95kg jaettuna 7,5 kg painoihin, lisäpainot 2,5 ja 5,0 kg. Säädettävä: alkuasento. Kokonaispaino: 235 kg. Koko: 100 x 120 x 155 cm (P x L x K).



23010



23020

### 23020 Ergo-Fit Back Pull, medical

Painopakka 112,5 kg jaettuna 7,5 kg painoihin, lisäpainot 2,5 ja 5,0 kg. Säädettävä: istuinkorkeus. Kokonaispaino: 205 kg. Koko: 120 x 145 x 155 cm (P x L x K).

### 23030 Ergo-Fit Butterfly Reverse, medical

Painopakka 95 kg jaettuna 7,5 kg painoihin, lisäpainot 2,5 ja 5,0 kg. Kokonaispaino: 190 kg. Koko: 135 x 155 x 155 cm (P x L x K).



23030




23040

### 23040 Ergo-Fit Lat Pull, medical

Painopakka 117,5 kg jaettuna 7,5 kg painoihin, lisäpainot 2,5 ja 5,0 kg. Säädettävä: istuinkorkeus. Kokonaispaino: 220 kg. Koko: 130 x 170 x 240 cm (P x L x K).

### 23050 Ergo-Fit -Shoulder Abduction, medical

Painopakka 90 kg jaettuna 7,5 kg painoihin, lisäpainot 2,5 ja 5,0 kg. Säädettävä: istuinkorkeus. Kokonaispaino: 200 kg. Koko: 120 x 115 x 155 cm (P x L x K).

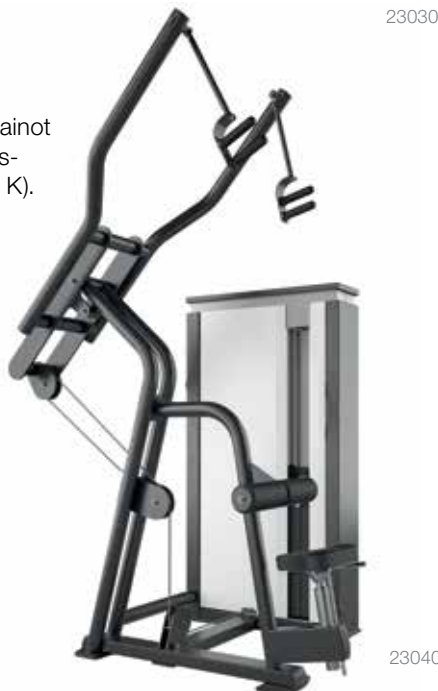

23040



Jos haluat lisää tietoa, otathan yhteyttä asiakaspalveluumme.

## Ergo-Fit Vector Line -harjoituslaitteet

### 23060 Ergo-Fit Shoulder Press, medical

Painopakka 75kg jaettuna 7,5 kg painoihin, lisäpainot 2,5 ja 5,0 kg. Säädettävä: istuinkorkeus. Kokonaispaino: 210 kg. Koko: 135 x 135 x 180 cm (PxLxK).



23060



23070

### 23070 Ergo-Fit Butterfly, medical

Painopakka 95kg jaettuna 7,5 kg painoihin, lisäpainot 2,5 ja 5,0 kg. Säädettävä: alkuasento. Kokonaispaino: 207 kg. Koko: 120 x 155 x 155 cm (PxLxK).

### 23080 Ergo-Fit Chest Press, medical

Painopakka 95kg jaettuna 7,5 kg painoihin, lisäpainot 2,5 ja 5,0 kg. Säädettävä: istuinkorkeus. Kokonaispaino: 237 kg. Koko: 145 x 155 x 155 cm (PxLxK).



23080



23090

### 23090 Ergo-Fit Biceps Flexion, medical

Painopakka 60kg jaettuna 7,5 kg painoihin, lisäpainot 2,5 ja 5,0 kg. Säädettävä: istuinkorkeus ja alkuasento. Kokonaispaino: 170 kg. Koko: 95 x 130 x 155 cm (PxLxK).

### 23100 Ergo-Fit Triceps Extension, medical

Painopakka 60 kg jaettuna 7,5 kg painoihin, lisäpainot 2,5 ja 5,0 kg. Säädettävä: istuinkorkeus, alkuasento ja selkänöja. Kokonaispaino: 200 kg. Koko: 105 x 110 x 155 cm (PxLxK).



23100



23110

### 23110 Ergo-Fit Abdominal Flex, medical

Painopakka 95 kg jaettuna 7,5 kg painoihin, lisäpainot 2,5 ja 5,0 kg. Säädettävä: alkuasento. Kokonaispaino: 227 kg. Koko: 105 x 130 x 155 cm (PxLxK).

### 23120 Ergo-Fit Abdominal Torsion, medical

Painopakka 95 kg jaettuna 7,5 kg painoihin, lisäpainot 2,5 ja 5,0 kg. Kokonaispaino: 177 kg. Koko: 135 x 100 x 155 cm (PxLxK).



23120



23130

### 23130 Ergo-Fit Abductor, medical

Painopakka 95 kg jaettuna 7,5 kg painoihin, lisäpainot 2,5 ja 5,0 kg. Kokonaispaino: 222 kg. Koko: 140 x 130 x 155 cm (PxLxK).

## Ergo-Fit Vector Line -harjoituslaitteet

### 23140 Ergo-Fit Adductor, medical

Painopakka 95 kg jaettuna 7,5 kg painoihin, lisäpainot 2,5 ja 5,0 kg. Kokonaispaino: 215 kg. Koko: 175 x 125 x 155 cm (PxLxK).



23140



23150

### 23150 Ergo-Fit Hip Extension, medical

Painopakka 95 kg jaettuna 7,5 kg painoihin, lisäpainot 2,5 ja 5,0 kg. Kokonaispaino: 177 kg. Koko: 100 x 125 x 155 cm (PxLxK).

### 23160 Ergo-Fit Leg Extension, medical

Painopakka 112,5 kg jaettuna 7,5 kg painoihin, lisäpainot 2,5 ja 5,0 kg. Säädettävä: alkuasento, jalkatyyny ja selkänöja. Kokonaispaino: 265 kg. Koko: 105 x 140 x 155 cm (PxLxK).



23160



23170

### 23170 Ergo-Fit Leg Flexion, medical

Painopakka 117,5 kg jaettuna 7,5 kg painoihin, lisäpainot 2,5 ja 5,0 kg. Säädettävä: alkuasento, reisityyny, jalkatyyny ja selkänöja. Kokonaispaino: 255 kg. Koko: 105 x 145 x 155 cm (PxLxK).

### 23180 Ergo-Fit Squat Press, medical

Painopakka 200 kg jaettuna 7,5 kg painoihin, lisäpainot 2,5 ja 5,0 kg. Säädettävä: selkänöja (130-180 astetta 10 asteen välein), jalan pituus, jalkalevy ja olkatyyny. Kokonaispaino 415 kg. Koko: 240 x 100 x 155 cm (PxLxK).



23180



23190

### 23190 Ergo-Fit Pull Up / Dip, medical

Painopakka 95 kg jaettuna 7,5 kg painoihin, lisäpainot 2,5 ja 5,0 kg. Kokonaispaino: 210 kg. Koko: 81 x 120 x 215 cm (PxLxK).

### 23200 Ergo-Fit Seated Dip, medical

Painopakka 95 kg jaettuna 7,5 kg painoihin, lisäpainot 2,5 ja 5,0 kg. Kokonaispaino: 210 kg. Säädettävä: istuinkorkeus ja selkänöja. Koko: 162 x 117 x 155 cm (PxLxK).



23200



Jos haluat lisää tietoa, otathan yhteyttä asiakaspalveluumme.

## Ergo-Fit Power Line 4000

### 22520 Ergo-Fit Cable 4000, medical

Speed pulley seinään kiinnitettävä. Painopakka 75 kg, jaettuna 5 kg painoihin. Laitteen kokonaispaino 123 kg. Mitat: 86 x 41 x 225 cm (PxLxK).

### 22521 Ergo-Fit Cable Free 4000, medical

Speed pulley lattiamalli. Painopakka 75 kg, jaettuna 5 kg painoihin. Laitteen kokonaispaino 156 kg. Mitat: 120 x 160 x 225 cm (PxLxK).

### 22522 Ergo-Fit Cable Crossover 4000

Painopakka 2 x 75 kg jaettuna 5 kg painoihin. Laitteen kokonaispaino 250 kg. Mitat: 91 x 338 x 218 cm (PxLxK).

### 22523 Ergo-Fit Cable Tower 4000

Tätä laitetta voi käyttää useampi kuntoilija yhtäaikaan. Monitoimilaitteessa lat pull-, row-, biceps- ja triceps-harjoitteet. Painopakat 2 x 75 kg ja 2 x 100 kg jaettuna 5 kg painoihin. Maksimi käyttäjäpaino 200 kg. Laitteen kokonaispaino 530 kg. Mitat: 120 x 290 x 220 cm (PxLxK).



## Ergo-Fit Power Line 4000

### 22524 Ergo-Fit Multi Press 4000

Painotanko on tarkoitettu International painoille ja laitteessa on 4 säilytystappia levypainojen säilytykseen. Penkki ja painot tilattava erikseen. Suurin sallittu painojen määrä 250 kg. Laitteen kokonaispaino 150 kg. Mitat: 170 x 210 x 220 cm (PxLxK).

### 22533 Ergo-Fit Squat Rack 4000

Levypainojen säilytystapit kuuluvat telineeseen, mutta painotanko ja levypainot tilattava erikseen. Suurin sallittu painojen määrä 250 kg. Laitteen kokonaispaino 65 kg. Mitat: 175 x 120 x 175 cm (PxLxK).



## Harjoittelupenkit Ergo-Fit Power Line 4000

### 22525 Ergo-Fit Abdominal Bench 4000

Tässä penkissä harjoitat vatsalihaksiasi tehokkaasti ja muotoiltu selkänoja ylläpitää optimaalisen asennon harjoituksen aikana. Maksimi kuormitus 250 kg. Laitteen kokonaispaino 60 kg. Mitat: 145 x 60 x 75 cm (PxLxK).

### 22526 Ergo-Fit Back Bench 4000

Tämä penkki tarjoaa tehokkaan tavan harjoittaa selän ja alavartalon lihaksistoa. Penkissä on 45 ° kulma. Lantiotyynyn korkeus on säädettävissä. Maksimi kuormitus 250 kg. Laitteen kokonaispaino 50 kg. Koko: 135 x 80 x 75 cm (PxLxK).

### 22527 Ergo-Fit Flat Bench 4000

Maksimi kuormitus 250 kg. Laitteen kokonaispaino 25 kg. Mitat: 105 x 60 x 40 cm (PxLxK).

### 22528 Ergo-Fit Multi Bench 4000

Säädettävä seläntuki. Maksimi kuormitus 250 kg. Kokonaispaino 35 kg. Mitat: 135 x 60 x 100 cm (PxLxK).

### 22530 Ergo-Fit Olympic Flat Bench 4000

Maksimi käyttäjäpaino sisältää painotangon ja painot: 400 kg. Laitteen kokonaispaino 50 kg. Mitat: 160 x 125 x 125 cm (PxLxK).

### 22531 Ergo-Fit Olympic Incline Bench 4000

Säädettävä istuintyyny. Maksimi käyttäjäpaino sisältää painotangon ja painot 350 kg. Laitteen kokonaispaino 45 kg. Mitat: 160 x 125 x 135 cm (PxLxK).

### 22532 Ergo-Fit Scott Bench 4000

Penkissä on ripustuskoukut painotangolle. Istuinkorkeus on säädettävissä. Maksimi käyttäjäpaino sisältää painotangon ja painot 250 kg. Laitteen kokonaispaino 45 kg. Mitat: 85 x 80 x 110 cm (PxLxK).



## Fitness Line yhdistelmälaitteet

True on tunnettu erittäin korkealaatuisten harjoituslaitteiden valmistaja. Fitness Line -sarja on hienosti suunniteltu ja se koostuu yhdistelmälaitteista, jotka vievät vähän tilaa ja ovat edullisia. Täydellinen yhdistelmä ergonomiasta, laatua ja taloudellisuutta. Soveltuu erinomaisesti mm. pienemmille klinikoille, henkilökunnan kuntosaleille, hotelleihin ja työterveyshuoltoon.

Kuorman säätö tehdään harjoitusasennosta ja kaikki vivut on merkitty selvästi keltaisella. Ohjeiden kuvaukset englanniksi on saatavana kaikille laitteille. Harmaa / hopealakattu runko ja musta verhoilu. Suurin käyttäjän paino 145 kg. Laitteet toimitetaan kokoaamattomina. Ota yhteyttä huoltoomme, jos tarvitset apua kokoonpanossa.

**Painopakka 75 kg koostuu 17 kappaleesta 10 paunan painoja, noin 4,5 kg / paino.**

**Painopakka 155 kg koostuu 17 kappaleesta 15 paunan painoja, noin 6,8 kg / paino.**

**2FS-50/75 Leg Extension/Seated Leg Curl, 75 kg**

**2FS-50/115 Leg Extension/Seated Leg Curl, 115 kg**

Yhdistelmälaite jalkojen lihasryhmille. Selkänojassa 5 eri asentoa. Reisiytyyssä, joka laskeutuu alas polven koukistusharjoituksessa, on 6 eri asentoa. 4 eri aloitusasentoa sekä polven koukistusta ojennusliikkeelle. Itsestään säätävä nilkkatyyny varmistaa oikean asennon koko liikesuorituksen ajan. Mitat: leveys 109 cm, syvyys 160 cm ja korkeus 145 cm.



2FS-50

**2FS-51/75 Leg/Calf Press, 75 kg**

**2FS-51/115 Leg/Calf Press, 115 kg**


Yhdistelmälaite jalkojen ja pakaralihasten harjoitteluun. Jalkalauta säätyy 6 eri aloitusasentoon. Ergonomisesti muotoiltu selkänoja varmistaa hyvän ergonomian koko liikelaajuudella. Mitat: leveys 104 cm, syvyys 180 cm ja korkeus 165 cm.



2FS-51



## Fitness Line yhdistelmälaitteet

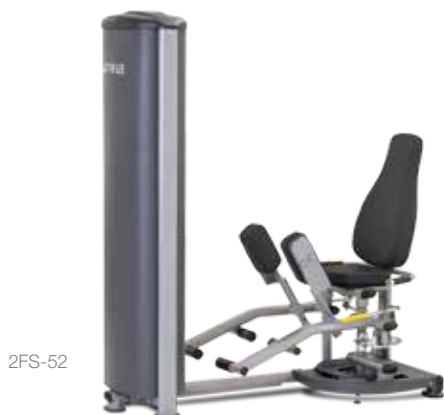

### 2FS-52/75 Inner/Outer Thigh, 75 kg

Yhdistelmälaite reiden sisä- ja ulkosyrjän voimaharjoitteluun. Käännettävät reisiytyynyt säädetään sen mukaan harjoitetaanko reiden sisä- vai ulkosyrjän lihaksia. Aloitusasennon säätäminen on helppoa hyvin asemoidun säätönupin ansiosta. 15 eri asentoa. Mitat: leveys 145 cm, syvyys 155 cm ja korkeus 165 cm.

### 2FS-53/75 Lat Pull Down/Seated Row, 75 kg

### 2FS-53/115 Lat Pull Down/Seated Row, 115 kg

Yhdistelmälaite yläselän ja käsivarsien lihasten harjoitteluun. Reisiytyyny on säädettävissä 8 eri asentoon. Jalkatuet soutu liikkeen suorittamista varten. Vetokahvat alas- ja soutu vetoja varten kuuluvat toimitukseen. Mitat: leveys 122 cm, syvyys 196 cm ja korkeus 213 cm.



### 2FS-55/75 Pec Fly/Rear Delt, 75 kg

### 2FS-55/115 Pec Fly/Rear Delt, 115 kg

Yhdistelmälaite rintalihasten ja yläselän lihasten harjoitteluun. Istuimessa korkeudensäätö (6 eri asentoa) ja harjoitustanko säädetään harjoituksen mukaan (7 eri asentoa). Mitat: leveys 142 cm, syvyys 152 cm ja korkeus 185 cm.



### 2FS-57/75 Low Back/Abdominal, 75 kg

### 2FS-57/115 Low Back/Abdominal, 115 kg

Yhdistelmälaite vatsa- ja selkälihasten harjoitteluun. Vastuskampi säädetään harjoitteen mukaan (5 eri asentoa). Jalkatuet päällystetty liukeste materiaalilla, mikä tarjoaa mahdollisuuden valita harjoitteluasennon. Mitat: leveys 125 cm, syvyys 112 cm ja korkeus 145 cm.





# Liikunta- ja kuntoharjoittelu

Liikunta- ja kuntoharjoittelu ovat erittäin tärkeitä kehon hyvinvoinnin kannalta. Ne parantavat mm. verenkiertoelimistön toimintaa, kasvattavat hapenottokykyä ja rasva-aineenvaihduntaa sekä keskittymiskykyä. Tässä osiossa esittelemme kattavan valikoiman liikkumisen apuvälineistä kuntosalilaitteisiin, jotka soveltuvat klinikoille ja kuntosaleille.



## Passiivinen polven hoito

### 22030 CPM OrtoFlex L2

CPM -laitetta (Continuous Passive Motion) käytetään pääasiassa passiivisena hoitona polvileikkauksen jälkeen. OrtoFlex on laadukas laite, joka soveltuu lonkan ja polven passiiviseen hoitoon niin klinikalla, kuin kotiooloissa. OrtoFlex -laitteen saa helposti säädettyä eri mittaisille jaloille sopivaksi ja kaikki asetukset säädetään kosketusnäyttöjen avulla. Näyttöjä on kaksi kappaletta, joista toinen on tarkoitettu terapeutin käytettäväksi ja toisesta asiakas voi itse säätää asetuksia. Kosketusnäytöstä säädetään nopeutta ja liikealuetta. - Kannettava malli, mukana käytännöllinen laukku säilytystä ja kuljettamista varten - 3 erilaista esiasetettua ohjelmaa - 9 eri nopeusvaihtoehtoa - Kellonajan asetus - Polven liikealue: extensio -5 - flexio 120 astetta - Lonkan liikealue: 25-100 astetta - Nilkan liikealue: 0-40 astetta - Säädettyä reisiluun pituus 32-49 cm - Säädettyä säären pituus: 25-57 cm - Potilaan lyhyin mahdollinen pituus 150 cm - Enimmäiskuormitus 20 kg - Häätäpysäytystoiminto



## Restoraattorit

### 218015 Oxycycle 1, aktiiviseen ylä- ja alaraajojen harjoitteluun

Hiljainen ja pehmeä, säädettävissä oleva Magneettivastus. Toimitukseen kuuluu jalka- ja käsipedaalit, sekä liukuestematto. Laitteen näytössä seurattavissa polkumäärää, aikaa, kaloreita sekä poljettua matkaa. Helppo siirrellä. Koko: 50 x 46 x 38 cm (PxLxK). Paino 9 kg.



218015

### SE-1000 Manuped SE-1000

Manuped SE-1000 on polkulaite aktiiviseen harjoitteluun. Sen pehmeä ja tasainen liikerata harjoittaa tehokkaasti sekä ylä- että alaraajoja. Se on erittäin tukeva ja sitä käytetään joko tuolilla tai pyörätuolissa istuttaessa. Vastus voidaan helposti valita 8 vastustasosta ja jalkojen paikalleen asettamista voidaan helpottaa lukitsemalla polkimet vivulla. Polkimet tarranauhoilla ja pohjetuet sisältyy toimitukseen. Ergonomiset kahvat useilla otevaihtoehdoilla. Digitaalinen näyttö, joka näyttää ajan, nopeuden, matkan, kokonaismatkan ja kalorit. Koko: 100 x 56 x 129 cm (PxLxK). Paino 45 kg



SE-1000

## Nojapuut

### 260217 Nojapuut 3,5 m

Nojapuut ovat erinomainen kuntoutusväline, joita käytetään muun muassa sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja hoivakodeissa. - Nojapuiden korkeutta säädetään säätönupin avulla, korkeusalue on 75-108cm - Kulkuaukon leveyttä muutetaan liikuttamalla nojapuita pitkittäissuunnassa vastakkaisiin suuntiin, maksimileveys 60 cm -Voidaan varastoida kapeassa tilassa asettamalla nojapuut limittäin. - Pituus 3,5m - Erittäin tukeva ja vakaa rakenne - SWL 140 kg - CE merkitty MDR direktiivin mukaisesti 2017/745 luokka 1



260217

## Emotion Fitness

### 260010 Motion Cycle 900 MED

Motion Cycle 900 MED-kuntopyörä on kehitetty keskittyen biomekaanisiin puoliin ja se ja se täyttää kaikki optimaalisen, yksilöllisen harjoitusasennon vaatimukset. Pyörä on kompakti ja sen kammet ovat vain 18cm päässä toisistaan. Istuintolpassa on erittäin laaja säätöalue, joka mahdollistaa säädön jopa 205 cm:n kehon korkeudelle. Olipa siis kyseessä pitkä tai lyhyt, urheilija tai potilas, kaikki hyötyvät tästä pyörästä. Jopa yli 135 cm pitkät lapset voivat käyttää sitä. Pyörän satulassa on vaakasuuntainen säätöominaisuus. Maksimikuorma 150 kg. Tehon vaihteluväli 25-500W. Koko 119 x 65 x 145cm (PxLxK). Paino 58 kg.



260010

### 260013 Motion RELAX 900 MED

Motion Relax 900 MED on mukava harjoituslaite pitkiin harjoitusjaksoihin potilaille, joilla on neurologisia tai ortopedisiä rajoituksia, sekä erittäin raskaille käyttäjille. Lisäksi pyörässä on kahvat turvalliseen pyörään nousemiseen ja siitä poistumiseen, ja selkänöjan säätö on vakiona. Erikoisversiona tähän pyörään on saatavana myös leveämpi, kääntyvä istuin ja korkeat käsinojat helpottamaan laitteeseen pääsyä. Maksimikuorma 150 kg. Tehon vaihteluväli 25-500W. Koko 173 x 65 x 133 cm (PxLxK). Paino 80 kg.



260013

### 260015 Motion Cross 900 MED

Motion Cross 900 MED crosstrainer-laitteen avulla on helppo treenata. Laitteen ohjaava liike mahdollistaa nopean ja turvallisen harjoittelun aloittamisen. Pitkät ohjausvarret ja ergonominen käsivarsien ja jalkojen liikkeiden yhdistelmä takaavat sujuvan ja miellyttävän liikkeen. Turvallisuutta harjoitteluun luovat nopeuden rajoitin ja se, että liike automaattisesti vähenee harjoittelun lopussa. Harjoitus on helppo oppia ja hellävarainen keholle – muihin markkinoilla oleviin laitteisiin verrattuna liike on erittäin pehmeä ja hyvä nivelille. Matala 18 cm askelkorkeus. Maksimikuorma 150 kg. Tehon vaihteluväli 100-500W. Koko 200 x 65 x 169 cm (PxLxK). Paino 101 kg.



260015

### 260017 Motion Body 900 MED Free Standing

Motion Body 900 Free Standing on ihanteellinen laite yläraajojen aktiiviseen harjoittamiseen. Laitetta voidaan käyttää kestävyys-harjoitteluun sekä mobilisaatioon käsivarren ja olkapään nivelvammojen jälkeen. Suuri säätöalue tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet olkapään korkeuden säätämiseen sekä seisoma- että istumaharjoittelua varten. Irrotettava istuin mahdollistaa monipuolisen harjoittelun ja laitteen runkorakenne mahdollistaa laitteen käytön myös monille pyörätuolin käyttäjille. Maksimikuorma 150 kg. Tehon vaihteluväli 25-500W. Koko 98 x 77 x 155 cm (PxLxK). Paino 116 kg.



260017

### 260021 Motion Sprint 900 SL MED

Motion sprint 900 SL MED on ammattimainen, erittäin kestävä juoksumatto lamellitekniikalla. 60 lamellia on asennettu sivulle kuulalakaareihin, jotta ne voivat liikkua saumattomasti. Lamellit ovat hyviä nivelille ja takaavat tasaisen nopeuden. Liikkuminen voidaan toteuttaa pienellä moottoriteholla, ja siten myös alhaisella virrankulutuksella. Maksimikuorma 160 kg. Nopeus 0,1–17 km/h, vaihteluväli 25-500W. Koko 173 x 76 x 145 cm (PxLxK). Paino 177 kg. Juoksunopeus 22 km/h saakka voidaan ottaa lisäominaisuutena juoksumattoon.



260021



### 2871E Monark Compact Rehab 871E kuntopyörä

Pieni ja kätevä ylä- ja alaraajojen harjoituslaite. Kuntopyörää on erittäin helppo käyttää ja siinä on tasainen vastus. Sopii loistavasti lihasten lämmittelyyn ja harjoitteluun, niin kotona kuin vastaanotoilla. Toimitukseen kuuluu pedaalit käsille ja jaloille. Näyttö ilmoittaa kierrosmäärän ja harjoitteluajan minuuteissa, sekä kokonaiskierrosmäärän ja kokonaisharjoitteluajan. Laitteessa oleva kantokahva mahdollistaa helpon siirtelyn. Kuntopyörä sopii käytettäväksi myös pyörätuolissa istuen tai seisten. Kaikki Monarkin laitteet kehittävät käyttäjän kunto-ominaisuuksia ottaen huomioon turvallisuuden sekä miellyttävän harjoittelukokemuksen.

## Lisävarusteet Monark-pyöriin

### 29145-93 Pöytäteline

Sopii Monark 871E- ja 881E-malleihin. Käytön jälkeen voidaan taittaa kokoon ja ripustaa puolapuihin.



29145-93

### 9145-8 Pöytäteline Monark 881E -mallille

Säädettävä pöytäteline Monark 881E:lle. Voidaan nostaa ja laskea käyttäjän mukaan. Vakaa runko käytännöllisillä kuljetuspyörillä ja laite kiinnitetään suoraan pöytälevylle. Voidaan käyttää pyörätuolissa istuttaessa. Koko: 69 x 75 x 70-95 cm (PxLxK). Paino 25 kg.



9145-8

## Fluid – First Degree aerobiset laitteet

Vesi antaa tasaisen ja miellyttävän harjoitusvastuksen, jota voidaan säätää vauhdissa. Samalla virtaavan veden ääni tehostaa aitoa tunnetta veden vastuksesta ja inspiroi harjoittelua. Tuotteet sopivat moniin erilaisiin ympäristöihin.

### **2E550 Soutulaite Fluid E-550, medical**

#### **2101274 Selkänoja**

Uniikki soutulaite, vastuksena vesi, joka tarjoaa miellyttävän ja rauhoittavan harjoituksen. Standardia korkeamman istuimen ansiosta laite sopii hyvin myös ikääntyneille. Ergonominen käsikahva. Näyttö ilmoittaa tason, kalorikulutuksen, vedot per minuutti, 500 m ajan, watit, matkan, intervallit ja ajan. 20 vastustasoa. Pulssin vastaanotin, pulssivyö ja selkänoja lisävarusteita. Voidaan varastoida pystyasennossa. Siirtopyörät. Maksimikuorma 250 kg. Koko: 190 x 71 x 68 cm (PxLxK). Paino 75 kg.



2E550

### **2E750 Polkupyörä Cross Trainer Fluid E-750, medical**

Uniikki harjoitusväline, joka sopii ylä- ja alavartalon harjoitteluun. Kiertokampien kulmaa voidaan säätää 360 astetta, ominaisuus, joka mahdollistaa alaraajojen polkuharjoittelun istuma-asennossa, sekä ylävartaloharjoittelun seisten tai istuma-asennossa. Täydellinen lämmittely- ja harjoituslaite, jossa vesivastuksen ansiosta rentouttava vedensolina ja pehmeä ja miellyttävä polku. 20 vastustasoa. Näyttö ilmoittaa tason, pulssin, kalorikulutuksen, matkan, nopeuden, ajan, kierrokset per minuutti ja watit. Laitetta voidaan polkea etu- ja takaperin. Yhdistelmä pedaali- ja käsikahvat. Pulssivyö lisävarusteena. Maksimikuorma 250 kg. Mitat: 130 x 99 x 113 cm (PxLxK). Paino 115 kg.



2101274



2E750

### **2E950 Ylävartalo Ergometri Fluid E-950, medical**

Erinomainen valinta ylävartalon harjoitteluun. Vesi on vastuksena pehmeä ja miellyttävä. Harjoittelu voi tapahtua tuolissa tai pyörätuolissa istuen irrotettavan istuimen ansiosta, tai jopa seisten, sillä laitteen korkeus on säädettävissä. 4 istuinkorkeutta ja 20 vastustasoa. Jalkatuki. Näyttö ilmoittaa tason, pulssin, kalorikulutuksen, matkan, nopeuden, ajan, kierrokset per minuutti ja watit. Voidaan polkea sekä etu- että takaperin. Pulssivyö lisävarusteena. Maksimikuorma 250 kg. Mitat: 125 x 99 x 113 cm (PxLxK). Paino 130 kg.



2E950

## Ergo-Fit aerobiset laitteet

Lähes äänettömästi toimivat Ergo-Fit-laitteet ovat maailmanlaajuisesti tunnettuja pyörrevirtavastuksensa ansiosta. Tästä johtuen harjoittelu on miellyttävää, eikä vastus rasita niveliä ja nivelsiteitä. Yritys valmistaa kaikki laitteensa Saksan tehtaillaan, mikä takaa korkean laadun ja viimeistellyn ulkonäön.

400-mallissa väri valkoinen/musta.

4000-mallissa värit valkoinen/musta tai hopeanharmaa/musta.

### 250010 Ergo-Cycle 400

Ergo Cycle on erittäin vakaa ja äänetön polkea. Se sopii loistavasti laitospöytäkäyttöön tai kuntosalille. Yksinkertainen näyttö ja opastus. 4 esiohjelmoitua ohjelmaa. Näyttö ilmoittaa etäisyyden, kierrokset, kalorinkulutuksen, tehon, ajan ja pulssin. Sykevyö lisävarusteena. Helppo kulku laitteeseen ja siitä pois. Kuormaa voi vaihdella välillä 15-400 wattia ja nopeuden välillä 20-120 kierr / min. Verkkovirtakäyttöinen. Kuljetuspyörät. Käyttäjän paino enintään 180 kg. Mitat: 120 x 60 x 140 cm (PxLxK). Paino 45 kg.

250010



### 250011 Ergo-Cycle 4000

### 250012 Ergo-Cycle 4000, medical

Erittäin tukeva ja turvallinen kuntopyörä, jossa mahdollisuus korkeaan räsitusastoon. Selkeä näyttö, jossa manuaalinen ja 4 valmiiksi ohjelmoitua profiilia, sekä sydänlihasharjoitteluohjelma. Näyttö ilmoittaa matkan, kierrokset minuutissa, kalorinkulutuksen, tehon watteina, ajan ja pulssin. Pulssivyö vakiovarusteena. Matala runkoinen. Vastus 15–600 watin välillä ja nopeus 20–120 kierrosta minuutissa. Sähkökäyttöinen. Kuljetuspyörät. Maksimikuorma 180 kg. Mitat: 118 x 54 x 145 cm (PxLxK). Paino 58 kg.

250011



### 250031 Ergo Recumbent 4000

### 250032 Ergo Recumbent 4000, medical

Kuntopyörä, jossa selkänoja ja muotoiltu istuin, selän kuormittumisen vähentämiseksi, sekä sydänlihasharjoitteluohjelma. Selkeä näyttö ilmoittaa matkan, kierrokset minuutissa, kalorinkulutuksen, tehon watteina, ajan ja pulssin. Vastus 15–600 watin välillä ja nopeus 20–120 kierrosta minuutissa. Sähkökäyttöinen. Pulssivyö vakiovarusteena. Maksimikuorma 200 kg. Mitat: 160 x 54 x 125 cm (PxLxK). Paino 75 kg.

### 223280 Säädettävä pedaali pari

Pedaalien säteen säädettävyys mahdollistaa aikaisen harjoitteluvaiheen kuntoutuksessa, esim. tilanteissa joissa potilaalla on liikerajoituksia.



223280



250031

## Ergo-Fit aerobiset laitteet

### 250041 Juoksumatto Ergo Trac Alpin 4000

### 250042 Juoksumatto Ergo Trac Alpin 4000, medical

Portaaton kallistuksen säätö 0–20 %.

### 250051 Juoksumatto Ergo Trac Tour 4000

### 250052 Juoksumatto Ergo Trac Tour 4000, medical

Portaaton kallistussäätö -5–15%. Juoksumatto on erittäin laadukas ja valmistettu ammattilaiskäyttöön. Soveltuu kuntosali- ja kuntoutusharjoitteluun matalien käsikahvojen ja matalan aloitusnopeuden ansiosta. Portaaton nopeuden säätö 0,2–25 km/h välillä. Juoksutila: pituus 150 cm, leveys 50 cm. Näytössä manuaalinen ja 4 valmiiksi ohjelmoitua profiilia, sekä sydänlihasharjoittelu-ohjelma. Selkeä näyttö ilmoittaa matkan, ajan, nopeuden, kalorikulutuksen, tehon watteina, ajan ja pulssin. Häätäpysäytys ja turvaliina kiinnikkeillä. Pulssivyö vakiovarusteena. Sähkökäyttöinen. Mitat: 210 x 85 x 140 cm (PxLxK). Maksimikuorma 200 kg. Paino 178 kg.



250041

### 250071 Ergo Mix 4000

### 250072 Ergo Mix 4000, medical

Puolimakaavan harjoitusasennon ansiosta Ergo Mix minimoi niveliin kohdistuvan kuormituksen ja keventää myös selkänikamien discuksiin kohdistuvaa intervertebraalista painetta. Tällä laitteella voivat tehokkaasti harjoitella niin lonkka- ja polvipotilaat, kuin ylipainoisetkin. Selkeä näyttö ilmoittaa matkan, toistoa/minuutissa, kalorit, tehon watteina, ajan ja pulssin. Nopeus 20–120 askelta minuutissa. Pulssivyö vakiovarusteena. Näytössä manuaalinen ja 4 valmiiksi ohjelmoitua profiilia, sekä sydänlihasharjoitteluohjelma. Sähkökäyttöinen. Siirtopyörät. Maksimi käyttäjäpaino 200 kg. Mitat: 200 x 70 x 165 cm (PxLxK). Paino 160 kg.



250071

### 250061 Stepperi Ergo Stair 4000

### 250062 Stepperi Ergo Stair 4000, medical

Ergo Stair on ainutlaatuinen harjoituslaite jalka- ja pakara- lihaksille. Laitteen ”portaat” liikkuvat toisistaan riippumattomina. Selkeä näyttö ilmoittaa matkan, toistoa/minuutissa, kalorit, tehon watteina, ajan ja pulssin. Nopeus 15–155 askelmaa minuutissa. Pulssivyö kuuluu vakiovarustukseen. Näytössä manuaalinen ja 4 valmiiksi ohjelmoitua profiilia, sekä sydänlihasharjoittelu-ohjelma. Sähkökäyttöinen. Siirtopyörät. Maksimi käyttäjäpaino 200 kg. Mitat: 110 x 77 x 181 cm (PxLxK). Paino 110 kg.

250061

### 250027 Crosstrainer Ergo Cross 4007, medical


Ergo Cross laitteessa harjoittelet yhtäaikaaisesti ylä- ja alaraajoilla, jonka ansiosta koko keho saa tehokasta harjoitusta. Tässä laitteessa alaraajojen liike on elliptinen. Laitteessa voi harjoitella etu- ja takaperin. Selkeä näyttö ilmoittaa matkan, toistoa/minuutissa, kalorit, tehon watteina, ajan ja pulssin. Nopeus 15–200 askelta minuutissa. Pulssivyö vakiovarusteena. Näytössä manuaalinen ja 4 valmiiksi ohjelmoitua profiilia, sekä sydänlihasharjoittelu-ohjelma. Sähkökäyttöinen. Siirtopyörät. Maksimi käyttäjäpaino 150 kg. Mitat 205 x 67 x 170 cm (PxLxK). Paino 160 kg.



250027

# Harjoitusvälineet

Seuraavilta sivuilta löytyy useita erilaisia harjoitusvälineitä vastaanotoille, kuntosaleille ja kotiin. Olemme valinneet vain maailman kärkevalmistajien tuotteita. Laaja valikoima sisältää mm. vastusnauhoja, tasapaino-harjoitteluvälineitä, palloja, painomansetteja, käsipainoja ja painotankoja.

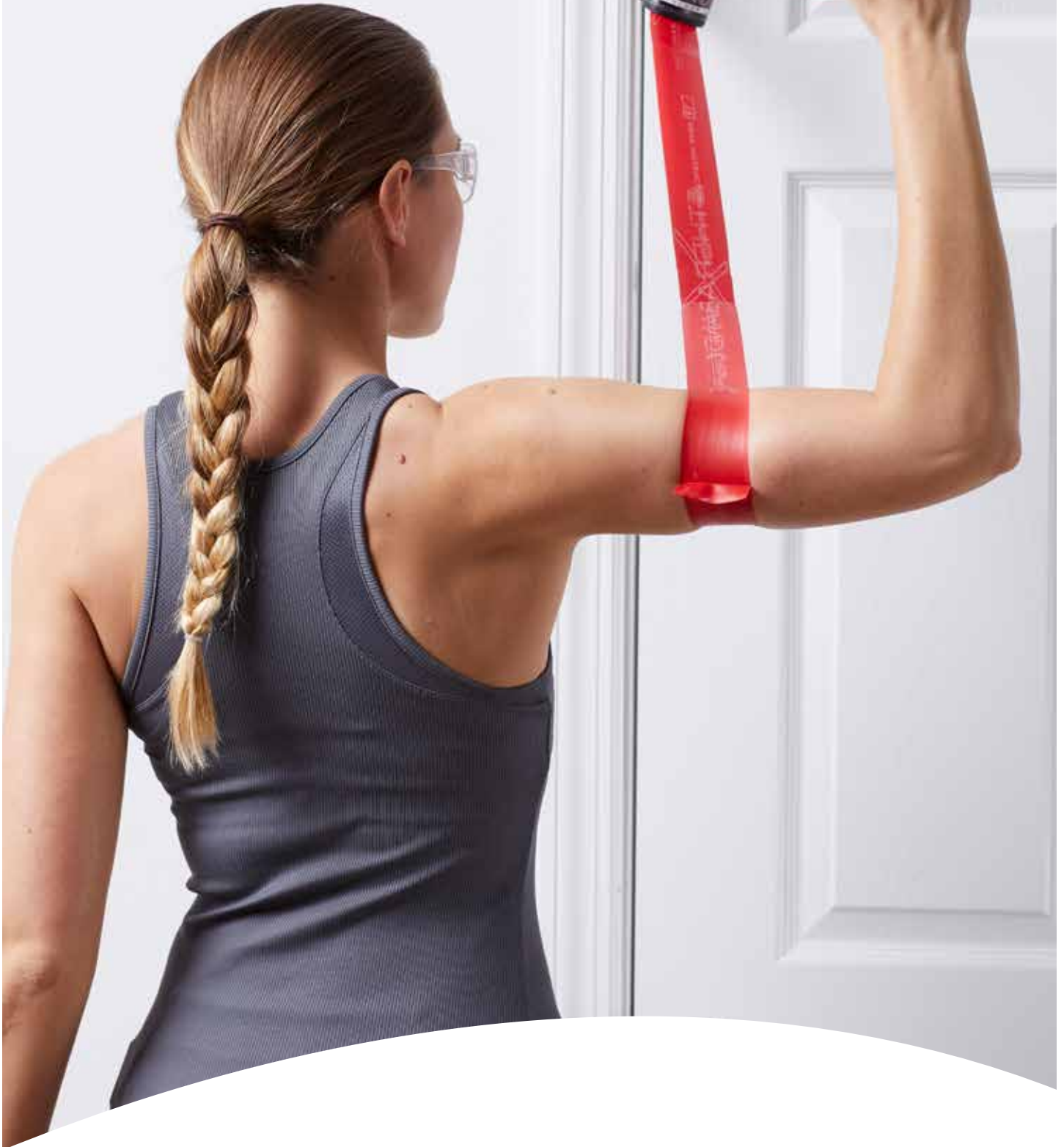



## Thera-Band® vastuskuminauha

Thera-Band esiteltiin jo 70-luvulla ja on siitä lähtien ollut tärkeä harjoitteluväline. Sitä voidaan käyttää kaikkeen lihasharjoitteluun riippumatta lihaskunnosta tai diagnoosista. Thera-Bandia valmistetaan 7 erilaista vastusastetta ja värejä. Vastus kasvaa 25 % väreittäin välillä valkoinen – musta ja 40 % välillä musta – hopea. Thera-Band nauhoja on saatavilla usealla eri pakkauskoolla ja nauhan leveys on 13 cm.



### TheraBand® 2,5 m

- 27921** Keltainen, kevyt
- 27927** Punainen, medium
- 27928** Vihreä, raskas
- 27929** Sininen, erittäin raskas
- 27931** Musta, extra raskas

2,5 metrin vastusnauha toimitetaan säilytuspussiin pakattuna.

### TheraBand® 5,5 m

- 2037** Valkoinen, erittäin kevyt
- 2040** Keltainen, kevyt
- 2041** Punainen, medium
- 2042** Vihreä, raskas
- 2043** Sininen, erittäin raskas
- 2044** Musta, extra raskas
- 2140** Hopea, super raskas

### TheraBand® 45,5 m

- 2139** Valkoinen, erittäin kevyt
- 2045** Keltainen, kevyt
- 2046** Punainen, medium
- 2047** Vihreä, raskas
- 2048** Sininen, erittäin raskas
- 2049** Musta, extra raskas
- 2141** Hopea, super raskas



### TheraBand® 30 -pack x 1,5 m

Uusi pakkaus, joka sisältää 30 erillispakattua, 1,5 m pitkää harjoitusnauhaa. Uuden pakkauksen ansiosta vastusnauhat pysyvät hygieenisinä ja niitä on helppo välittää eteenpäin.

- 20520** Keltainen, kevyt
- 20530** Punainen, medium
- 20540** Vihreä, raskas
- 20550** Sininen, erittäin raskas
- 20560** Musta, extra raskas



## Thera-Band® latexfree vastuskuminauhat, 22 metriä

Lateksittomien vastusnauhojen värikoodit ovat samat kuin lateksia sisältävien vastuskuminauhojen. Kätevä vaihtoehto lateksi-allergikoille sekä terveydenhuollossa, jossa pyritään välttämään turhaa lateksin käyttöä. Tuoksuton ja kalkiton. Leveys 10 cm.

- 50324** Keltainen, kevyt
- 50334** Punainen, medium
- 50344** Vihreä, raskas
- 50354** Sininen, erittäin raskas
- 50364** Musta, extra raskas



## Thera-Band® CLX -kuminauhat

Lateksittomat CLX-kuminauhat rakentuvat peräkkäisistä silmukoista, joten erillisiä kahvoja tai solmuja ei tarvita. Se on monipuolinen harjoitusväline terapeuttiseen ja toiminnalliseen harjoitteluun. Nauhasta on mahdollista leikata sopivankokoisia paloja, yhden silmukan koko on noin 20 cm. Myydään kahdessa eri koossa. Eri värit merkitsevät eri vastus- / jäykkyytstasoja.

### Thera-Band® CLX 2,1 metriä

- 13219** TheraBand CLX, keltainen, kevyt
- 13220** TheraBand CLX, punainen, medium
- 13221** TheraBand CLX, vihreä, raskas
- 13222** TheraBand CLX, sininen, erittäin raskas
- 13223** TheraBand CLX, musta, extra raskas

### Thera-Band® CLX 22 metriä

- 12778** TheraBand CLX, keltainen, kevyt
- 12779** TheraBand CLX, punainen, medium
- 12780** TheraBand CLX, vihreä, raskas
- 12781** TTheraBand CLX, sininen, erittäin raskas
- 12782** TheraBand CLX, musta, extra raskas



### 11 silmukkaa



## Thera-Band® Loops

Loops koostuu yhdestä jatkuvasta silmukasta mikä helpottaa käsien ja alavartalon kuntoutuskoulutusta. Loopsia on saatavana neljänä eri väriä / vastusasteenta. Pituus 30,5 cm (mitta kun hihna on alaspäin) ja leveys 7,5 cm. Setissä on yksi jokaista väriä.

- 20811** TheraBand Loops, keltainen, kevyt
- 20821** TheraBand Loops, punainen, medium
- 20831** TheraBand Loops, vihreä, raskas
- 20841** TheraBand Loops, sininen, erittäin raskas
- 20800** TheraBand Loops, setti 4kpl



## Togu Loops

Loops koostuu yhdestä jatkuvasta silmukasta mikä helpottaa käsien ja alavartalon kuntoutuskoulutusta. Loopsia on saatavana neljänä eri värinä / vastusasteena. Pituus 30,5 cm (mitta kun hihna on alaspäin) ja leveys 7,5 cm. Setissä on yksi jokaista väriä.

- 650810** Togu Loops, keltainen, kevyt
- 650820** Togu Loops, vihreä, medium
- 650830** Togu Loops, sininen, raskas
- 650840** Togu Loops, musta, extra raskas
- 650800** Togu Loops, setti 4 kpl



## Thera-Band® Powerband

TheraBand Powerbandit ovat laadukkaita ja vahvoja silmukakuminauhoja. Ne sopivat kaikenlaiseen harjoitteluun yksin tai ryhmissä, ja toimivat hyvin myös kotitreeneissä. Voidaan käyttää esimerkiksi kuntosalilla apuna eri harjoitteissa tai vastuksena kuntoutuksessa ja venyttelyssä. Vastus määräytyy nauhojen leveyden mukaan, ja pakettiin kuuluu kaksi nauhaa joissa on eri vastukset. Pituus 104 cm.

- 15154** TheraBand Powerband, kevyt
- 15155** TheraBand Powerband, medium
- 15156** TheraBand Powerband, raskas
- 15157** Theraband Powerband, extra raskas



15154



15155



15156



## Thera-Band® harjoitustuubi

Thera-Band Harjoitustuubi on ominaisuuksiltaan vastuskuminauhan kaltainen, mutta putkimainen. Samat värikoodit kuin muissakin Thera-Band nauhoissa.

## Thera-Band® harjoitustuubi, 7,5 m

- 21010** Valkoinen, erittäin kevyt
- 21020** Keltainen, kevyt
- 21030** Punainen, medium
- 21040** Vihreä, raskas
- 21050** Sininen, erittäin raskas
- 21060** Musta, extra raskas
- 21070** Hopea, super raskas

## Thera-Band® harjoitustuubi, 30,5 m

- 2155** Valkoinen, erittäin kevyt
- 2156** Keltainen, kevyt
- 2157** Punainen, medium
- 2158** Vihreä, raskas
- 2159** Sininen, erittäin raskas
- 2160** Musta, extra raskas
- 2161** Hopea, super raskas



## Lisävarusteet Thera-Band® vastusnauhoihin ja harjoitustuubeihin

- 2142 Käsikahva, pari
- 2144 Nilkkakahva, pari
- 2177 Ovistoppari



## TheraBand® Bodytrainer

- 21231 Keltainen, kevyt
- 21232 Punainen, medium
- 21242 Vihreä, raskas
- 21252 Sininen, erittäin raskas
- 21262 Musta, extra raskas

sisältää 1,4 metrin Thera-Band harjoitustuubin käsikahvoilla.



21231-21262

## TheraBand® käsien harjoituspallot



26020-26050

- 26020 Erittäin pehmeä
- 26030 Pehmeä
- 26040 Keskikova
- 26050 Kova

Monipuolinen käden ja sormien harjoitusväline, jota voidaan lämmittää mikrossa muutamia sekunteja tai jäähdyttää pakastimessa 20 minuuttia parhaan harjoitustehon saavuttamiseksi. Materiaali palautuu aina takaisin pyöreään muotoonsa. Pallojen halkaisija 5 cm.

## TheraBand® Flexible Exercise Bar

- 26103 Keltainen, erittäin kevyt
- 26100 Punainen, kevyt
- 26101 Vihreä, keskivahva
- 26102 Sininen, vahva



Käytännöllinen tuote tarttumisen ja voiman harjoiteluun, Pendel-liikkeisiin ja mobilisointiin. Tuotetta voidaan käyttää jopa epikondyliittiharjoitteissa – katso video [www.youtube.com](http://www.youtube.com) ja etsi "Tyler Twist". Pakkauksessa mukana harjoitusesimerkkejä.



THERABAND  
ACADEMY

### Suositus!



[www.thera-bandacademy.com](http://www.thera-bandacademy.com) -verkkosivusto, josta löytyy tuloksia lukemattomista tieteellisistä tutkimuksista sekä ja monia tuotekoulutuksia.



22160



2038

## Olkaveto

### 22160 TheraBand Shoulder Pulley

Toivottu uutuus hartiaseudun liikkuvuuden harjoitteluun. Olkaveto ylläpitää ja edistää liikkuvuutta. Nauha kiinnitetään yksinkertaisesti oven taakse. Nauha on merkitty väreillä keltaisesta mustaan. Tämän ansiosta harjoituksesta saa välittömän palautteen ja edistymistä on helppo seurata.


### 2038 Ulla-Bella veto

Ulla-Bella on valmistettu päällystetystä kuminauhasta, jossa mukana tarramansetit. Vetonaru kulkee keskuspyörän kautta, joka mahdollistaa laajat liikelajajuudet liikeharjoittelussa.

## Motion Guidance

### 91700 Motion Guidance Clinical Kit

Motion Guidance on erittäin hyödyllinen tuote, joka antaa laserosoitimen avulla visuaalista palautetta liikkeistä ja liikeradoista. Tuote auttaa varsinkin asiakkaita, joiden on vaikea hahmottaa, miten heidän kehonsa tai raajansa liikkuvat. Motion Guidancen avulla he voivat kehittää keuhonhallintaansa ja parantaa liikeratoja. Paketti sisältää paljon erilaisia lisätarvikkeita

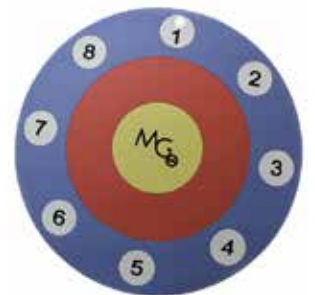

91700



6400047

## Pilatesrulla

### 6400047 Togu Pilatesrulla

Erityisesti pilates-harjoitteluun kehitetty kiinteä rulla. Toimitetaan harjoitusohjeiden kera. Koko 15 x 90 cm.

## Tasapainolaudat

### 29000 Tasapainolauta rock

#### 29002 Lisäosa Rock tasapainolautaan

Verraten yksinkertainen tasapainolauta. Lisäosa nostaa laudan vaatavuustasoa. Maksimi kuorma 140 kg. Halkaisija koko 40 cm.

### 23895 Tasapainolauta käsikahvoilla

Musta tasapainolauta, jossa käsikahvat helpottamaan siirtymisiä tai apuna ylävartaloharjoitteisiin. Tasapainolaudassa on luistamaton pinta. Halkaisija 40 cm ja korkeus 10 cm.

### 410407 Togu Challenge Disc 2.0

Togu Challenge Disc 2.0 on mielenkiintoinen ja edullinen tasapainolauta, joka testaa tasapainoa ja tekee harjoittelusta hausempaa. Se sopii käytettäväksi kaikille tasapainotasosta ja iästä riippumatta. Tasapainolaudassa on liiketunnistin, joka mittaa tietoja Bluetooth 4.0:n kautta suoraan tietokoneeseen, tablettiin tai puhelimeen. Lauta on vakaa ja sen pinta on liukumaton materiaalia turvallisen harjoittelun takaamiseksi. Levyn halkaisija on noin 44 cm. Maksimi käyttäjäpaino on 120 kg.



29000



23895



## Tasapainotyynyt

### 29005 Togu tasapainotyynty Dynair Senso

Monipuolinen tasapainotyynty, joka soveltuu istuen ja seisten tehtäviin tasapaino- ja koordinaatioharjoituksiin. Tyynty pumpataan halutun vaikeusasteen mukaisesti. Tyyntyn toinen puoli on sileä ja toisella puolella on stimulaationystyrät. Tyyntyn suojus on tehty velouri-tyyppisestä materiaalista jonka ansiosta istumaharjoitteet on mukavampi tehdä. Pestävä. Halkaisija 33 cm. Paksuus noin 5 cm. Mukana harjoitusohjeet. Maksimi käyttäjäpaino 200 kg.



410407



### 29009 Togu tasapainotyynty Happy Back XL

Erikoisvalmistettu tasapainotyynty terveelliseen ja dynaamiseen istumiseen. Aktiivinen istuma-asento harjoittaa syviä vatsalihaksia ja tuotteen etu on, että sitä voidaan käyttää niin työssä, kotona kuin vastaanotoillakin. Dyn-Airiin verrattuna, tässä tyyntyssä vähemmän stimulaationystyröitä ja materiaali on pehmeämpi. Tämän ansiosta tyynty muotoutuu hyvin kehon muotojen mukaan. Halkaisija 36 cm. Paksuus noin 5 cm. Väri harmaa. Harjoitus-esimerkit sisältyvät toimitukseen. Maksimi käyttäjäpaino 200 kg.



29005



29009

happyback™



29004



26201



## Tasapainotyyny

### 29004 Togu tasapainotyyny Aero-Step PRO

Ilmatäytteen ja tukevilla levyillä toisiinsa kiinnitetty tyyny. Tyynyn pinnassa on yli 1000 muovinytystä, jotka parantavat verenkiertoa. Ohjetaulu ja pumppu sisältyvät toimitukseen. Koko: 52x40x8,5 cm (PxLxK). Maksimikuormitus 200 kg.

### 26201 Bosu tasapainotyyny

Tunnettu ilmatäytteen puolipallo tasapainon, voiman ja koordinaation harjoitteluun. Bosulla voidaan harjoitella kumpi tahansa puoli ylöspäin, jonka ansiosta välineen voi kääntää kesken harjoittelun. Voidaan käyttää istuen, seisten, yksilö- ja ryhmäharjoittelussa. Pumppu ja harjoitusmerkit kuuluvat toimitukseen. Halkaisija 63 cm ja korkeus 24 cm. Maksimi käyttäjäpaino 150 kg.

### 67322 Airex tasapainotyyny Mini, 41x25 cm

### 67321 Airex tasapainotyyny Elite, 50x41 cm

### 67330 Airex tasapainotyyny X-Large, 98x41 cm

X-Large-tasapainotyyny tarjoaa mahdollisuuden normaalia monipuolisempaan harjoitteluun ja näin kuntoilija saa halutesaan myös lisähaastetta treeneihin. Joustavan 6 cm paksun materiaalin ansiosta harjoittelija joutuu jatkuvasti haastamaan oman kehonsa säilyttääkseen tasapainon sekä stabiloidakseen nivelensä.

### 673143 Airex Balance-Beam

Matala palkki tasapainoharjoitteluun. Valmistettu pehmeästä ja joustavasta materiaalista joka asettaa haasteita tasapainotaidoillesi. Sopii tasapaino-, sensomotoriikka ja koordinaatioharjoitukseen. Sininen. Koko: 160 x 23 x 6 cm (PxLxK). Paino 0,9 kg.

67322



67321



67330



673143

## Harjoitusmatot

### 11013 Liukumatto Flowin Pro

Flowin on toiminnallinen harjoitusmuoto, joka on kehitetty Sveitsissä. Harjoitusmuodossa oma keho toimii vastuksena. Harjoittelu on hauskaa ja koko keho kuormittuu armotta. Väline sopii uskomattoman hyvin kuntoutukseen, koska harjoitteiden vaikeustasoa voidaan helposti säädellä. Flowin Pro on kaupalliseen käyttöön tarkoitettu ammattilaismalli. Tuote on vakaa ja helppo säilyttää. Toimitukseen sisältyy viisi pehmustetta (polvi, käsi ja jalat). Mitat: 140 x 100 cm.




11013

### 27335 Trampoliini Trimilin Swing

Korkealaatuinen trampoliini, valmistettu korkeaelastisesta materiaalista, jonka ansiosta trampoliini on pehmeän kimmoisa. Toimituksessa pomppualusta valmiiksi asennettuna, vain jalat on ruuvattava paikoilleen. Valmistettu Saksassa. Väri: Musta/hopea. Mitat: Halkaisija 120 cm, korkeus 29 cm. Maksimi käyttäjäpaino 100 kg. Tukitanko on säädettävissä välillä 114-144 cm.

27335

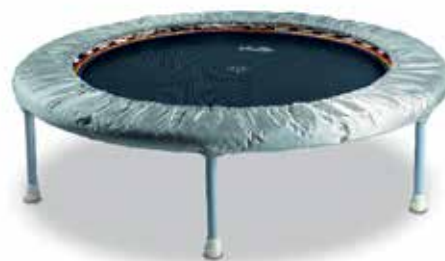

## Steppilauta

### 2P-002000 Reebok steppilauta

Alkuperäinen steppilauta jossa 3 korkeusvaihtoehtoa: 15, 20 ja 25 cm. Valmistettu yhdestä palasta, jonka ansiosta lauta kestää hyvin siihen kohdistuvan paineen. Lattiapala ja askellustaso liukumaton materiaalia. Pituus 90 cm, leveys 35 cm. Paino 7,5 kg. Maksimikuorma 120 kg.



2P-002000

## Incline Decline Lauta

### 27411 Incline Decline Lauta

Incline Decline lauta on vakaa kulmalauta, joka on valmistettu puusta. Lautaa peittää liukastumista estävä materiaali, joka edistää turvallista harjoittelua. Lautaa voidaan käyttää esimerkiksi erilaisiin venytyksiin ja akillesjänteen harjoituksiin. Tieteelliset tutkimukset ovat myös osoittaneet, että harjoittelu kaltevuuslaudalla on erittäin tehokasta esimerkiksi patellofemoraaalisen kipuoireyhtymän hoidossa. Kaltevuus 17,5 astetta. Koko: 48x30x16 cm (PxLxK). Paino 3 kg. Maksimikuormitus 150 kg.

27411



## Hyppynaru

### 2101 Hyppynaru

Kahvaton naru, pituus 300 cm.



2101



## Kävelysauvat

### 28000 Kävelysauvat, teleskooppi, pari

Kevyet, 2-osaiset teleskoopkisauvat ovat pituussäädettävissä portaattomasti 80-140 cm välillä. Ergonomisia kahvahihoja säädetään tarranauhakiinnityksillä. Metallipiikit irrotettavilla kumisuojuksilla eri alustoille. Paino 0,17 kg/ sauva.

## Functional Trainer

### 8725 Functional Trainer

Functional Trainerissa vastuksena toimii oman kehosi paino. Trainerilla voi tehdä lukuisia tasapaino-, lihasvoima- ja liikkuvuusharjoitteita. Functional Trainerilla voi tehdä noin sata erilaista kuntoiluliikettä! Harjoitteluhinnan voi kiinnittää kattokoukkuun (ei sisälly hintaan) tai oveen mukana tulevan oviankkurin avulla. Mukana harjoitusjulistte ja DVD.



**THERABAND**  
ELEVATE PERFORMANCE. ACCELERATE RECOVERY.

## TheraBand Bobathpallo

**65045** Jumppapallo, 45 cm, keltainen

**65055** Jumppapallo, 55 cm, punainen

**65065** Jumppapallo, 65 cm, vihreä

**65075** Jumppapallo, 75 cm, sininen

TheraBand Pro Series -bobathpallot, ovat erittäin turvallisia palloja, jotka on valmistettu SCP - Security Comfort Performance - turvajärjestelmällä, jonka ansiosta pallo luhistuu hitaasti, jos se puhkeaa. Tämä on erittäin tärkeä ominaisuus potilasturvallisuuden kannalta loukkaantumisriskin vähentämiseksi. Bobathpallot soveltuvat myös esimerkiksi istumatyöskentelyyn tai kotiharjoitteluun.



**TOGU**



## Toгу jumppapallot My Ball Soft

**64155** Jumppapallo, 55 cm, antrasiitti-musta

**64165** Jumppapallo, 65 cm, antrasiitti-musta

**64175** Jumppapallo, 75 cm, antrasiitti-musta

Pallot on valmistettu korkealuokkaisesta muovimateriaalista, jossa miellyttävä pinta ja venttiili. Yllä ilmoitetut mitat ovat maksimi läpimittoja, jotka voivat vaihdella 5-10 % riippuen täyttöpaineesta. Pallojen mukana seuraa harjoitusvinkkiopas.

## Voimistelupallot

**67340** Togu voimistelupallo, 16 cm

**67342** Togu voimistelupallo, 19 cm

Pallo on valmistettu joustavasta muovista, jolla on hyvä kimmoisuus. Pallossa on täyttöventtiili.




## Nystyräpallot

**64630** Togu nystyräpalo, 8 cm

**64631** Togu nystyräpalo, 23 cm

Nystyräpalo herkkyyks- ja oteharjoitteluun.

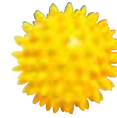

64630



64631

## Pehmeät pallot

**67352** Pehmeä pallo, 18 cm, muovipintainen

**67353** Pehmeä pallo, 7 cm, muovipintainen

Muovipintainen vaahtomuovipallo. Helposti tartuttava ja kuivattava pinta.



67353



67352

## Redondo pallo

**6491000** Togu Redo pallo, 22 cm, sininen

Pehmeä tukevapintainen helposti tartuttava pallo, joka soveltuu pilates-, yoga-, kuntoutus- ja terapiaharjoitteluun. Pallo toimittetaan litteänä ja se täytetään mukana toimitettavalla "pillillä". Ohjekirja sisältyy toimitukseen.



6491000

## Medicin pallot

**67370** Togu Medicinboll 1 kg, punainen

**67373** Togu Medicinboll 3 kg, sininen

**67375** Togu Medicinboll 5 kg, sininen

Korkealaatuinen Togun kuntopallo soveltuu erinomaisesti sekä ryhmäliikuntaan että kotiharjoitteluun. Pallo on erittäin kestävä, lateksivapaa ja siinä on luistamaton pinta joka takaa hyvän pidon.



67370



67373

67375

## Pallopumput

**67344** Pumppu voimistelupalloille

**67346** Pumppu jumppapalloille



## Jumppapallojen säilytys

**67360** Pallokori pyörillä

Pyörille asennettu, muovipinnoitetusta teräsverkosta ja kromatusta putkesta rakennettu pallokori. Mitat: 58 x 48 x 65 cm (PxLxK).



**604003** Säilytysrenkas jumppapalloille

Aktiiviseen istumiseen ja säilytykseen.



**6930500** Palloteline jumppapalloille, 3 kpl

Yksinkertainen ja tilaa säästävä säilytysratkaisu jumppapalloille. 3 kpl/pakkaus.



**3902** Palloteline, seinämalli

Seinään kiinnitettävä palloteline 45–85 cm halk. bobathpalloille. Telineen halkaisija 30 cm. Mitat: 58 x 12 cm.

604003



3902

**17170** Säilytyshylly seinälle, kahdella tangolla

Seinähyllä, jossa 2 tangon välissä säilytyspaikka bobathpalloille. Paikka 3-4 pallolle. Mitat: 50 x 175 cm.



17170

## Painomansetit – Medema

Erittäin laadukas painomansetti, joka on valmistettu Ruotsissa. Sisään käännetty saumat ehkäisevät sisusta vuotamasta. Painomansetin pituus kasvaa hieman painoluokan noustessa. Manseteissa tarranauhat. Kosteantilan painomansettien painokuulat ovat kestävän, kiinnisaumatun muovitaskun sisällä, eivätkä ne pääse kontaktiin veden kanssa.

## Kuivatila



**2250** Painomansetti, 0,25 kg

**2251** Painomansetti, 0,50 kg

**2253** Painomansetti, 1,00 kg

**2254** Painomansetti, 1,50 kg


**2255** Painomansetti, 2,00 kg

**2257** Painomansetti, 3,00 kg

**2259** Painomansetti, 4,00 kg

**2261** Painomansetti, 5,00 kg

## Kosteatila

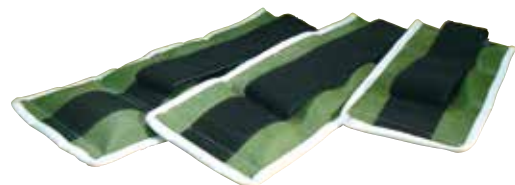

**2051** Painomansetti, 0,50 kg

**2053** Painomansetti, 1,00 kg

**2054** Painomansetti, 1,50 kg

**2055** Painomansetti, 2,00 kg

**2057** Painomansetti, 3,00 kg

## Kahvakuula Ergo

Ergo-kahvakuulan muotoilu vähentää käteen kohdistuvien iskujen painetta ja helpottaa kuulan käsittelyä. Mukavan harjoittelun täydentää neopreenipäällyste, joka pehmentää käteen kohdistuvia iskuja eikä kolhi lattiaa. Kahvakuulaharjoittelun teho perustuu liikkeiden toiminnallisuuteen, jolloin useampi lihasryhmä toimii samanaikaisesti. Kahvakuulalla voit tehdä kymmeniä erilaisia harjoitusliikkeitä, mutta jo muutamalla perusliikkeellä voit harjoittaa tehokkaasti kaikkia kehon päälihasryhmiä. Kahvakuulilla voit tehdä erilaisia nostoja, heilautuksia ja tasapainoliikkeitä. Mukana harjoitus-DVD, joka sisältää 25 eri liikettä.



- 2401** Kahvakuula, kumitettu, 4kg
- 2402** Kahvakuula, kumitettu, 6 kg
- 2403** Kahvakuula, kumitettu, 8 kg
- 2404** Kahvakuula, kumitettu, 10 kg
- 2405** Kahvakuula, kumitettu, 12 kg
- 2407** Kahvakuula, kumitettu, 16 kg

### 2409 Teline kahvakuulille

3-tasoinen teline kahvakuulille. Telineeseen sopii 5 kpl kahvakuulia. Mitat: 39 x 48 x 66 cm (PxLxK).



## Kromatut käsipainot



Kromatut käsipainot, karhennettu otekahva. Painomerkintä painossa.

- 2089** Kromattu käsipaino, 0,5 kg
- 2090** Kromattu käsipaino, 1,0 kg
- 2091** Kromattu käsipaino, 2,0 kg
- 2092** Kromattu käsipaino, 3,0 kg
- 2093** Kromattu käsipaino, 4,0 kg
- 2094** Kromattu käsipaino, 5,0 kg
- 2095** Kromattu käsipaino, 6,0 kg
- 2096** Kromattu käsipaino, 7,0 kg
- 2097A** Kromattu käsipaino, 8,0 kg
- 2097B** Kromattu käsipaino, 9,0 kg
- 2097** Kromattu käsipaino, 10,0 kg

### 2098 Kromatut käsipainot, 10 kpl setti

Setissä 10 paria kromattuja käsipainoja kilon välein 1 – 10kg.

## Vinyylipintaiset käsipainot



Käsipainoissa kiiltävä vinyylipinta, jota helpottaa puhtaanapitoa ja on turvallinen käyttää.

- 514152** Vinyylipintainen käsipaino, 1,0 kg, punainen
- 514153** Vinyylipintainen käsipaino, 2,0 kg, musta
- 514154** Vinyylipintainen käsipaino, 3,0 kg, punainen
- 514155** Vinyylipintainen käsipaino, 4,0 kg, musta
- 514156** Vinyylipintainen käsipaino, 5,0 kg, punainen

## Käsi painojen säilytys

### 2099 Käsi painoteline, musta, kromatuille käsi painoille

Lattiateline 10 kromatulle käsi painoparille.  
Mitat: 22 x 49 x 120 cm (LxPxK).



2099



2088

### 2088 Käsi painoteline puinen

Seinään kiinnitettävä teline kuudelle käsi painolle.  
Leveys 9 cm, syvyys 11 cm ja pituus 90 cm.

## Pump-set

### 8405 Pump-setti

Erinomainen tuote kuntosaleille, ryhmille, kuntoutukseen tai kotikäyttöön. Pump-settiin kuuluu: 1 painotanko pehmeällä kumisella päällisellä (paino n. 2 kg, pituus 140 cm, max kuorma tangolle 37,5 kg), kumitettut painot 2 x 1,25 kg, 2 x 2,5 kg ja 2 x 5 kg ja 2 kpl pikalukkoja.



8405

8406

### 8404 Pump-paino, 10 kg

### 8406 Pikalukko, pari

## Levytanko ja -painot



8411

### 8411 Painotankosetti, 50 kg

Täydellinen painotankosetti, joka koostuu: vinyyli levypainot 2 x 10 kg, 2 x 5 kg, 4 x 2,5 kg ja 2 x 1,25 kg, painotanko ja lukot. Levypainojen reikien halkaisija 30 mm. Levytanko painaa 7,5 kg ja on 165 cm pitkä. Kokonaispaino on 50 kg.

## Storz paineaaltolaitteet

Paineaaltohoito on vakiinnuttanut paikkansa jo useiden ammattilaisten käytössä. Uusi tutkimusnäyttö sekä positiiviset kokemukset ovat kasvattaneet luottamusta hoitomuotoa kohtaan eri ammattikuntien piirissä. Samalla kun positiiviset kokemukset shockwavekäyttäjien keskuudessa kasvavat, lisääntyy myös laadukkaiden tieteellisten julkaisujen määrä aiheesta.

Käsittely on arvokas lisä monille lääkäreille ja terapeuteille, jotka toimivat etenkin kipu- sekä erilaisten toiminnanvaja-asiakkaiden parissa. Paineaalto-/shockwavehoitoa voidaan käyttää tehokkaasti muuten haastavissa lihas-, faskia- ja jänneongelmissa.

Lojer Oy edustaa Storz Medical -paineaaltolaitteita. Storz Medical on tunnettu teknologian korkeasta laadusta, innovatiivisista ratkaisuista sekä panostuksistaan jatkuvaan tuotekehitykseen.



Ota meihin epäroimättä yhteyttä, niin kerromme aihealueesta lisää.

## Radiaaliset shockwavelaitteet

### 497224 Storz Masterpuls MP100 Ultra

Radiaalinen (RSWT) paineaalto on käytetyin muoto shockwavehoidolle. Laitteen sisään rakennettu kompressori tuottaa energian, jolla käsiosan sisällä putkessa liikkuva "luoti" tuottaa voiman paineaallon muodostamiseen. Masterpuls Ultra sarjan laitteet tuovat markkinoille täysin uudenlaisen teknologian paineaaltolaitteissa. Laitteet ovat erittäin suorituskykyisiä tekniikaltaan ja hyvännäköisiä ulkonäöltään. Laitteet valmistetaan Sveitsissä. Painea ja frekvenssiä säädetään suoraan käsiosan näppäimistä, mikä tekee käytön helpommaksi, ergonomiseksi sekä nopeammaksi. Käsiohjaimen näyttö näyttää paineen ja frekvenssin lisäksi tavoiteiskumäärän sekä jo hoidossa annettujen iskujen määrän. Paine: 0,3–5 bar (12 Hz / 5,0 Bar, 16 Hz / 4,5 Bar, 21 Hz / 4 Bar). Taajuus: 0–21 Hz

### 498201 Storz Masterpuls MP100 Ultra VET

Tämä laite on tarkoitettu eläinten hoitamiseen.



497224 (kuvan tuotteessa lisävarusteita)

**497226 Storz Masterpuls One**

Storzin uusi radiaalinen paineaaltohoitolaite Masterpuls One on kehitetty keskittyen käyttäjäystävällisyyteen, liikuteltavuuteen, muotoiluun sekä houkuttelevaan hintaan. Masterpuls One on täydellinen aloitusmalli, sillä sitä on helppo käyttää, ja se sopii yleisimpien oireiden hoitoon. Masterpuls One on hyvä valinta myös toiseksi tai kolmanneksi laitteeksi vastaanotolle, tai silloin kun laitetta on tarkoitus liikutella paljon paikasta toiseen. Laitteen voi helposti ottaa mukaan esimerkiksi toiselle klinikalle tai vaikkapa urheilujoukkueen luo kompaktin koon ja kantokahvan ansiosta. 6 käsittelytilaa / tehoaluetta: taajuus 6-18 Hz, paine max. 2,7 bar. Sisältää kaksi applikaattoria: R15 Standard ja D20-S Standard Oscillator, Ylimääräinen vaihtosarja sisältyy hintaan.

**Lisävarusteet****MP100****497730 Kosketusnäyttö**

Täydennä Masterpuls Ultra 10 tuuman kosketusnäytöllä ja siihen kuuluvalla telineellä. Erittäin kattava anatominen kirjasto selvillä kuvilla, jotka voidaan nähdä eri kulmista

**497712 Vaunu Masterpuls Ultra****497731 Storz Standard -applikaattorisarja, 9 kpl****498120 Storz Faskia -applikaattorisarja, 4 kpl****498121 Storz Spine -applikaattorisarja, 3kpl****497788 Kantolaukku, kova, Masterpuls Ultra****497772 Kantolaukku, pehmeä, Masterpuls Ultra****494427 V-Actor värinähoito-osa****MP One****497711 Vaunu MP One**

Tukeva vaunu, jossa on kaksi hyllyä. Suuret lukittavat pyörät helpottavat vaunun siirtämistä paikasta toiseen. Toimitetaan kokoamattomana.

**497710 Kuljetuslaukku, pehmeä MP One**

Pehmeä kantolaukku, joka sisältää sivutaskun tarvikkeille. Laukussa on sekä kahva että olkahihna.

**494449 D20-S Standard Oscillator****494899 D20-T Gold Oscillator****494585 R15 Standard Applicator****495695 C15 Ceramic Energy****494425 DI15 Gold Depth**

## Fokusoidut shockwavelaitteet

### 497732 Storz Duolith SD1 T-Top Ultra

Storz Duolith SD1 T-Top Ultra fokusoidulla paineaalilaitteella saadaan tarkasti määriteltyä hoitokohte sekä haluttu energiamäärä kudokseen. Käsiosan etuosaan vaihdetaan geelityyny aina halutun hoidon kohteen ja energiamäärän mukaan. Geelityynyillä määritellään myös hoitokohteen syvyys / piste kuinka syvälle hoito halutaan kohdistaa. Sekä energian määrää että taajuutta säädetään käsiosan näppäimistä. Tämä tekee käsiosan käytöstä hyvin yksikertaista, helppoa ja nopeaa. Käsiosan näyttö näyttää tuotetun energian ja käytettävän taajuuden lisäksi iskujen määrän.



### 17645 Storz Duolith SD1 T-Top Ultra VET

Tämä laite on tarkoitettu eläinten hoitamiseen.



497730

### 497730 Kosketusnäyttö

Täydennä Duolith SD1 T-Top Ultra 10 tuuman kosketusnäytöllä ja siihen kuuluvalla telineellä.





#### 499000 Storz Magnetolith

Magnetolith on erittäin mielenkiintoinen uutuus Storz Medicalilta. Extracorporeal Magnetotransduction Therapy (EMTT) on yksi tulevaisuuden hoitomuoto, johon Storz on valmistanut Magnetolith-laitteen uusimmalla teknologialla ja palkitulla muotoilulla.

Magneettiterapia avaa uusia mahdollisuuksia kehon uusiutumiseen ja kuntoutukseen ennen kaikkea kroonisissa vaivoissa. Hyviä tuloksia on saatu mm. nivelten, jänteiden ja lihasten hoidossa. Laitetta on erittäin helppo käyttää ja hoito voidaan antaa ilman potilaan riisuuntumista. Korkeataajuinen magneettikenttä 100-300 kHz. Integroitu LCD-näyttö, josta näkee on tason, taajuuden ja pulssien lukumäärän asetukset. Laitepöytä, vetokahva ja 4 lukittavaa pyörää sisältyy kuten myös säädettävä jalusta käsiosan ripustamiseen sisältyy. Käsiosaa voi käyttää myös manuaalisesti dynaamista hoitoa varten.



## ITO Sähkö- ja ultraäänilaitteet

Japanilainen valmistaja ITO perustettiin ja 1916 ja on pitkän kokemuksensa aikana tuonut laitteensa esiin maailmanlaajuisesti. ITO:n logo on ollut varma merkki tuotteen korkeasta laadusta kaikissa yksityiskohdissa. ITO:n uusi laitemallisarja kuuluu huippuluokkaan ja se on voittanut kansainvälisiä suunnittelupalkintoja. Kaikki laitteet ovat CE-merkittyjä lääkitäiläitedirektiivin mukaan.



5EU-921, 5SU-520



5ES-5200, 5SU-520

## Sähkö- ja yhdistelmälaitteet

### 5EU-921 ITO Yhdistelmälaite EU-921

Japanilaisen ITO:n valmistama huippuluokkainen yhdistelmälaite, joka sisältää kaikki sähkö- ja ultraäänilaitteen tarvittavat hoitomuodot. Selkeä ja iso LCD-värinäyttö yksinkertaistaa ja nopeuttaa ohjelmointia. Ihmiskehon muotoisesta kaaviosta voi helposti valita hoidettavan alueen. Laitteeseen on ohjelmoitu valmiiksi 47 erilaista hoitoaluetta, ja 30 erilaista hoitomuotoa, joten oikeat asetukset on helppo valita. Ultraäänianturi, kaapelit ja elektrodit sisältyvät hintaan. Voidaan yhdistää alipaineyksikköön SU-52.

### 5ES-5200 ITO Sähköhoitolaite ES-5200

Laadukas sähkölaite japanilaiselta ITO:lta. Laitteessa on kaikki tarvittavat sähköhoitomuodot! Selkeä ja iso värillinen LCD-kosketusnäyttö yksinkertaistaa ja nopeuttaa ohjelmointia. Ihmiskehon muotoisesta kaaviosta voit helposti valita hoidettavan alueen. Laitteeseen on ohjelmoitu valmiiksi 28 erilaista hoitoaluetta, ja 20 erilaista hoitomuotoa, joten oikea sähkövirta on helppo valita. Laitteeseen on mahdollista tallentaa 120 erilaista hoito-ohjelmaa ja tallentaa yksilöllisiä ohjelmia. Mukana kaapelit ja elektrodit.

## Laitepöydät



340101

### 340101 Teräksinen laitepöytä, laatikolla

Kaksi teräksistä hyllylevyä. Tässä mallissa ylimmän hyllyn alla on kaksi muovista vetolaatikkoa, joiden koko 34 x 37 cm. Neljä pyörää. Korkeus 80 cm, leveys 60 cm ja syvyys 40.

## Terapeuttinen ultraääni



5US-751, 5PR-751S

### 5US-751 ITO US-751 Terapeuttinen uä-laite 5PR-751S ultraäänianturi, pieni

Japanilaisen ITO:n huippulaadukas ultraäänilaite, jossa kaksi vaihtoehtoista käsittelytaajuutta (1MHz tai 3MHz samalla anturilla). Värillinen kosketusnäyttö helppokäyttöisellä valikolla. Valittavana 8 eri kieltä. 42 erilaista hoito-ohjelmaa ohjelmoitu valmiiksi, joista on helppo valita sopiva ihmiskehon mallisesta valikosta. 6 erilaista pulsoitua vaihtoehtoa tai jatkuva teho. Automaattinen kontaktitoiminto. Ergonomisesti suunniteltu kahvan pää, jonka BNR-arvo on hyvin alhainen: 2,4-3,0. Hoitoa voidaan antaa myös vedessä. Pieni ultraäänianturi pienille alueille. Molempia antureita voidaan tarvittaessa käyttää samanaikaisesti.

## Ultraäänigeelit

**5291** Ultraäänigeeli, pullo 260 ml, vaaleansininen

**5002** Ultraäänigeeli 12 pulloa x 260 ml, vaaleansininen

**5030** Ultraäänigeeli 2,8 l, väritön

**5024** Ultraäänigeelin pumppu

Väritön ultraäänigeeli, joka sopii erinomaisesti mm. paineaaltohoito-, ultraääni- sekä elektrodikäsittelyyn. Geeli on korkealaatuista, eikä siinä ole ilmakuplia tai öljyä.

**449-1** Ultraäänigeeli Bluescan, 1 litra, vaaleansininen geeli

**449-12** Ultraäänigeeli Bluescan, 12x1litra

Tätä ultraäänigeeliä voidaan käyttää sekä iskuaalto-, ultraääni- ja elektrodihoidossa. Sen viskositeetti on erittäin korkea, minkä vuoksi se ei valu, roisku tai tipu.

**5295** Ultraäänigeeli, pullo 260ml, väritön

**5295-12** Ultraäänigeeli 2 pulloa x 260 ml, väritön

Korkealuokkainen ultraäänigeeli, jossa ei ole ilmakuplia. Sopii kaikkiin ultraäänilaitteisiin ja elektrodeihin.



5291



5030



5024



449-1



5295

## Tens/Tems-laitteet



### 27004 Tens/Tems-laite Promed EMT-6

Promed EMT-6 Tens/Tems on edullinen sekä helpokäyttöinen kaksikanavainen yhdistelmälaite. Siinä yhdistyvät kivunhoito sekä lihasstimulaatio samassa laitteessa. Promed EMT-6 Tens/Tems -laitteessa on 11 esiasetettua ohjelmaa, sekä 4 käyttäjäohjelmaa joihin voi itse valita asetukset. Promed EMT-6 Tens/Tems laitteessa on muisti- ja lukitustoiminnot. Laite toimitetaan kantolaukussa, joka sisältää kaapelit, itsekiinnittyvät elektrodit sekä patterin.

## Itsekiinnittyvät elektrodit



**879100** Elektrodi, pyöreä, 3,2 cm, 4 kpl/pkt

**879200** Elektrodi, pyöreä, 5 cm, 4 kpl/pkt

**879300** Elektrodi, pyöreä, 7 cm, 4 kpl/pkt

**895220** Elektrodi, 5 x 5 cm, 4 kpl/pkt

**895240** Elektrodi, 5 x 9 cm, 4 kpl/pkt

Erittäin korkealaatuiset itsekiinnittyvät elektrodit. Elektrodeilla on erittäin hyvä tarttuvuus ja niitä voidaan käyttää useissa hoitokerroissa, jos säilytetään asianmukaisesti. Sopii kaikkiin erilaisiin 2 mm liittimellä. Lateksiton. 4 kpl / pakkaus.

## Elektrodit kumiset



**579966** Elektrodi, 4 x 6 cm

**579967** Elektrodi, 6 x 8 cm

**579968** Elektrodi, 8 x 12 cm

**579969** Wettex-suojus, elektrodille 4 x 6 cm

**579970** Wettex-suojus, elektrodille 6 x 8 cm

**579971** Wettex-suojus, elektrodille 8 x 12 cm

Silikonipohjaiset hiilikumielektrodit, jotka sopivat kaikkiin kaapeleihin 2mm liittimillä.

# Akupunktio

Hegu on Skandinavian johtava akupunktioneulojen toimittaja, joka on perustamisestaan vuodesta 1993 alkaen tuottanut steriilejä neuloja omalla tavamerkillä. Neulat valmistetaan Kiinassa ja Japanissa, ja ne ovat CE-merkittyjä terveydenhuollon tarvikkeita. Olemme mukana neulan suunnittelusta aina käyttäjälle asti, joten asiakkaamme tietävät mitä saavat – laatua ja turvallisuutta. Me tarjoamme myös muiden huolella valittujen toimittajien akupunktio-neuloja.

## HEGU

Nordic  
Acupuncture



## HEGU Classic -akupunktioneulat

HEGU Classic -akupunktioneula on valmistettu korkealaatuisesta japanilaisesta kirurgisesta ruostumattomasta teräksestä. Neula on valmistettu perinteisellä kiinalaisella tavalla, jossa kädensija tekee silmukan. HEGU Classic -neuloissa kädensija on tämän tyyppisiä tavallisia akupunktioneuloja paksumpi, mikä helpottaa käsittelyä. Tämä tekee HEGU Classicista erityisen sopivan perinteiseen kiinalaiseen akupunktiohoitoon. Kädensija on hopeoitu, jolla saadaan aikaiseksi korkea sähkönjohtavuus, ja estetään hapettuminen. Steriloitu etyleenioksidikaasulla, 3 vuoden steriliteetti.

**1-pack / yksittäispakattu neula ilman ohjausputkea. 100 neulaa/rasia**

**1-pack / yksittäispakattu neula ohjausputken kanssa. 100 neulaa/rasia**

**5-pack / 5 neulaa samassa paketissa ilman ohjausputkea. 500 neulaa/rasia (100kpl x 5-pack)**



**STD07020** Classic 0,20 x 7 mm  
**STD13020** Classic 0,20 x 13 mm  
**STD15020** Classic 0,20 x 15 mm  
**STD15025** Classic 0,25 x 15 mm  
**STD25025** Classic 0,25 x 25 mm  
**STD25030** Classic 0,30 x 25 mm  
**STD30025** Classic 0,25 x 30 mm  
**STD30030** Classic 0,30 x 30 mm  
**STD30032** Classic 0,32 x 30 mm  
**STD40025** Classic 0,25 x 40 mm  
**STD40030** Classic 0,30 x 40 mm  
**STD50030** Classic 0,30 x 50 mm  
**STD50040** Classic 0,40 x 50 mm  
**STD75030** Classic 0,30 x 75 mm  
**STD75040** Classic 0,40 x 75 mm  
**STD125040** Classic 0,40 x 125 mm

**STD15020H** Classic 0,20 x 15 mm  
**STD25025H** Classic 0,25 x 25 mm  
**STD30025H** Classic 0,25 x 30 mm  
**STD30030H** Classic 0,30x 30 mm  
**STD40025H** Classic 0,25 x 40 mm  
**STD40030H** Classic 0,30x 40 mm  
**STD50030H** Classic 0,30x 50 mm  
**STD50035H** Classic 0,35x 50 mm  
**STD70030H** Classic 0,30x 70 mm  
**STD75030H** Classic 0,30x 75 mm  
**STD75032H** Classic 0,32x 75 mm  
**STD75040H** Classic 0,40x 75 mm  
**STD90035H** Classic 0,35x 90 mm

**STD13020-5** Classic 0,20 x 13 mm  
**STD15020-5** Classic 0,20 x 15 mm  
**STD15025-5** Classic 0,25 x 15 mm  
**STD25025-5** Classic 0,25 x 25 mm  
**STD30025-5** Classic 0,25 x 30 mm  
**STD30030-5** Classic 0,30 x 30 mm  
**STD30032-5** Classic 0,32 x 30 mm



Lisää tietoa HEGUsta ja neuloista löytyy osoitteesta [www.nordicacupuncture.com](http://www.nordicacupuncture.com)

## HEGU Classic Gold -akupunktioneula

Klassinen kiinalainen akupunktioneula, kultapäälysteinen. Voidaan käyttää nikkeliallergiaa epäiltäessä. Valmistettu ruostumattomasta kirurgisesta jousiteräksestä. Steriloitu etyleenioksidikaasulla, 3 vuoden steriliteetti.

**1-pack, yksittäispakattu ilman ohjausputkea. 100 neulaa/rasia**

**STD30030G** Classic Gold 0,30 x 30mm



## HEGU Xeno -akupunktioneulat

HEGU Xeno -akupunktioneula on kunnianhimoisen tuotekehitysprojektin tulos. Tämä ainutlaatuinen neula on valmistettu korealaiseen tyyliin jousimaisella kädensijalla ilman silmukkaa. HEGU Xenon kiedottu kädensija on valmistettu ruostumattomasta teräslangasta, mikä tekee siitä kovemman ja tukevamman neulan, mitä varsinkin länsimaiset akupunktioterapeutit arvostavat. Ergonominen kädensija mahdollistaa erinomaisen otteen, maksimaalisen tarkkuuden ja ohjattavuuden sekä se johtaa hyvin sähköä. HEGU Xeno -neulat on valmistettu poikkeuksellisen laadukkaasta japanilaisesta kirurgisesta ruostumattomasta teräksestä. 3 vuoden sterilitteetti.



**1-pack / yksittäispakattu neula ilman ohjausputkea. 100 neulaa/rasia**



**XEN15020** Xeno 0,20 x 15 mm  
**XEN15025** Xeno 0,25 x 15 mm  
**XEN15030** Xeno 0,30 x 15 mm  
**XEN25020** Xeno 0,20 x 25 mm  
**XEN25025** Xeno 0,25 x 25 mm  
**XEN25030** Xeno 0,30 x 25 mm  
**XEN30016** Xeno 0,16 x 30 mm  
**XEN30025** Xeno 0,25 x 30 mm  
**XEN30030** Xeno 0,30 x 30 mm  
**XEN30032** Xeno 0,32 x 30 mm  
**XEN40025** Xeno 0,25 x 40 mm  
**XEN40030** Xeno 0,30 x 40 mm  
**XEN50030** Xeno 0,30 x 50 mm  
**XEN50035** Xeno 0,35 x 50 mm

**1-pack / yksittäispakattu neula ilman ohjausputkea. 100 neulaa/rasia**



**XEN15020H** Xeno 0,20 x 15 mm  
**XEN25025H** Xeno 0,25 x 25 mm  
**XEN30025H** Xeno 0,30 x 25 mm  
**XEN30030H** Xeno 0,30 x 30 mm  
**XEN40030H** Xeno 0,30 x 40 mm  
**XEN50030H** Xeno 0,30 x 50 mm  
**XEN50035H** Xeno 0,35 x 50 mm  
**XEN70030H** Xeno 0,30 x 70 mm  
**XEN75035H** Xeno 0,35 x 75 mm

**5-pack / 5 neulaa samassa paketissa ilman ohjausputkea. 500 neulaa/rasia (100kpl x 5-pack)**



**XEN15020-5** Xeno 0,20 x 15 mm  
**XEN15025-5** Xeno 0,25 x 15 mm  
**XEN25025-5** Xeno 0,25 x 25 mm  
**XEN25030-5** Xeno 0,30 x 25 mm  
**XEN30025-5** Xeno 0,25 x 30 mm  
**XEN30030-5** Xeno 0,30 x 30 mm  
**XEN40030-5** Xeno 0,30 x 40 mm  
**XEN50030-5** Xeno 0,30 x 50 mm

## HEGU Onex -akupunktioneulat

HEGU Onex lanseerattiin 20-vuotisjuhlamme kunniaksi vuonna 2013. Onex on laadukas akupunktioneula, joka on valmistettu japanilaisesta kirurgisesta ruostumattomasta teräksestä. Onex-neula luokitellaan korealaiseksi akupunktio-neulaksi, jolla on myös erinomainen lämmön ja sähkön johtavuus. HEGU Onex -akupunktioneulassa on ainutlaatuisen terävä timanttileikattu kärki, jolla saavutetaan erittäin suuri tarkkuus. Neulan kärjen muoto, erittäin ohut kerros lääketieteellistä silikonia neulassa ja vakaa kädensija mahdollistavat parhaan mahdollisen lopputuloksen. 3 vuoden sterilitteetti.



**1-pack / yksittäispakattu neula ilman ohjausputkea. 100 neulaa/rasia**



**ONX15020** Onex 0,20 x 15 mm  
**ONX15025** Onex 0,25 x 15 mm  
**ONX15030** Onex 0,30 x 15 mm  
**ONX25020** Onex 0,20 x 25 mm  
**ONX25025** Onex 0,25 x 25 mm  
**ONX25030** Onex 0,30 x 25 mm  
**ONX30016** Onex 0,16 x 30 mm

**1-pack / yksittäispakattu neula ohjausputken kanssa. 100 neulaa/rasia**



**ONX30016H** Onex 0,16 x 30 mm  
**ONX30025H** Onex 0,30 x 25 mm  
**ONX30030H** Onex 0,30 x 30 mm  
**ONX50030H** Onex 0,30 x 50 mm  
**ONX75040H** Onex 0,40 x 75 mm

**5-pack / 5 neulaa samassa paketissa ilman ohjausputkea. 500 neulaa/rasia (100kpl x 5-pack)**



**ONX15020-5** Onex 0,20 x 15 mm  
**ONX25025-5** Onex 0,25 x 25 mm  
**ONX30025-5** Onex 0,25 x 30 mm  
**ONX30030-5** Onex 0,30 x 30 mm  
**ONX40025-5** Onex 0,25 x 40 mm

## HEGU Pura -akupunktioneulat

HEGU Pura -akupunktioneulat kuuluvat hienoimpiin japanilaisiin neulatyyppeihin, jotka tunnetaan hyvistä hoitotuloksista. Pura-neuloissa on muoviset kädensijat, joiden väri vaihtelee neulan halkaisijan mukaan. Pitkä, jämäkkä ja ergonomisesti muotoiltu kädensija tekee HEGU Pura -neulasta erittäin käyttäjäystävällisen ja sillä on helppo työskennellä. Itse neula on valmistettu erityisestä japanilaisesta ruostumattomasta teräksestä. Kartio-mainen neulan kärki on mikrohiottu ja DDS-pinnoitettu. 3 vuoden steriilitteetti.



**1-pack / yksittäispakattu neula ilman ohjausputkea. 100 neulaa/rasia**

**1-pack / yksittäispakattu neula ilman ohjausputkea. 100 neulaa/rasia**

**5-pack / 5 neulaa samassa paketissa ilman ohjausputkea. 500 neulaa/rasia (100kpl x 5-pack)**



**HEG15020P** Pura 0,20 x 15 mm  
**HEG30025P** Pura 0,25 x 30 mm  
**HEG30030P** Pura 0,30 x 30 mm  
**HEG50030P** Pura 0,30 x 50 mm


**HEG15020PH** Pura 0,20 x 15 mm  
**HEG30025PH** Pura 0,25 x 30 mm  
**HEG50030PH** Pura 0,30 x 50 mm  
**HEG50035PH** Pura 0,35 x 50 mm

**HEG25025P-5** Pura 0,25 x 25 mm  
**HEG30030P-5** Pura 0,30 x 30 mm

## HEGU Dry Needle (kuivaneulaus)

HEGU Dry Needle -akupunktioneula ja sen sisältämät materiaalit on suunniteltu erityisesti Dry Needling eli kuivaneulonta -hoitoihin. Neulan kärjen muoto, erittäin ohut kerros lääketieteellistä silikonia neulassa ja vakaa kädensija mahdollistavat parhaan mahdollisen lopputuloksen. Dry Needling -akupunktioterapeutit kertovat saavansa hyvän kosketusvasteen HEGU Dry Needle -akupunktioneulasta, ja että se läpäisee myös "tiukat lihassolmut" helpommin, jolloin myös hoitotulokset ja asiakkaan tyytyväisyys ovat parempia. 3 vuoden steriilitteetti valmistuspäivästä.

**1-pack / yksittäispakattu neula ohjausputken kanssa. 100 neulaa/rasia**

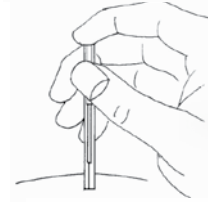

**DNH30030H** Dry Needle 0,30 x 30 mm  
**DNH40030H** Dry Needle 0,30 x 40 mm  
**DNH50030H** Dry Needle 0,30 x 50 mm  
**DNH60030H** Dry Needle 0,30 x 60 mm  
**DNH75040H** Dry Needle 0,40 x 75 mm



Kuivaneulaus ja akupunktio ovat kaksi erilaista hoitomenetelmää, jotka vaativat oman koulutuksensa ja osaamisensa.

## Akupunktionuket ja -mallit

Anatomiset mallit pehmeästä vinyylimuovista jalustalevyllä. Akupunktiopisteet ja meridiaanit on merkitty selvästi.

**KVINNA-47** Akupunktiomalli - Nainen 47cm, pehmeä  
**MAN-50** Akupunktiomalli - Mies 47cm, pehmeä

KVINNA-47



MAN-50

## Seirin akupunktioneulat

Seirin on tunnettu korkealaatuinen japanilainen akupunktioneulavalmistaja. Neulat on konehiottu, kiillotettu ja ne on valmistettu kirurgisesta jousiteräksestä. Seirinin neuloilla on 4 vuoden steriilitteetti valmistuspäivästä. Neulojen kärjessä on erittäin ohut silikonipäälyste.



SER15020B



SER30030B



SER30025JH

**B / D-tyyppi: 1-pack / yksittäispakattu neula ilman ohjausputkea. 100 neulaa/rasia**

- SER15020B** Seirin 0.20 x 15 mm, sininen
- SER30030B** Seirin 0.30 x 30 mm, beige
- SER40025B** Seirin 0.25 x 40 mm, lila
- SER50030B** Seirin 0.30 x 50 mm, beige
- SER50035B** Seirin 0.35 x 50 mm, musta
- SER15025D** Seirin 0.25 x 15 mm, lila

**J-tyyppi: 1-pack / yksittäispakattu neula ohjausputken kanssa. 100 neulaa/rasia**

- SER30016JH** Seirin 0.16 x 30 mm, punainen
- SER30025JH** Seirin 0.25 x 30 mm, lila
- SER30030JH** Seirin 0.30 x 30 mm, beige
- SER40025JH** Seirin 0.25 x 40 mm, lila
- SER50030JH** Seirin 0.30 x 50 mm, beige
- SER60030JH** Seirin 0.30 x 60 mm, beige

## Jäteneulapurkit

Käytetyt akupunktioneulat luokitellaan tartuntavaaralliseksi jätteeksi, ja niitä on käsiteltävä huolella pistovahinkojen ja tartuntojen välttämiseksi. Neulat tulee siksi säilyttää iskunkestävissä purkeissa. Neuloja voi säilyttää purkeissa enintään 1 vuoden ajan. Purkkien myöhempää käsittelyä koskevat säännöt voivat vaihdella kunnittain.

**RISK-0,5L** Jäteneulapurkki 0,5 litraa


**RISK-1,5L** Jäteneulapurkki 1,5 litraa



## Akupunktiojulisteet

**71820** Akupunktiojuliste

Akupunktiojuliste johon on merkitty kaikki kehon akupisteet. Molemminpuolinen laminointi ja metallilenkki ripustusta varten. 98 x 68 cm.

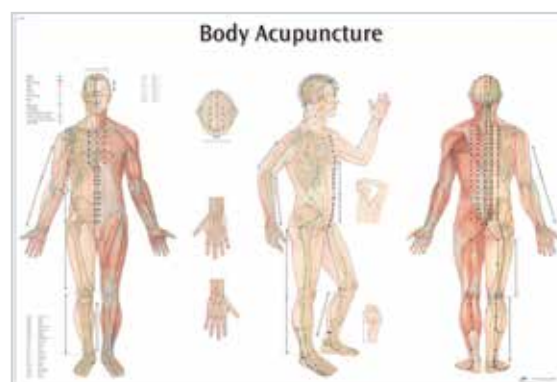

71820



## Korva-akupunktio

### STD-PRESS Hegu Classic akupunktionasta, 0,22 x 1,3 mm

Hegu Standard akupunktionasta tai painoneula on kiinalainen neula, jota käytetään pitkäaikaisissa, tavallisesti urheiluun ja riippuvuuksiin liittyvissä akupunktioidoissa. Akupunktionastaa käytetään useimmiten hoidettaessa korvaa, mutta sitä voidaan käyttää myös muihin kehon pisteisiin.

Akupunktionastat ovat kiinni ihonvärisessä laastarissa ja ne voidaan jättää paikoilleen useiksi päiviksi ilman että potilas kokee ne epämiellyttäväksi. Yhteen laastariin on pakattu steriilisti 10 akupunktionastaa, ja yhdessä rasiassa on yhteensä 100 nastaa (10 laastaria). Säilyvyys 3 vuotta valmistuspäivästä alkaen.



**SEIRIN®**



### Seirin akupunktionasta

Seirin Pyonex -nastan valmistaja Seirin on maailman ehdotonta kärkeä kivuttomaan hoitoon tarkoitettujen neulojen valmistajana. Pyonex akupunktionastat sopivat sekä korvien että kehon akupunktioon, ja niitä on saatavilla useilla värikoodatuilla pituuksilla. Hoidon vaikutusta on mahdollista pitkittää, sillä nastaa voidaan pitää paikoillaan jopa 48 tuntia. Potilas voi itse hieroa neulaa sen ollessa paikoillaan.

Laadukas laastari pysyy paikallaan pitkäaikaisessakin hoidossa. Yhteen laastariin on pakattu steriilisti 10 akupunktionastaa, ja yhdessä rasiassa on yhteensä 100 nastaa (10 laastaria). Säilyvyys 3 vuotta valmistuspäivästä alkaen.

**PY00.6020** 0,15 x 0,6 mm

**PY00.9020** 0,17 x 0,9 mm

**PY01.2020** 0,20 x 1,2 mm

**PY01.5020** 0,20 x 1,5 mm



Akupunktionastoja voidaan käyttää vaihtoehtona perinteiseen korvan akupunktioon.

## Akupunktiostimulaattorit

### ASSUPER Akupunktiostimulaattori AS Super 4 Digital

Schwa Medico AS Super 4 Digital sisältää 30 valmista ja 7 ohjelmoitavissa olevaa ohjelmaa. Laite sisältää myös modernin kivunhoidon mukaisen HAN-stimulaatio-ohjelman. Sähköstimulaattorissa on palovammoilta suojaava AKS-ihonsuojausjärjestelmä. AS Super 4 Digitalissa on 4 kanavaa jopa 8 akupunktioneulan samanaikaiseen stimulaatioon. Voimakkuus voidaan säätää erikseen jokaiselle kanavalle. Voimakkuutta säädetään asteittain 0,1 MA verran, millä varmistetaan akupunktiohoidon turvallisuus. Sähköstimulaattoria voidaan käyttää joko paristolla tai verkkovirralla. Myyntipakkaukseen kuuluu 4 eriväristä kaapeliparia puristimiseen, adapteri verkkovirtaa varten sekä 4 paristoa.



ASSUPER



5ES-130

### 5ES-130 Akupunktiostimulaattori ITO ES-130

Erittäin tunnetun japanilaisen ITO:n kompakti, kevyt ja laadukas akupunktiostimulaattori. Kolme kanavaa, joilla voi stimuloida samanaikaisesti enintään kuutta neulaa. Kolmen ulostulon taajuuksia voidaan säätää toisistaan riippumatta. Low/High-painike matalalle tai korkealle intensiteetille. Paristokäyttöinen 9V paristolla. Toimitetaan käyttövalmiina kaapeleiden, suojakotelon ja vyöpidikkeen kanssa.

### 5ES-160 Akupunktiostimulaattori ITO ES-160, 6-kanavainen

Suosittu japanilaisvalmisteinen sähköakupunktiolaite, jossa on 6 kanavaa jopa 12 neulan samanaikaiseen stimulointiin. 8 erilaista stimulointiohjelmaa: Jatkuva, Burst (matalataajainen), Surge (4/6 s), Fast+Slow, Sweep, Random-ohjelma 1-3. Viimeksi käytetty ohjelma ja 16 tallennettavissa olevaa omaa ohjelmaa. Mukana herkkä ja tarkka akupunktioetsin, jonka avulla voidaan stimuloida sekä mitata ja käsitellä tasavirtaa käyttäen (ns. Ryodoraku-menetelmä). Paristokäyttöinen 6V paristolla. Toimitetaan käyttövalmiina kaapeleiden ja etsimen kanssa.



5ES-160

# Hieronta, lämpö- ja kylmähoito

Tässä luvussa esittelemme hierontaan liittyvän laajan tuotevalikoiman. Mukana mm. hierontaöljyt, suojapaperit, lämpö- ja kylmähoitotuotteet. Näitä tuotteita voidaan käyttää niin hyvinvoinnin edistämiseen, vammojen ennaltaehkäisyyn kuin kuntoutukseenkin.

## Hierontapöydät



Valikoimassamme on monia erilaisia hierontapöytämalleja, sekä kannettavia että isompia tukevia hoitopöytiä, jotka sopivat erinomaisesti hierontaan ja fysioterapiaan. Kaikki mallit löydät kappaleesta "Hoitopöydät"

## Hierontatuotteet

### 27201 Hierontaristi, puinen

Aasialainen puinen hierontaristi kaikkeen käsittelyyn, jossa halutaan vaikuttaa syvällä oleviin kudoksiin tai triggerpisteisiin. Koko: 10 x 11 cm.



27201

### 12010 Hierontarulla Thera-Band

Käytännöllinen hierontarulla, joka on helppo käyttää kehon lihasten hierontaan, kotona ja klinikalla. Sisältää harjoitusohjeet. Lateksiton. Pituus 53 cm.



12010



## Hierontarullat ja -pallot



- 400048** Blackroll Foam Roller, 30x15 cm
- 410030** Blackroll Mini, jalkarulla, 15x5 cm
- 410010** Blackroll Boll, 8 cm
- 410020** Blackroll Boll, 12 cm
- 410040** Blackroll Set, 4 kpl (rullat ja pallot)
- 410050** Blackroll Duoboll, 16x8 cm

Kova kaksoispallo lihasten ja pehmytosten hierontaan, nk. SMR-hieronta (Self-Myofascial Release massage). Sopii erinomaisesti rintarangan, niskan ja selän hierontaan ja voidaan käyttää lattiaa tai seinää vasten. Materiaali on lujatekoista ja helppo puhdistaa. Tuote on ihoystävällinen, hajuton sekä 100% kierrätettävä. 16 x 8 x 8 cm



## Faskiavaha

### 12213 Lojer Fasciavaha, 150 ml

Lojer Faskiavaha on täysin luonnollisista aineista valmistettu vaha manuaaliseen terapiaan ja hierontaan. Vaha sisältää kamomillaa ja aloe veraa, valmistuksessa ei ole käytetty keinotekoisia aineita. Valmistusmaa Suomi.



## Ekologiset hierontaöljyt



- 12401** Hierontaöljy Eco neutral
- 12402** Hierontaöljy Eco Ylang Ylang
- 12403** Hierontaöljy Eco Chili
- 12400** Hierontaöljy Eco, 3-pack

Ekologiset hierontaöljyt koostuvat luonnollisista öljyistä eivätkä sisällä synteettisiä lisäaineita, väriaineita, hajusteita tai säilöntäaineita. Neutral on hajusteeton ja on erinomainen perusöljy. Ylang-Ylang tuoksuu kukille ja sillä on rauhoittava ja rentouttava vaikutus. Chili antaa lämpenemisen ja rentouttavan tunteen. Hierontaöljyt toimitetaan 500 ml pumppupulloissa.

## Hierontaöljyt



- 12200-1 Garnatioöljy, 1 litra**  
**12200-5 Garnatioöljy, 5 litraa**

Ohut parafiinipohjainen perusöljy, joka soveltuu parhaiten ei karvaiselle iholle.

- 12300 Inert, 1 litra**  
**12301-5 Inert, 5 litraa**

Turvallinen, allergisoimaton synteettinen hierontaöljy, joka ei herkistä eikä ärsytä ihoa.

- 12202-1 Maapähkinäöljy, 1 litra**  
**12202-5 Maapähkinäöljy, 5 litraa**

Luonnon maapähkinäöljy E-vitamiinilla, joka sopii erinomaisesti kuivan ja karvaisen ihon hierontaan.

- 12203-1 Massnutöljy, 1 litra**  
**12203-5 Massnutöljy, 5 litraa**

Garnaatio- ja maapähkinäöljyn sekoitus E-vitamiinilla.

- 12212-1 Manteliöljy, 1 litra**  
**12212-5 Manteliöljy, 5 litraa**

Paksuhko ja hienojakoinen luonnonöljy E-vitamiinilla, joka soveltuu kuivan ja karvaisen ihon hierontaan.

- 12217 Appelsiiniöljy, 1 litra**  
**12217-5 Appelsiiniöljy, 5 litraa**

Auringonkukka- ja garnaatioöljyn seos E-vitamiinilla, johon on lisätty appelsiinieteerinen öljy.

## Pumput

- 14101 Pumppu 1 litran pulloon**  
**14100 Pumppu 5 litran muoviasastiaa**

## Hierontavoiteet

- 12214 Rub In, 1 litra**  
**12215 Rub In, 5 litraa**

Ohuehko voidemainen, ihoa hoitava ja ravitseva, tahraamaton B-vitamiininen hierontavoide. Miellyttävä iholle ja helposti poistettava. Soveltuu kuivan ja karvaisen ihon hierontaan.

- 12206 Lojer Finn-Green, 1 litra**  
**12206-5 Lojer Finn-Green, 5 litraa**

Tuoksuton kasviöljypohjainen, turvallinen ja erittäin ihoystävällinen vaihtoehto, niin hierojalle kuin hierottavalle. Sisältää ihoa hoitavia aineita, kuten Aloe veraa, Allantonia, Kamomillaa ja on käytössä taloudellinen.

- 12204 Herbacur, 1 litra**  
**12207 Herbacur, 5 litraa**

Paksuhko, kookosvoidepohjainen, hajustamaton ja vesiliukoinen voide erityisesti karvaisen ihoalueen hierontaan.

- 12216 Lavendel, 1 litra**

Paksuhko parafiinipohjainen hierontavoide, johon lisätty laventelieteerinen öljy. Sopii erityisesti karvaisen ihoalueen hierontaan.

- 12218 Prolive, 1 litra**  
**12218-5 Prolive, 5 litraa**

Hajuton oliiviöljypohjainen kuivalle iholle soveltuva hierontavoide.



14101



14100

## Hierontalaite

### 31506 Värihieronta, Vibramat

Voimakas hierontalaite kahdella eri nopeudella, 1400 ja 2800 värähdystä/min. klinikka- ja kotikäyttöön. Suuri käsittelypinta-ala. Täydellinen toimitus kahdella sovittimella, toinen sileää kumia ja toinen muovinastoin. Kantolaukku sisältyy. Paino 3,2 kg.



31506

## Lämmityslaitteet

### 1222108 Lämmityslaite E 1, pöytämalli

Valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Termostaattiohjattu 71–74°C välillä. Toimitetaan ritilällä ja 4 vakiopakkauksella. Ulkomitat: Leveys 33 cm, syvyys 20 cm, korkeus 41 cm. Paino 7 kg.



1222108

### 1222808 Lämmityslaite E2, pöytämalli

Valmistettu ruostumattomasta teräksestä lasikuitueristyksellä. Termostaattiohjattu 71–74°C välillä. Toimitetaan täydellisenä ritilällä, poistoletkulla, 12 vakiopakkauksella. Ulkomitat: Leveys 67 cm, syvyys 41 cm, korkeus 84 cm. Sisämitat: Leveys 51 cm, syvyys 31 cm, korkeus 46 cm. Paino 13 kg.



1222808

### 1222408 Lämmityslaite M 2, lattiamalli pyörillä

Valmistettu ruostumattomasta teräksestä lasikuitueristyksellä. Termostaattiohjattu 71–74°C välillä. Toimitetaan täydellisenä ritilällä, poistoletkulla, 12 vakiopakkauksella. Ulkomitat: Leveys 67 cm, syvyys 41 cm, korkeus 84 cm. Sisämitat: Leveys 51 cm, syvyys 31 cm, korkeus 46 cm. Paino 22 kg.



1222408

## Geelilämpöpakkaukset

### 130321 Vakiomalli, 20 x 40 cm

### 130322 Selkämalli, 30 x 40 cm

### 130323 Niskamalli, 19 x 60 cm

Pakkauksien etu on niiden käytettävyys lämmityslaitteissa tai mikroaaltouunissa. Valmistettu muovista geelitäytteellä. Muotoiltava.



## Savilämpöpakkaukset



- 15103** Selkämalli, 25 x 61 cm  
**15102** Niskamalli, 13 x 61 cm  
**15104** Erikoissuuri, 38 x 61 cm  
**15100** Vakio, 25 x 30 cm

Antaa miellyttävän kostean lämmön noin 30 minuutin ajan. Pakkaukset ommeltu osioihin, jotka täytetty erikoissavella. Pakkaukset säilytetään lämmityslaitteessa noin 71° - 74° C vedessä. Aseta pakkaus aina potilaan päälle, älä päinvastoin.

## Parafiiniallas

### 29150 Therabath Parafiiniallas

Parafiinihoito tuottaa erittäin miellyttävää lämpöä, joka lievittää nivelkipuja ja pehmentää jäykkiä lihaksia, sekä pehmentää ja kosteuttaa ihoa. Therabath parafiiniamme on helppo liikutella, ja sopivan kokoinen käden, kyynärpään tai jalan kastamiseen.

- Parafiiniallas on soikea, ja siihen mahtuu noin 4 kg parafiinia.
- Termostaatti säätää lämpötilaa 52,2-56,7 asteen välillä.
- Suosittelemme myös ulkoisen lämpömittarin käyttöä oikean lämpötilan takaamiseksi.
- Uuden parafiinin sulamisaika on noin 6-8 tuntia.
- Sisältää 2,7 kg parafiinitäyttöpakkauksen.
- Valmistettu Yhdysvalloissa ja CE-merkitty lääketieteellisen direktiivin MDD 93/42/ETY luokan IIa mukaisesti.

29150



## Froteepäällinen



- 15110** Frotée, vakiopakkaukselle  
**15111** Frotée, erikoissuuri- ja selkähäpakkaukselle  
**15112** Frotée, niskapakkaukselle

Froteepäällinen tarranauhalla. Sopii savilämpöpakkauksiin.

## Parafiini

### 19017 Parafiini 6 x 0,5 kg pussi

### 19009 Parafiini, 4 kg harkkoina, (4 harkkoa á 1 kg)

### 19010 Parafiini, 16 kg (16 harkkoa á 1 kg)

Parafiinit käyvät kaikkiin parafiinialtasiin.

### 19130 Paraffin ParaPearls, 2,5 kg

ParaPearls on pieniksi helmiksi muotoiltua parafiinia. Helmiä on helppo annostella ja pienen kokonsa ansiosta ne myös sulavat nopeasti. Toimitetaan kätevässä uudelleen suljettavassa ämpäri-ässä. Sulamispiste on 52-54 astetta.

19017



19009



19130



## Kylmävoiteet

### 122101 Kylmävoide Cool-X, 150ml tuubi

### 12221 Kylmävoide Cool-X, 500 ml pumppu

Cool-X Kylmägeeli on nopea ja pitkävaikutteinen kylmähoito lihas- ja nivelkivuille. Geeli lievittää rasitus- ja urheiluvammoja sekä alentaa turvotusta. Lisäksi geeli laukaisee lihasjännitystä ja edistää lihasten palautumista rasituksesta. Ei tahraa eikä värjää.



122101



12221

## Kylmähoitotuotteet

### 181905 Cool-X Kylmäsuihke, 220 ml

Cool-X Kylmäspray on lihasten ja nivelten ensiapuun tarkoitettu lyhytvaikutteinen kylmähoito. Kylmäsuihke on nopea apu pehmytkudosvammojen, kuten venähdyksien, revähdyksien ja nyrjähdysten hoitoon. Kylmäspray lievittää tehokkaasti kipua sekä vähentää turvotuksen muodostumista.

### 181903 Quick Cold, kertakäyttöinen kylmäpussi, 24 kpl

Kertakäyttöiset kylmäpussit äkillisiin loukkaantumisiin. Antaa paikallisen kivun lievityksen tehokkaalla kylmäkäsittelyllä jopa 30 minuutin ajaksi. Tuote aktivoidaan painamalla pakkausta käsin. Pyyhe tai vastaava on asetettava käsiteltävän henkilön ihon ja kylmäpussin välille. Koko: 15 x 24 cm. 24 kpl/pakkaus.



181905



181903

## Kylmäpakkaukset

### 17015 Standard, 25 x 34 cm

### 17017 Puolikoko, 17 x 28 cm

Coldpackissa on geelitäyte, joka säilyttää muotoiltavuutensa myös jäädytettäessä. Antaa tehokkaan hoidon noin 30 minuutin ajan. Coldpackia voidaan käyttää uudelleen useita kertoja. Älä aseta pakkausta suoraan iholle, vaan käytä välikettä tai muuta suojaa ja aseta pakkaus aina käsiteltävän henkilön päälle eikä päinvastoin. Mustat pakkaukset ovat valmistettu polyuretaanista ja niissä ei ole pvc:tä ja lateksia.



17015



17017

## Nylatex-nauha

### 1221264-10 Nylatex-nauha, 6 x 61 cm

### 1221264 Nylatex-nauha, 6 x 61 cm, 3 kpl/pakkaus

### 1221206-10 Nylatex-nauha, 6 x 122 cm

### 1221206 Nylatex-nauha, 6 x 122 cm, 3 kpl/pakkaus

### 1221212-10 Nylatex-nauha, 10 x 122 cm

### 1221212 Nylatex-nauha, 10 x 122 cm, 3 kpl/pakkaus

Vaaleansininen, elastinen, tarrakiinnitteinen, nailonista ja luonnonkumista valmistettu nauha lämpö- ja kylmäpakkauksen sekä elektrodien ym. kiinnittämiseen. Pestävä.





# Terapiavälineet


Vastaanotolla oikeat välineet takaavat onnistuneen terapiahetken. Olemme tarkkaan valinneet toimittajamme, jotka valmistavat erittäin korkealaatuisia tuotteita. Voit valita mieleisesi tuotteet mm. tarjolla olevista matoista, itse valmistamistamme tyynyistä ja laajasta traktiovälinevalikoimastamme.



## Airex-matot

Matot on valmistettu erittäin laadukkaista materiaaleista, jotka pysyvät hyvännäköisinä vuosien käytöstä huolimatta. Patentoitussa materiaalissa on suljettu kennorakenne, joka tekee matosta vettähylkivän, mattoja voidaan käyttää jopa vedessä. Sanitized-käsittely estää homeetta, pitää matot hygieenisinä ja helposti puhdistettavina. Matot ovat liukumattomia ja ne voi rullata kasaan. Lateksittomia. Valmistettu Sveitsissä.


- 67309** Airex Fitness 120, 120x60x1,5 cm, sininen
- 67301** Airex Coronella 185, 185x60x1,5 cm, punainen
- 67304** Airex Coronella 200, 200x60x1,5 cm, antrasiitti
- 67302** Airex Corona 185, 185x100x1,5 cm, punainen
- 67305** Airex Corona 200, 200x100x1,5 cm, antrasiitti
- 67303** Airex Atlas, 200x125x1,5 cm, punainen

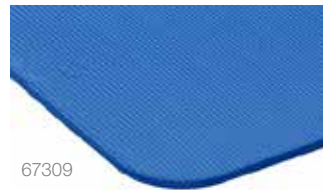

67309



67304

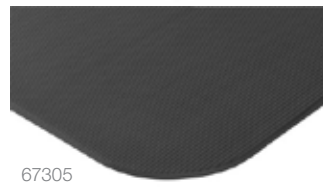


67305



67303



Isompiin tilauksiin saatavilla myös eri värejä!

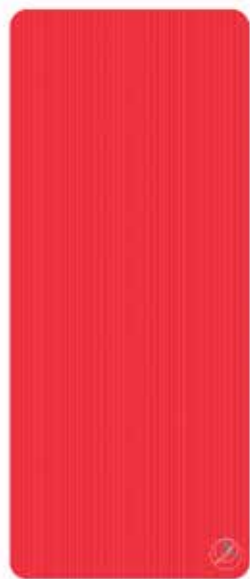

68006



68002



68002B

## Profigym-matot

- 68005** Profigym matto, 180x60x1,5 cm, punainen
- 68006** Profigym matto, 190x80x1,5 cm, punainen
- 68007** Profigym matto, 180x120x1,5 cm, punainen

Voimistelumatto on korkealaatuinen matto, jota voi käyttää venyttelymattona tai ryhmäliikuntatunneilla. Mattoa voi käyttää jopa vedessä ja sen pinta on helppo puhdistaa pyyhkimällä. Tuote ei sisällä lateksia tai PVC:tä.

- 68002** Venyttelymatto, harmaa
- 68002-10** Venyttelymatto, harmaa, 10 kpl
- 68002B** Venyttelymatto, musta

Korkealaatuinen lateksiton ja pvc-vapaa venyttelymatto, nihkeän pinnan ansiosta pysyy hyvin paikallaan voimistelun tai venyttelyn ajan. Kulmissa reiät, joista maton voi ripustaa seinätelineeseen. Voidaan käyttää myös vedessä ja on helppo pyyhkiä puhtaaksi. Koko: 140 x 60 x 1 cm. Matto ei sisällä pvc:tä eikä lateksia.

## Joogamatot

### 67325 Airex Yoga/Pilates 190, harmaa

Matto on Airexin ohuin (8mm), mutta se on myös pehmeä ja vaimentaa jalkoihin ja ranteisiin kohdistuvaa rasitusta. Airexin pilatesmatto on sekä kiinteämpi, joustamattomampi että liukumattomampi kuin muut Airexin matot. Koko: 190 x 60 x 0,8cm


### 6700030 Joogamatto, sininen

#### 6700030-10 Joogamatto, sininen, 10 kpl

Erinomainen joogamatto, joka nihkeän pinnan ansiosta pysyy hyvin paikalla voimistelun tai venyttelyn ajan. Matto on helppo kääriä kasaan tai ripustaa seinätelineeseen. Koko: 180 x 60 x 0,5.



67325

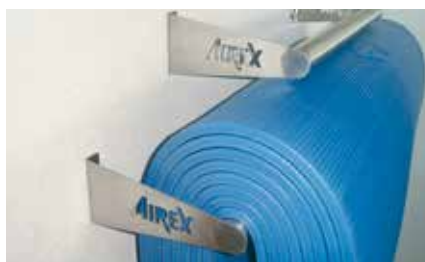

67317, 67318



6700030

## Mattojen säilytys


### 67317 Airex seinätanko, leveys 65 cm

### 67318 Airex seinätanko, leveys 105 cm

Tilaa 10:lle Airex-matolle. Syvyys 20 cm. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä.



8010

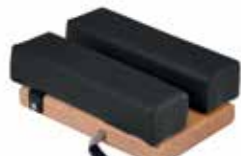

8020



25380



25382

## Niskatraktio

### 32962 Traktiokauluri, miesten koko, medium/large

Pidetty traktiokauluri, valmistettu pehmeästä vaahtomuovista, irrotettava ja pestävä päällinen. Kauluri tukee kaularankaa miellyttävästi ja veto voidaan säätää suoraan tai kulmaan pumppamalla kauluriin sopivasti ilmaa. Huolellisen tutkimuksen jälkeen tämä apuväline toimii hyvin vastaanotolla ja kotihoidossa. Suositellut kaulanympärysmittat naisille 34–42 cm ja miehille 37–46 cm.



32962

## Mobilisaatioapuvälineet

### 8010 Droppilevy, raajoille

#### 8020 Kannettava droppilevy, kaksiosainen

Droppilevy raajoille on sileäpintainen droppilevy, joka soveltuu erinomaisesti olkapäiden, kyynärpäiden, polvien, nilkkojen ja jalkaterien hoitoon. Droppilevyn kehittäjä on Dr. Thuli ja siinä on suora pudotus ja jännitteensäätönappi. Pudotuskorkeus 8,4 mm. Mitat: 20x15x6 cm (PxLxK). Lumbo-pelvic kannettava droppilevy soveltuu erinomaisesti etenkin lantion, lanne- ja selkärangan hoitoon. Siinä on kahvat molemmilla puolilla ja jännitteensäätönappi toisella puolella. Levyssä on nopea pudotus, joka vaimentuu loppua kohden. Pudotuskorkeus 14 mm. Mitat: 31x51x9 cm (PxLxK).

### 25380 Mobilisaatiokiila, musta

Mobilisaatiokiila soveltuu esimerkiksi selkärangan, käden tai nilkan mobilisointiin. Kova mobilisaatiokiila, jossa on keskellä ura. Mobilisaatiokiila on valmistettu polyuretaanista. Koko 15,5 x 9,9 x 5 cm (PxLxK)

### 25382 Mobilisaatiokiila XL, musta

Kova mobilisaatiokiila, jossa keskellä ura. Mobilisaatiokiila soveltuu esimerkiksi selkärangan, käden tai nilkan mobilisointiin. Mobilisaatiokiila on valmistettu polyuretaanista. Koko: 23 x 11 x 8,8 cm (PxLxK)



32951



32954

## Traktio- ja fiksaatiovyöt

### 304040 Traktiovyö "Totte"

Turvavyötyyppinen, pehmustettu ja varustettu lisäkiinnityksellä, jolla vyön saa terapeutin lantion ympärille.

### 32955 Traktio- / fiksaatiovyö

Pehmeä vyö, 215 cm pitkä, 6 cm leveä, tarrakiinnitys.

### 32957 Traktio- / fiksaatiovyö, pehmustettu

Pehmustettu vyö tarrakiinnityksellä. 215 cm pitkä, 8 cm leveä.

### 304018 Fiksaatiovyö

Vyössä muovinen pikalukko. Pituus 3,2 m.



304040



32955



32957



304018

## Urias ilmalastat

**970001** Urias ilmalasta, 80 cm, käsivarsi pitkä

**970002** Urias ilmalasta, 70 cm, käsivarsi lyhyt

**970003** Urias ilmalasta, 53 cm, käsivarsi puolikas

**970004** Urias ilmalasta, 40 cm, kyynänpää

**970005** Urias ilmalasta, 20 cm, käsi, kaksi ilmakammiota

**970007** Urias ilmalasta, 60 cm, pohje/reisi, kaksi ilmakammiota

**970009** Urias ilmalastan suutin, 100 kpl/pakkaus

Kertakäyttösuutin lastan hygieeniseen puhallustäyttöön

**970011** Urias suodattimet, 5 kpl/pakkaus

Kosteuden pääsyn ehkäisemiseksi lastan puhaltamisen yhteydessä. Suodattimet vaihtavat väriään käyttöiän päättyessä.



970011



970009

## Tyynyt

Tyynymme ovat erittäin korkealaatuisia ja ne on valmistettu kestävästä verhoilumateriaalista ja niissä on vetoketjut. Kaikki tyynyt toimitetaan vakiona harmaana - värinä Future Carbon.



67525B

## Psoas-tyyny

**67525B** Psoas-tyyny, 30 x 40 x 50 cm, kahvalla, harmaa

Tyynyjä saa myös muissa väreissä hieman pidemmällä toimitusajalla. Kysy lisää asiakaspalvelustamme!

## Niska- / nilkkatyyny

**67528B** Niska- / nilkkatyyny, 50 x 20 x 10 cm, harmaa

Tyynyjä saa myös muissa väreissä hieman pidemmällä toimitusajalla. Kysy lisää asiakaspalvelustamme!



67528B



## Pyöreätyyny

**67531B** Pyöreätyyny H1, Ø 10 x 50 cm, kova, harmaa

**67532B** Pyöreätyyny H2, Ø 15 x 50 cm, kova, harmaa

**67533B** Pyöreätyyny H3, Ø 20 x 50 cm, kova, harmaa

**67534B** Pyöreätyyny M1, Ø 10 x 50 cm, pehmeä, harmaa

**67535B** Pyöreätyyny M2, Ø 15 x 50 cm, pehmeä, harmaa

**67536B** Pyöreätyyny M3, Ø 20 x 50 cm, pehmeä, harmaa



## Bobathrulla

**6376B** Bobathrulla, Ø 20 x 100 cm, kova, harmaa

**6375B** Bobathrulla, Ø 30 x 100 cm, kova, harmaa

**6374B** Bobathrulla, Ø 40 x 100 cm, kova, harmaa

**6373B** Bobathrulla, Ø 50 x 100 cm, kova, harmaa



## Kiilatyyny

**67539B** Kiilatyyny, 28 x 20 x 10 cm, harmaa

**67541B** Kiilatyyny, 65 x 35 x 35 cm, harmaa

**67540B** Kiilatyyny, 90 x 60 x 32 cm, harmaa



67540B

67541B

67539B

# Vastaanoton varustus ja tarvikkeet

Tyylikkääst vastaanottotilat antavat hyvän ensivaikutelman. Löydät seuraavilta sivuilta mm. sermejä ja väliverhoja tilanjakajiksi. Mukana myös suuri valikoima anatomisia malleja ja sisustuksellisia anatomisia karttoja. Esittelemme myös tarkasti valittuja mittausvälineitä sekä kulutustuotteita.



## Ropimex-potilasverhot ja -sermit **ropimex®**

Saksalainen Ropimex-verhojärjestelmä on nyt Lojerin valikoimassa. Teleskooppisen verhotangon ansiosta voit muutamassa hetkessä ottaa väliverhon käyttöön, tai laittaa sen seinälle piiloon. Voit myös nostaa verhon kokonaan irti telineestään, ja siirtää sen vaikkapa viereiseen huoneeseen. Verhot on tehty Trevira CS -materiaalista erityisesti terveydenhuoltoon, ja ne täyttävät tiukat paloturvallisuus- ja antibakteeriset vaatimukset. Verhoja on 11 väri vaihtoehtoa.



**ROPBP200 Ropimex Butterfly -sermi 200cm**

**ROPBP Ropimex Butterfly -sermi 140cm**

Ropimex Butterfly -sermi on mobiili sermiratkaisu esimerkiksi sairaaloiden käyttöön. Sermi koostuu kolmesta seinäkkeestä, joista keskimmäinen seisoo tukevasti neljällä pyörällä. Keskimmäisen seinäkkeen molemmin puolin on 360° käännettävät seinäkkeet, jotka saadaan myös taitettua keskelle tilan maksimoimiseksi.



78300

## Luurangot

### 78300 Luuranko

Luuranko luonnollisessa koossa. Kallo kolmessa osassa. Pää, yläraajat ja alaraajat voidaan irrottaa. Pyörällinen jalusta ja pölysuoja kuuluvat toimitukseen. Korkeus 170 cm.



78402



## Selkärangat

### 78402 Selkäranka muovisilla välilevyillä

Liikkuvassa selkärangassa mukana lantio ja kallonpohja. Muoviset välilevyt sekä spinaalihermot. Valtimot kaularangassa. Välilevyn pullistuma L3-L4 välissä. Luonnollisen kokoinen. Jalusta, joka voidaan asettaa pöydälle tai kiinnittää seinään kuuluu toimitukseen. Korkeus 74 cm.

## Luiset mallit ylä- ja alaraajoista

### 78309 Yläraaja

Yläraaja, jossa mukana lapaluu, varttinäluu ja käsi.

### 78313 Käsi

Käsi, jossa mukana varttinäluu ja kyynärluu.

### 78310 Alaraaja

Alaraaja, jossa mukana puolikas lantio ja jalka.

### 78311 Jalka

Jalka, jossa mukana sääriluu ja pohjeluu.



## Selkä- ja kaulanikama

### 71985 Nikamavälilevyn pullistuma

Kaksi lannenikamaa, joissa hermot ja kaksi välilevyä, joissa lateraalinen ja sentraalinen välilevyn pullistuma. Välilevyt voidaan vaihtaa ja mallin avulla on helppo havainnollistaa, mistä välilevyn pullistumassa on kyse. Malli on jalustalla, korkeus 13 cm.



## Lantio

### 78552 Naisen Lantio lantionpohjan lihaksilla

Yksityiskohtainen naisen lantio, irrotettava lantionpohja, jossa 5 erillistä osaa, valmistettu joustavasta materiaalista. Mallissa osa lantion luista ja lantionpohjan lihakset. Koko: 27 x 20 x 18 cm (PxLxK). Paino 1 kg.

78552



## Liikkuvat / Liikuteltavat toimintamallit



- 78500** Polvinivel
- 78501** Kyynärnivel
- 78502** Olkanivel
- 78503** Lonkkanivel
- 78500-4** Liikkuvat toimintamallit, yllä olevat 4kpl

Uusi, laadukkaampi nivelmalli, havainnollistamaan niveltemme liikkuvuutta. Mallit luovat selkeän kuvan anatomiasta ja ne sopivat erinomaisesti opetukseen sekä potilastyöhön. Kaikki mallit ovat luonnollisen kokoisia ja nivelsitein varustettuja. Nivelten rustopinnat on maalattu sinisellä. Toimitukseen sisältyy jalusta.

## Lihasmallit



71995

- 71995** Käsi, 5-osainen

Käsi, jossa lihakset, verisuonet ja hermot. Uloimmat lihakset irrotettavissa. Malli on jalustalla.

- 79500** Polvinivel, irrotettavat lihakset, 12 osaa
- 79502** Olkanivel, irrotettavat lihakset, 5 osaa
- 79503** Lonkkanivel, 7 osaa
- 79504** Kyynärnivel, 8 osaa
- 79500-4** Liikuteltavat mallit, 4 osaa

Laadukkaat nivelmallit havainnollistavat nivelten liikkuvuutta. Mallit luovat selkeän kuvan anatomiasta ja ne sopivat erinomaisesti opetukseen sekä potilastyöhön. Kaikki mallit ovat luonnollisen kokoisia ja nivelsitein varustettuja. Nivelten rustopinnat on maalattu sinisellä. Toimitukseen sisältyy jalustat.



Kysy lisää myös muista anatomisista malleista, jos et löydä etsimääsi.



79502

79503

79500

79504




# Julisteet

## Anatomian oppaat

- 78946** Lihakset
- 78949** Hermot
- 78943** Luusto
- 79790** Käsi ja ranne
- 79799** Käsivarsi ja olka
- 79850** Kaula
- 78024** Spinaali hermot
- 79780** Lonkka ja polvi
- 79795** Jalka ja nilkka

Muovilaminoidut anatomian oppaat kovalla muovipinnalla, joissa reiät ripustuskoukuille. Koko 50 x 65 cm. Kartat toimivat erinomaisesti opetuskäytössä.

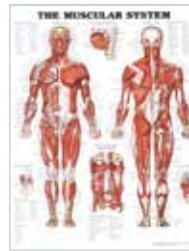

78946



78949



78943



79790



79799



79780



45100



45101



45200



45201

## Anatomian oppaat, muovilaminoidut

- 45100** Lojer-kartta, syvälihakset
- 45101** Lojer-kartta, pinnalliset lihakset
- 45200** Lojer-kartta hermot
- 45201** Lojer-kartta luusto

Lihaskartat sopivat hyvin opetustarkoitukseen. Nimitykset latinaksi. Kuvat muovilaminoitu. Koko 45 x 58 cm.

## Trikkeripistekartta

### 78910 Trikkeripistekartta, 2 kpl

Näyttää yhteyden kipualueen ja triggerpisteen välillä. Koko 82 x 97 cm. Sisältää kaksi karttaa.




78910



## Akupunktiojuliste

### 71820 Akupunktiojuliste

Akupunktiojuliste johon on merkitty kaikki kehon akupisteet. Molemminpuolinen laminointi ja metallilenkki ripustusta varten. 98 x 68 cm.

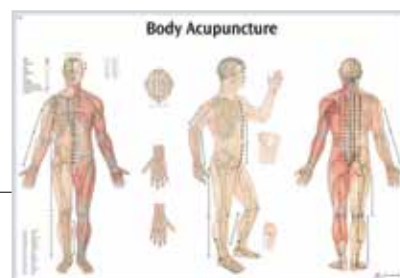

71820

# Mittausvälineet

## Lihassoiman mittaaminen




91810

**Easyforce**

### 91810 EasyForce, Dynamometri, digitaalinen

#### 91810-1 EasyForce lisävarusteet

EasyForce on uusi ja tehokas työkalu lihasvoiman mittaamiseen. Laitteen avulla voidaan objektiivisesti ja luotettavasti mitata voimantuottoa, ja se tarjoaa samalla myös arvokasta dataa potilaan hoitosuunnitelman luomista ja seuraamista varten. EasyForce mahdollistaa hands-free-mittaamisen, sillä se voidaan kiinnittää kahvoista erilaisiin kiinteisiin kohtiin. Näin terapeutin molemmat kädet vapautuvat muuhun käyttöön ja hän voi tarvittaessa keskittyä vain tarkkailemaan potilaan suoritusta. Ainutlaatuinen EasyForce-näyttö tarjoaa visualisoidun mittaustuloksen. Tämän avulla terapeutin on helppo selvittää potilaalle tämän tilannetta ja edistymistä, joka puolestaan lisää potilaan motivaatiota sitoutua hoitosuunnitelmaan.

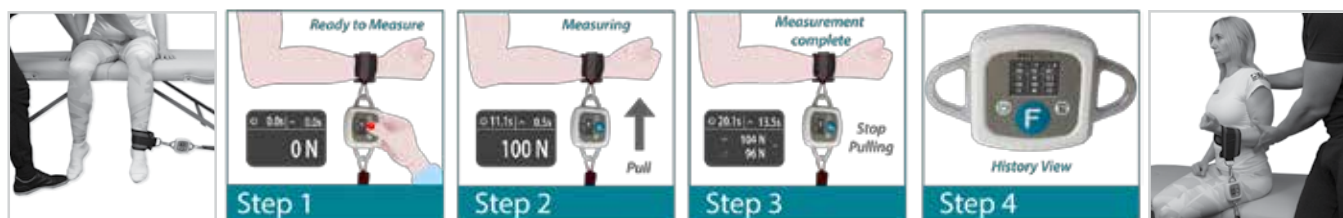

9120220

### 9120220 MusTec HD Dynamometri

MusTec HD (Muscle Technology Handheld Dynamometer) on digitaalinen käsidynamometri eri lihasten voiman testaamiseen ja arviointiin. Digitaalisen dynamometrin avulla lihasvoiman mittaaminen on helppoa, nopeaa ja tarkkaa. MusTec HD:n avulla voidaan mitata objektiivisesti potilaan voimaa eri lihaksissa. Digitaalisessa käsidynamometrissä on patentoitu järjestelmä, jonka ansiosta mittari havaitsee pienetkin voiman muutokset riippumatta siitä, mistä suunnasta voima tulee. Dynamometri mittaa suurimman isometrisen voiman ja mittauksen keston. LCD-näytössä näkyy saavutettu suurin lihasvoima ja testin kesto/aika sekunteina. Mitattu arvo näkyy suoraan digitaalisen dynamometrin näytössä. MusTec HD voidaan asettaa mittaamaan newtonin, punnan tai kilon tarkkuudella. Dynamometri mittaa lihasvoimaa 0,1 - 130 kilogramman välillä. MusTec HD dynamometrissä on ergonominen, ovaali, muotoilu kädelle. Laite on erittäin kevyt, vain 250 grammaa, mikä tekee siitä helppokäyttöisen. Applikaattorien kanssa dynamometri painaa alle 500 grammaa.

## Puristusvoiman mittaaminen

### 9120240 Käsidynamometri Baseline

Mittaa kädenpuristusvoiman välillä 0–90 kg. Helppokäyttöinen ja antaa täsmälliset mittaustulokset. Otekahvassa 5 eri asentoa. Toimitetaan säilytyslaatikossa.



9120240

**120600 Käsidynamometri Jamar**

Jamar on alkuperäinen ja suosituin käsidynamometri eri tutkimusten mukaisesti. Se mittaa käsivoiman 0-90 kg väliltä. Antaa tarkat arvot ja sitä on helppo käyttää. Otteen voi asettaa 5:een eri asentoon. Toimitetaan säilytyslaatikossa.



120600



120605

**120605 Jamar Plus+ käsidynamometri, digitaalinen**

Jamarin käsidynamometri selkeälukuisella digitaalisella näytöllä. Mittaa käsivoiman 0-90kg väliltä, tarkka mittaustulos. Otteen voi asettaa viiteen eri asentoon. Toimitetaan säilytyslaatikossa. Patterikäyttöinen (2kpl AAA).

## Kaularangan liikkuvuuden mittaaminen

**91821 Myrin Goniometri**

Kaularangan liikkuvuuden mittaukseen, mutta voidaan käyttää myös muiden nivelten mittaukseen. Koostuu kompassikotelosta varustettuna kompassineulalla ja kallistusneulalla. Sisältää myös tarranauhan sekä tarvittaessa suoran ja kulmamuuvilastan, joka helpottaa kulmamittarin sijoittamista oikeaan kohtaan suhteessa mitattavaan niveltoimintoon. Toimitetaan kätevässä laukussa.



91821

## Kulmamittari / goniometri

**91800 Easyangle, digitaalinen goniometri**


Erittäin suosittu moderni kulmamittari, joka mittaa kehon kaikkien nivelten liikelaajuuden ja korvaa perinteiset goniometrit. Mittaria voidaan käyttää vain yhdellä kädellä ja toisella kädellä voidaan tukea potilasta. Tulos on helposti luettavissa näytöltä, ja viisi viimeistä mittausta tallennetaan. Mittatarkkuus +/- 1 astetta. CE-merkitty MDD-direktiivin mukaan. Sisältää USB-latauskaapelin.



91800

**91818 Kulmamittari / Goniometri 30 cm**

Klassinen muovista valmistettu kulmamittari/goniometri. Kulmamittari on 30 cm pitkä, ja siinä on kaksi vartta. Astelevyssä on 360 astetta ja mitat ovat yhden asteen välein.

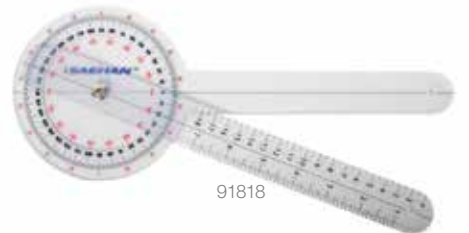

91818

**91817 Kulmamittari / Goniometri 20 cm**

Klassinen muovista valmistettu kulmamittari/goniometri. Kulmamittari on 20 cm pitkä, ja siinä on kaksi vartta. Astelevyssä on 360 astetta ja mitat ovat yhden asteen välein.



91817

**9121005 Kulmamittari, taskumalli, 17 cm**

Yksinkertainen taskumalli, joustavasta muovista. 17 cm pitkä.



9121005

## Refleksivasara

### 91960 Refleksivasara, "Babinski"

Varsi ruostumatonta terästä, pyöreä kuminen pää, jonka voi asettaa kahteen eri asentoon. Mukana myös tunnontestaus kärki.



91960

## Tuntotestaus

### 91816 Tuntotestauspyörä Wartenberg

Stimuloiva "piikkipyörä" neurologisten tuntopuutosten tutkimiseen.



91816

## Äänirauta

### 92850 Äänirauta 256 Hz

Taajuus 256 Hz. Pituus 17,5 cm..



92850

## Mittanauha

### 91807 Mittanauha, muovinen, 150 cm




91807

## Liukuesteliina

### 62000 Liukuesteliina, rulla 40x200 cm

Liinassa on erittäin hyvä tartuntakyky/liukueste-ominaisuus. Leikataan haluttuun kokoon ja voidaan käyttää esineiden alla tai vaihtoehtoisesti henkilökohtaisen pitokyvyn luomiseksi.

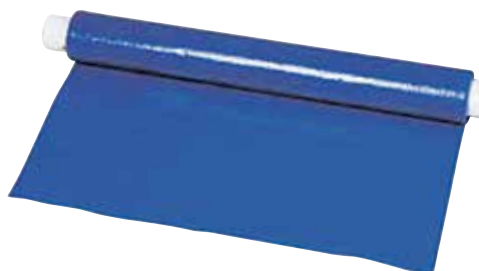

## Askelmittari

91870



### 91870 Askelmittari Walking Style One 2.0

Askelmittari, joka ilmoittaa askelten lukumäärän, kuljetun matkan pituuden sekä kellonajan. Voidaan kiinnittää esimerkiksi vyöhön tai kuljettaa mukana laukussa tai taskussa.

## Ajanottokellot

### 91830 Ajanottokello, analoginen

### 14002 Digitaalinen ajanottokello

Hanhart Stopwatch Alpha Digital

Tyylikkäästi muotoiltu ja helppokäyttöinen digitaalinen kello, jossa on suuri LCD-näyttö. Kellossa on tärkeimmät perusajanmittaustoiminnot, herätyskello hälyttimellä, päivämäärän ja kellonajan tiedot, sekä ajastinrenkas, joka tekee ajanottamisesta entistäkin monipuolisempaa.



91830



14002

## Peililaatikko

### 27363 Peililaatikko

Helppokäyttöinen, vakaa ja laadukas peililaatikko, joka näyttää selvästi jalkojen kuormituspinnat vihreällä LED-valolla. Suurin kuormittavuus 135 kg. Koko: 43,5 x 42,5 x 22 cm (PxLxK). Paino 8 kg.



27363

## Vaa'at

### 28007 Digitaalinen vaaka, Seca Robusta 813

Erityissuunniteltu vaaka, jossa luistamaton kumitettu pinta ja matala astinkorkeus. Kapasiteetti 200 kg. Iso näyttö 29 mm numeroilla. Sisältää 4 kpl. paristoja (AAA). Enimmäiskapasiteetti 200 kg. Painon tarkkuus 100 grammaa. Koko: 37 x 43 x 4,7 cm (PxLxK). Paino 2,6 kg. CE-merkintä 89/336/EEG mukaan.



28007

## Verenpainemittarit

### 27077 Medisana BU 530 verenpainemittari

Medisana BU 530 on täysautomaattinen verenpainemittari käsivarteeseen, joka mittaa systolisen ja diastolisen verenpaineen sekä sykkeen olkavarresta. Suuri ja selkeä LCD-näyttö isoilla numeroilla, näyttää myös päivämäärän ja kellonajan. Sisältää muistitoiminnon 120:lle mittaukselle kahdelle henkilölle ja laskee kolmen viimeisimmän mittauksen keskiarvon. Näyttää rytmihäiriöt. Luokittelee mittaukset liikennevalovärein WHO:n verenpainesuosituksen mukaisesti.



27077

# Kulutustarvikkeet



## Kinesioiteippi BalanceTape

BalanceTape-kinesioiteipit ovat Lojer Groupin kehittämiä tuotteita, ja ne ovat saaneet paljon kiitosta ammattilaisilta. Teippi on yhtäaikaan sekä tarpeeksi jämää että joustavaa. Jämäkkyyttä tarvitaan asennon korjaamiseen ja joustavuutta siihen, että teipillä ei estetä liikkumiskykyä. Monet kinesioiteipit ovat liian joustavia, jolloin asennon korjaaminen on heikkoa.

### BalanceTape Sensitive

#### **BT.MS-Beige** BalanceTape Sensitive, 6 metriä, beige

Balance Tape Sensitive -teipeissä on käytetty normaalia vähemmän liimaa. Teippiä suositellaan henkilöille, joilla on herkkä iho tai jotka ovat allergisia liimoille / laastarille.



### BalanceTape Regular

- BTBeige.XS** BalanceTape, 6 metriä, beige
- BTPink.XS** BalanceTape, 6 metriä, pinkki
- BTRed.XS** BalanceTape, 6 metriä, punainen
- BTYellow.XS** BalanceTape, 6 metriä, keltainen
- BTTurq.XS** BalanceTape, 6 metriä, turkoosi
- BTBlack.XS** BalanceTape, 6 metriä, musta



### BalanceTape Regular 32 m

- BTTurq.XS32** BalanceTape, 32 metriä, turkoosi
- BTBlack.XS32** BalanceTape, 32 metriä, musta



Löydät lisätietoa BalanceTape-kinesioiteipeistä osoitteessa [www.balancetape.com](http://www.balancetape.com).



## Kinesioteipit Meridius

Helpottaa lihaskireyttä, lievittää kipua sekä parantaa lymfaneste- ja verenkiertoa. Teipissä ihonkaltainen elastisuus. Teippi mahdollistaa nivelen täyden liikkuvuuden, sillä teippi venyy 130–140 %. Lateksiton ja hengittävä. Sietää suihkun ja kylpemisen ja pysyy iholla jopa yli viikon. Leveys 5 cm. Useita eri väri vaihtoehtoja.

- 9501 Kinesioteippi Meridius, 5 m, beige
- 9502 Kinesioteippi Meridius, 5 m, musta
- 9503 Kinesioteippi Meridius, 5 m, sininen
- 9504 Kinesioteippi Meridius, 5 m, pinkki
- 9505 Kinesioteippi Meridius, 5 m, keltainen
- 9501-12 Kinesioteippi Meridius, 5 m, 12 kpl lajitelma
- 9511 Kinesioteippi Meridius, 32 m, beige
- 9513 Kinesioteippi Meridius, 32 m, sininen
- 9514 Kinesioteippi Meridius, 32 m, pinkki



9511

## Kinesioteipit TheraBand

Thera-Bandin kinesioteippi korjaa kehon lihasjännitystä, lievittää kipua sekä parantaa verenkiertoa. Teipissä on kuvio, joka mahdollistaa oikean venyvyyden: pieni kuusikulmio vastaa 25% venyvyyttä, kun taas suuri kuusikulmio 50% venyvyyttä. Täysin venytettynä teippi kaksinkertaistaa oman pituutensa. Pysyy kiinni ja tarjoaa kestävästi tuen jopa viideksi päiväksi.

- 12926 Kinesioteippi Thera-Band, 5 m, musta
- 12928 Kinesioteippi Thera-Band, 5 m, beige
- 12929 Kinesioteippi Thera-Band, 5 m, sininen
- 12930 Kinesioteippi Thera-Band, 5 m, vaaleanpunainen
- 12932 Kinesioteippi Thera-Band, 5 m, vihreä
- 12923 Kinesioteippi Thera-Band, 31 m, musta
- 12925 Kinesioteippi Thera-Band, 31 m, sininen



12929, 12925



12930



## Elastiset siteet

- 9205 Elodur Forte Dauerbinda, leveys 8 cm
- 9206 Elodur Forte Dauerbinda, leveys 10 cm

9205



- 9301 Optiplaste-C elastinen liimaside 6 cm x 2,5 m

9301



## Terapiateipit

### 9401 Urheiluteippi Cramer 1050i

#### 9401-32 Urheiluteippi Cramer 1050i, 32 rullaa

Tunnettu urheiluteippi Cramerilta. Ihoystävällinen ja korkealaatuinen liimapinta takaa erittäin hyvän tartunnan ihoon. 100% puuvillaa. Lateksiton. Pituus 13,7m ja leveys 3,8cm.

### 9107-1 Urheiluteippi Strappal, 1 rulla

#### 9107 Urheiluteippi Strappal, 24 rullaa

Tunnettu urheiluteippi nivelsiteiden ja lihavammojen ennaltaehkäisyyn tai kevennys- tai tukisiteeksi. Strappalin liima on iholle hellävarainen. Sillä on korkea tartuntakyky ja teippi on helppo repäistä poikki pituus- ja poikittaissuunnassa. Hengittävä. Lateksiton. Leveys 4 cm ja pituus 10 metriä

### 9207 Leukotape Classic, 1 rulla

#### 9207-12 Leukotape , Classic, 12 rullaa

Perinteinen vahvasta kankaasta ja hyvällä tarttumiskyvyllä valmistettu urheiluteippi altistuneisiin paikkoihin ja märkiin olosuhteisiin. Käytetään ennaltaehkäisevässä tarkoituksessa tai tukena urheilussa tai sairaanhoidossa. Helppo katkaista. Materiaali: 100% puuvillaa. Sisältää lateksia. Leveys 3,75 cm. Pituus 10 metriä.

### 9208 Leukotape P, 1 rulla

#### 9208-6 Leukotape P, 12 rullaa

Erittäin vahva teippi tilanteisiin, joissa tarvitaan lisätukea, kuten urheiluvammoihin. Tavalliset käyttöalueet ovat nilkkojen ja polvien teippaukset. Teippi on helppo katkaista ja siinä on korkea ja pitkäaikainen tarttumiskyky. Valmistettu rayon-kankaasta. Leveys 3,8 cm. Pituus 13,7 metriä.



## Tarvikkeet

### 9209 Teippialusta Hypafix

Hypafix on itsekiinnittyvä, non-woven-laatuinen kangas, jota käytetään teippialustana tai siteiden kiinnitykseen. Muotoutuu helposti kehon äärioviivojen mukaan. Jaettu suoja-paperi helpottaa käyttöä. Hengittävä. Lateksiton. Leveys 5 cm. Pituus 10 metriä.

### 9210 Kiinnityssuihke, teippaukseen

Tensospray - adhesive spray antaa läpinäkyvän ja nopeasti kuivuvan kalvon. Valmistettu ihon suojaamiseksi teippauksen yhteydessä ja teipin tarttumisen parantamiseksi. Suihkuta 5-10 cm etäisyydeltä usea ohut kerros parhaan tuloksen saamiseksi.

Ei saa käyttää vahingoittuneelle iholle. Pullon koko 300 ml.

### SAX Teippisakset

Tehokkaat kangassakset. Sopivat sekä oikeaan, että vasempaan käteen. Pehmeä ja ergonominen kädensija on miellyttävän tuntuinen. Lyhyt ja voimakas terä ruostumattomasta teräksestä on erinomainen teipille. Pituus 21cm.





## Suojapaperit, rullat

- 11100** Hoitopöytäruilla, luonnonvalkoinen, 50 cm x 200 m, 2 rll/pak.  
**11107** Hoitopöytäruilla, luonnonvalkoinen, 60 cm x 200 m, 2 rll/pak.  
**11101** Hoitopöytäruilla, valkoinen, 50 cm x 200 m, 2 rll/pak.

Perinteiset paperirullat hoito- tai tutkimuspöydille. Pituus 200 metriä. Myydään pareittain.

- 11104** Hoitopöytäruilla, kuitukangas, 50 cm x 200 m  
**11105** Hoitopöytäruilla, kuitukangas, 60 cm x 200 m

Laatupaperirullat kuitukankaasta, kun haluat pehmeän ja miellyttävän paperin. Kuitukangas on erittäin kestävä. Paksuus: 24 g / m<sup>2</sup>. Pituus 200 metriä. Rullia myydään yksittäin.



## Suojapaperit, kuitukangasarkit

- 11108** Hoitopöytäpaperi Fine, kuitukangas, valkoinen arkki  
**11109** Hoitopöytäpaperi Fine, kuitukangas, sininen arkki  
**11110** Hoitopöytäpaperi Fine Soft, kuitukangas, valkoinen arkki

Kuitukangas on erittäin kestävä, ihoystävällistä ja pehmeää paperia, joka tuntuu asiakkaasta miellyttävältä. Paksuus: Fine 27 g / m<sup>2</sup> ja Fine Soft 20 g / m<sup>2</sup>. Arkkikoko 60x195 cm. sisältää x-viillon, 200 kpl/ltk.



11108, 11109

## Suojapaperit, pääosa

- 11300** Suojaliina, valkoinen  
 Koko: 49 x 49. 1000 kpl  
**11310** Soft-alusliina kasvoaukole, pehmeä  
 Koko 40 x 60 cm. 500 kpl.  
**11301** Kasvoaukon suojaliina, kuitukangas, x-viillolla  
**11303** Kasvoaukon suojaliina, luonnonvalkoinen  
 x-viillolla Koko 35 x 40 cm, 500 kpl.

- 11308** Soft-alusliina kasvoaukole, pehmeä  
 Koko 30 x 40 cm. 500 kpl.



11310, 11300

## Paperirullateline

- 48950** Paperirullateline  
 Seinään kiinnitettävä. Epoksimaalattu valkoinen.  
 Sopii maksimissaan 60 cm leveälle paperirullalle. Pituus 63 cm.



11301, 11303, 11308

48950

## Desinfiointi- ja puhdistustuotteet

### 13500 Desinfiointiliinat, 200 kpl

Antibakteeriset ja kuitukankaaiset desinfiointiliinat soveltuvat ammattikäyttöön. Desinfiointiliinoja voidaan käyttää mm. käsien, hoitopöytien pintojen, tynnyjen, harjoittelulaitteiden, ultraääni-antureiden ja paineaaltolaitteiden applikaattoreiden jne. puhdistukseen. Desinfiointiliinat toimitetaan käytännöllisessä purkissa, jossa on x-leikkaus kannessa. Pakkauksessa 200 liinaa ja liinojen koko on 20cm x 20cm.

### 1310405 Desinfiointiaine DesiPlint, 0,5 litraa

### 13105 Desinfiointiaine DesiPlint, 5 litraa

Desinfiointiaine DesiPlint on suunniteltu erityisesti hoitopöytä varten mutta sitä voidaan käyttää myös muihin tuotteisiin. Ei kuivaa verhoilua, koska se ei sisällä alkoholia. Vaikuttava aine on 0,2% klooriheksidiiniä. Tappaa useimmat bakteerit sekä tietyt virukset. Käytetään laimentamattomana.

### 13213 Lojer käsidesi, 0,5 L pumppupullo

### 13213-12 Lojer käsidesi, 0,5 L pumppupullo, 12-pack

### 13213-24 Lojer käsidesi, 0,5 L pumppupullo, 24-pack

Tuhoaa bakteerit 99,99% muutamassa sekunnissa. Lojer käsidesi sisältää 68% etanolia ja se kuivuu nopeasti. Tuote on kosteuttava ja kädet jäävät käytöstä mukavan pehmeiksi.

### 13200 DesiSkin ihonpuhdistusaine, 0,5 litraa

### 13202 DesiSkin ihonpuhdistusaine, 5 litraa

Nestemäinen ihonpuhdistusaine jota käytetään laimentamattomana ihon, käsien, pintojen, ruiskujen ja ampullien desinfiointiin. Myös ennen lääkintätoimenpiteitä. Etanolipitoisuus 62%.

## Kirurginen kasvomaski

### HY99F2 Kirurginen kasvomaski IIR, 50 kpl

Kertakäyttöinen, kuitukankaasta valmistettu 4-kerroksinen CE-merkitty kirurginen kasvomaski (eli kirurginen suu-nenä-suojus). Kasvomaskissa on pehmeät, joustavat ja kestävät korvalenkit sekä muotoiltava nenävahvike. Suojamaskissa on alhainen hengitysvastus, joten sitä on miellyttävä käyttää. Lojerin jälleenmyymä kirurginen kasvomaski on CE-merkitty lääkinnällinen laite (93/42/ETY) ja se täyttää terveydenhuollon kirurgisen suu-nenäsuojuksen standardin EN 14683:2019+AC:2019 vaatimukset. Roiskesuojattu (malli IIR) suu-nenäsuojus tarjoaa kasvosuojaimista parhaimman suojan partikkeleilta ja sen suodatustehokkuus (BFE) on testatusti yli 98%. Roiskesuojattu malli suojaa henkilöä roiskeilta esimerkiksi toimenpiteiden yhteydessä.



13500

1310405

13105



13213

13213-12



13200

13202



HY99F1



Katso ohjeet oikeaoppiseen kasvomaskin käyttöön verkkokaupassa [www.shop.lojer.com](http://www.shop.lojer.com)

# Ystävällinen palvelu, asiantuntemus, laatu ja nopea toimitus

Tilaukset kellon ympäri verkkokaupasta:  
**[www.shop.lojer.com](http://www.shop.lojer.com)**

hinnat | tarjoukset | lisätietoa



## Huoltopalvelut

Lojer ja Delta-hoitopöytien ja muiden valmistamiemme laitteiden lakisääteisestä vuosihuollosta sekä korjauksista ja varaosapalvelusta vastaa Lojer Medical Service, jolla on yksiköt Sastamalassa, Hollolassa, Vantaalla ja Kempeleessä.

Varaosat toimitamme suoraan logistiikkakeskuksestamme tai kotimaisten tehtaidemme varastoista arkisin noin vuorokauden sisällä tilauksesta.

Kysy lisää [service@lojer.com](mailto:service@lojer.com) tai puh. 010 830 6750

## Rahoitus

Lojer-rahoituksessa ei ole ylimääräisiä tai kalliita päivävuokria eikä pienellä prantättyjä avausmaksuja. Maksat vain sovitulta vuokra-ajalta sekä halutessasi lunastuksen yhteydessä kiinteän 30 euron maksun vuokra-ajan jälkeen. Monet rahoitusyhtiöt perivät leasing-sopimuksista normaalisti ns. päivävuokraa, joka voi tarkoittaa jopa 3kk ylimääräistä vuokraa.

Lojer-rahoituksen avulla maksat hankintaa kuukausierissä (laskutus 3kk välein), ja vuokra-ajan jälkeen voit lunastaa hankinnan 30 euron hintaan. Voit testata verkkokaupasta löytyvällä laskurilla kuukausierän suuruuden.



Ota yhteyttä huoltoon  
[service@lojer.com](mailto:service@lojer.com) tai  
puh. 010 830 6750





## Verkkokaupan asiakaspalvelu

---

Tilaukset ja tiedustelut toimistoaikoina  
[myynti@lojer.com](mailto:myynti@lojer.com) tai puh. 010 830 6785

## Lojer shop / noutovarasto

---

Lojerila on pieni noutovarasto sekä Hollolan että Kempeleen toimipisteiden yhteydessä.

Hollola: Avoimma ma-to 9–14  
Tarmontie 2-4, ovi 1, 15860 Hollola

Kempele: Avoimma ma-pe 8–15  
Pikkutie 4, 90440 Kempele

Tuotteina löytyy mm. hierontapöydän paperia, öljyä, rasvaa, desinfiointiaineita, kinesiotapeja ja akupunktioneuloja. Valikoima on rajallinen ja saatavuuden voi varmistaa etukäteen.

## Lojer Oy toimitusehdot

Tämän tuotekuvaston tuotteet ovat myynnissä Suomessa sekä yksityisille henkilöille että yrityksille. Ajantasaiset tuotteiden hinnat löydät kätevimmin vieraillemalla kotisivuillamme verkkokaupassamme [www.shop.lojer.com](http://www.shop.lojer.com). Lisäksi voitte ottaa yhteyden asiakaspalveluumme. Voitte jättää myös yhteydenotto-pyyntön, niin me otamme yhteyttä teihin.

### HINNAT:

Hinnat ovat ilmoitettu euroina, ja niihin lisätään arvonlisävero 24 %. Pidätämme oikeuden hintojen muutoksiin.

### MAKSUEHTO:

Verkkokaupassa maksaminen tapahtuu pankki- ja luottokorteilla. Mikäli asiakkaalle on myönnetty luottotili, verkkokaupan maksuehto yritysasiakkaille on 14 pv netto. Tavarantoimitus siirtyy asiakkaalle vasta kun lasku on kokonaisuudessaan maksettu.

### TOIMITUSTAPA PAKETEILLE:

#### Nouto Postista (postipaketti)

Vastaanottaja saa saapumisilmoituksen tekstiviestillä, sähköpostilla ja Postin mobiilisovelluksella, mikäli se on vastaanottajalla käytössä. Tietojen puuttuessa toimitetaan paperinen ilmoitus vain Postin toimipisteistä noudettaville lähetyksille. Pakettia säilytetään 7 vrk, noutamattomat lähetykset palautetaan lähettäjälle.

#### Posti Express -paketti (ensisijaisesti yrityksille)

Lähetys jaetaan osoitekorttiin merkittyyn osoitteeseen ja luovutetaan kuittausta vastaan. Palveluun kuuluu yksi jakeluyritys. Jos vastaanottajaa ei tavoiteta hänelle jätetään saapumisilmoitus ja lähetys toimitetaan vastaanottajan lähipostiin noudettavaksi. Lähetys palautetaan lähettäjälle jos sitä ei noudeta säilytysajan päätyttyä.

#### Toimitus ovelle sovitus (kotipaketti)

Posti on yhteydessä vastaanottajaan pääsääntöisesti edellisenä työpäivänä sopiakseen jakelujankohdan. Posti on maksimissaan kaksi kertaa yhteydessä vastaanottajaan. Sovittavat toimitusajat vaihtelevat alueittain klo 9-21 välillä. Jos vastaanottajaa ei tavoiteta, hänelle

jätetään yhteydenotto-pyyntö ja jos ei vastaanottaja ei ole yhteydessä lähetys palautetaan lähettäjälle 7 vuorokauden kuluessa.

Painavimmat ja isommat tilaukset (esim. hoitopöytä tai yli 20 rullan paperitilaukset) toimitetaan Postin rahdilla tai Lojerin omalla autolla. Sisäänkantopalvelu lisämaksusta, ota yhteyttä asiakaspalveluumme. Verkkokaupan tilauksia toimitamme vain Suomeen.

### RAHTIMAKSUT VERKKOKAUPPA:

Lojer Shop -verkkokaupan toimituskulut riippuvat siitä, mihin rahtiluokkaan tuote kuuluu. Rahtiluokkia on 8 ja niihin liittyvät toimituskulut on esitetty seuraavassa taulukossa (hinnat alv 0 %):

Rahtiluokka LETTER = 5,90 euroa

Rahtiluokka A = 8,90 euroa

Rahtiluokka B = 10,90 euroa

Rahtiluokka C = 13,90 euroa

Rahtiluokka D = 21,90 euroa

Rahtiluokka E = 54,90 euroa

Rahtiluokka F = 79,90 euroa

Rahtiluokka G = 144,90 euroa

Jokaisen tuotteen tuotesivulla näet mihin rahtiluokkaan tuote kuuluu. Jos ostat usean eri rahtiluokan tuotteita, maksat vain korkeimman rahtiluokan toimituskulut. Luonnollisesti maksat vain yhden toimituskulut riippumatta tilaamiesi tuotteiden määrästä tai vaikka tilaus jaettaisiin useaan eri toimitukseen. Toimituskulut lasketaan automaattisesti mukaan tilaukseesi. Toimituskulujen lisäksi tilaukselle ei tule muita kuluja.

### TOIMITUSAIKA:

Varastotuotteille kaupungeissa 2-3 päivää ja haja-asutusalueilla 3-5 pv. Investointihyödykkeiden osalta toimitusaika vaihtelee tuotekohtaisesti, tarkat tiedot saat asiakaspalvelustamme.

### TAKUU:

Kaikilla tuotteillamme on kuluttajan-suojalain mukainen vähintään kuuden kuukauden takuu. Takuu on myyjän tai aikaisemman myyntiportaan vapaaehtoi-

sesti antama lisäsitoumus. Takuu kattaa valmistus- ja raaka-ainevirheet, mutta ei mm. väärinkäyttöä tai kulumisesta johtuvaa vikaantumista. Tarkan Lojerin, maahantuojan tai valmistajan tarjoaman takuujan näet tuotteen pakkauksesta tai käyttöohjeista. Lojer Oy:n ja muiden Lojer Groupin yhtiöiden itse valmistamilla tuotteilla on rajoitettu 24 kk takuu valmistus- ja raaka-ainevirheille, ja 10 v takuu runkorakenteille.

### MUUT SOPIMUSEHDOT:

Noudatamme toimituksissamme yleisiä kotimaisia sopimusehtoja n101. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

### TILAAJAVASTUU

Lojer on myös sitoutunut hoitamaan kaikki yhteiskunnalliset vastuunsa täsmällisesti ja on tilaajavastuun mukainen Luotettava Kumppani. Yhtiön tiedot ovat tarkastettavissa [tilaajavastuu.fi](http://tilaajavastuu.fi)-palvelusta.

# Aakkosellinen hakemisto

Airex-tuotteet .....	48, 75, 76	Julisteet .....	82	Pallot .....	45, 50, 51
Akupunktiojulisteet.....	65	Jumppapallot .....	50	Paperirullatelineet .....	11, 16, 90
Akupunktionastat.....	66	Juoksumatot .....	36, 40	Paperituotteet .....	90
Akupunktioneulat.....	62-65	Kahvakuulat .....	53	Parafiiniallas .....	72
Akupunktionuket ja -mallit.....	64	Kannettava hoitopöytä.....	19	Parafiinit .....	72
Akupunktiosimulaattorit .....	67	Kasvoaukon pehmusteet .....	19	Passiivinen polven hoito.....	34
Alasvetolaitteet.....	23-24	Kasvomaski .....	91	Peillaatikko .....	86
Anatomian oppaat ja julisteet .....	82	Kauneudenhoitotuoli.....	21	Pehmusteet .....	19
Anatomiset mallit.....	80-81	Kiilatyynyt .....	78	Pilatesmatto .....	76
Askelmittari .....	85	Kinesioteipit .....	87, 88	Pilatesrulla.....	46
BalanceTape .....	87	Kinos X.....	12-13	Plintit .....	6-16
Blackroll .....	69	Kippilauta .....	18	Powerband .....	44
Bobath-pöydät .....	17	Korva-akupunktio .....	66	Psoas-tyynyt .....	78
Bobathrullat .....	78	Korvanastat .....	66	Puhdistustuotteet .....	91
Bodytrainer .....	45	Kuitukangasarkit ja -rullat.....	90	Pulleyt .....	23-25
Bosu .....	48	Kuivaneulaus.....	64	Puolapuu ja -lauta.....	26
Capre-hoitopöydät.....	8-11	Kulmamittarit .....	84	Puristusvoimamittarit .....	83, 84
Challenge disc .....	47	Kuminauhat.....	42-44	Pyöreät tyynyt .....	78
CLX-kuminauhat .....	43	Kuntopyörät .....	34, 37	Pyörät .....	39
CPM polvihoito.....	34	Kylmäpakkaukset .....	73	Radiaaliset paineaaltolaitteet.....	55, 56, 57
Crosstrainer .....	40	Kylmätuotteet .....	73	Refleksivasara.....	85
Delta-hoitopöydät .....	14-16	Kylmävoiteet.....	73	Restoraattorit .....	35
Desinfiointi- ja puhdistustuotteet.....	91	Käsidynamometrit .....	83, 84	Sakset.....	89
Dippitangot .....	26	Käsien harjoituspallo .....	45	Satulatuolit .....	20
Droppilevyt.....	76	Käsipainot .....	53	Seirin .....	65, 66
Dry needling -akupunktioneulat.....	64	Kävelysauvat.....	50	Shockwave paineaaltolaitteet .....	55-57
Dynamometrit .....	83, 84	Laitepöytä .....	59	Soutulaitteet .....	38
EasyAngle .....	84	Leukotape.....	89	Speed Pulley .....	23
EasyForce .....	83	Levytanko ja -painot .....	54	Steppilauta.....	49
Elastiset siteet .....	88	Lihasmallit .....	81	Storz .....	55-58
Ergo-Fit Power Line .....	30-31	Liukuesteliina .....	85	Suojapaperit .....	90
Ergo-Fit Vector Line .....	27-29	Loops.....	43, 44	Suu-nenä-suojus.....	91
Faskiavaha .....	69	Luuranko .....	79	Sähkölaitteet .....	59, 60, 61
Fiksaatiovyöt .....	77	Lämpöpakkaukset .....	71, 72	Tasapainolaudat.....	47
Flexible Exercise Bars .....	45	Lääkinnällinen harjoitusterapia .....	22-23	Tasapainotyynyt.....	47, 48
Flowin liukumatto .....	49	Magnetolith .....	58	Teipit .....	87, 88, 89
Fluid .....	38	Magneettiterapia.....	58	Tens/Tems-laitteet .....	61
Fokusoidut paineaaltolaitteet .....	57	Manuped .....	35	Terapeuttinen ultraääni .....	60
Functional Trainer.....	50	Manuthera-hoitopöytä .....	6, 7	TheraBand-tuotteet.....	42-45, 88
Fysioterapiapeili .....	26	Masterpuls paineaaltohoitolaitteet .....	55-56	Tilttipöydät .....	18
Goniometrit .....	84	Matkahoito- / hierontapöytä.....	19	Trappoliini .....	49
Harjoituslaitteet .....	22-33	Matot .....	75, 76	Treenilaitteet .....	27-33
Harjoitustuubit .....	44, 45	Mattojen säilytys .....	76	Treenipenkki .....	26
Hegu-akupunktioneulat .....	62-64	Medicin pallot .....	51	Trikkeripistejuliste.....	82
Hierontapöydät .....	8-16	Mittanauha .....	85	Tuntotestaus .....	85
Hierontarasvat ja -voiteet .....	70	Mittausvälineet .....	83-84, 85, 86	Tuolit ja jakkarat .....	20
Hierontatuotteet.....	68-73	Mobilisointikiilat .....	76	Tyynyt .....	78
Hierontaöljyt .....	69, 70	Monark-pyörät .....	37	Työtuolit.....	20
Hihnat alasvetolaitteisiin .....	25	Motion Guidance .....	46	Ultraäänigeeli .....	60
Hoitopöydät .....	6-19	Myrin goniometri .....	84	Ultraäänilaitteet .....	59, 60
Hygieniatyynyt .....	19	Neulastimulaattorit .....	67	Urheiluteipit.....	89
Hypynaru .....	49	Niskatraktio .....	76	Urias-ilmalastat .....	77
Ilmalastat .....	77	Nylatex-nauhat .....	73	Vaaka .....	86
Incline Decline -lauta.....	49	Nystyräpallot .....	51	Vastuskuminauhat .....	42-44
ITO .....	59, 60	Olkavetolaitteet .....	46	Venyttelymatot .....	75, 76
Jakkarat .....	20	Paineaallohoitolaitteet .....	55-57	Verenpainemittari .....	86
Joogamatot .....	76	Painojen säilytys .....	54	Verhoilun värikartta .....	5
		Painomansetit .....	52	Voimistelupallot .....	51
		Pallojen säilytys.....	52	Värikartta verhoilu.....	5
		Pallopumppu .....	52	Äänirauta.....	85